

Lâminas para Bisturi

Modelos: Aço Carbono e Aço Inoxidável

INSTRUÇÕES DE USO

DESCRIÇÃO: Lâminas descartáveis para bisturi.

COMPOSIÇÃO: Modelos de Aço Carbono e Aço Inoxidável.

INDICAÇÃO: As lâminas descartáveis para bisturi são indicadas para cortar tecidos do corpo humano durante procedimentos cirúrgicos e outros procedimentos aplicáveis.

CONTRAINDICAÇÕES: Não utilizar para além de cirurgias. Não utilizar se o paciente for alérgico a metais. Não utilizar em cirurgias cardiovasculares, neurovasculares e oftalmológicas.

MODO DE USO: Selecione a lâmina conforme a necessidade. Inspeção a embalagem quanto à integridade e data de validade. Abra assepticamente o invólucro de alumínio pela face indicada, de modo que o lado cortante da lâmina fique voltado para cima; Com o auxílio de um porta-agulhas ou pinça cirúrgica, empurre a lâmina em direção ao cabo até que se encaixem; Utilize o produto conforme técnica cirúrgica adequada; Após o uso, remova cuidadosamente a lâmina (com auxílio de uma pinça) desencaixando-a do cabo.

LIMPEZA/ESTERILIZAÇÃO: Produto esterilizado por radiação gama. Produto descartável e pronto para o uso. Nenhum método de limpeza e desinfecção é requerido.

DESCARTE: Descarte conforme legislação local vigente.

ADVERTÊNCIAS: Leia as instruções de uso. O produto deve ser utilizado apenas por profissional qualificado. Antes de usar verifique a integridade do produto e da embalagem junto com o prazo de validade. Utilize o produto imediatamente após abrir a embalagem. Produto de uso único, proibido reprocessar. A esterilidade do produto não é garantida caso a embalagem esteja danificada. Manter fora do alcance das crianças.

PRECAUÇÕES: Abra o pacote a partir da direção de abertura para evitar ferimentos.

EFEITOS ADVERSOS: A utilização inadequada ou o uso incorreto do dispositivo pode resultar em eventos adversos para o paciente ou usuário, como cortes profundos ou lesões ao usuário durante a montagem da lâmina.

ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE: Armazene/transporte ao abrigo da luz solar direta e da chuva. Mantenha o produto em local com temperatura entre 10°C a 40°C e umidade entre 35% UR e 65% UR.

PRAZO DE VALIDADE: 05 anos a contar da data de esterilização, em embalagem não violada.

TABELA DE COMPATIBILIDADE – LÂMINA X CABO

Aço Carbono

Modelo de lâmina	Cabo compatível
PCS 9	CABO 3
PCS 10	CABO 3
PCS 10A	CABO 3
PCS 11	CABO 3
PCS 12	CABO 3
PCS 12D	CABO 3
PCS 13	CABO 3
PCS 14	CABO 3
PCS 15	CABO 3
PCS 15C	CABO 3
PCS 16	CABO 3
PCS 17	CABO 3
PCS 18	CABO 4
PCS 19	CABO 4
PCS 20	CABO 4
PCS 21	CABO 4
PCS 22	CABO 4
PCS 23	CABO 4
PCS 24	CABO 4
PCS 25	CABO 4
PCS 36	CABO 4
PCS 40	CABO 4
PCS 60	CABO 8

Aço Inoxidável

Modelo de lâmina	Cabo compatível
PSS 9	CABO 3
PSS 10	CABO 3
PSS 10A	CABO 3
PSS 11	CABO 3
PSS 12	CABO 3
PSS 12D	CABO 3
PSS 13	CABO 3
PSS 14	CABO 3
PSS 15	CABO 3
PSS 15C	CABO 3
PSS 16	CABO 3
PSS 17	CABO 3
PSS 18	CABO 4
PSS 19	CABO 4
PSS 20	CABO 4
PSS 21	CABO 4
PSS 22	CABO 4
PSS 23	CABO 4
PSS 24	CABO 4
PSS 25	CABO 4
PSS 36	CABO 4
PSS 40	CABO 4
PSS 60	CABO 8



Uso odontológico
Odontologic use
Uso odontológico



Serviço de atendimento ao profissional
Technical support
Serviço post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br



Paramount Surgimed Limited
A-106, RIICO Industrial Area, Bhiwadi - 301 019, Distt. Alwar, Rajasthan, India.

Detentor: Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.
CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300
R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná.
Resp. Técnica: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121
Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



indusbello co.

Rev 00 - 25.09.2023
Cód 326110880003

Notificação ANVISA:
Lâminas Aço Carbono: 80213429015
Lâminas Aço Inoxidável: 80213429016



Atenção:
Consulte a RU
antes do uso.



Não utilizar se a
embalagem
estiver aberta ou
danificada.



Não pirogênico.



65%RH
Limites de
umidade.



10°C - 40°C
Limites de
temperatura.



Esterilizado por
Radiação Gama.



Produto de
uso único.



Não reesterilizar.



Manter
seco.



Não esteril.



Fabricante.



Número de lote.



Manter afastado
da luz solar.



Consultar as instruções
para utilização.



Data de fabricação.

Scalpel Blades

Models: Carbon steel and Stainless steel

INSTRUCTIONS FOR USE

- DESCRIPTION:** Disposable scalpel blades.

COMPOSITION: Models of carbon steel and stainless steel.

INDICATION: Disposable scalpel blades are indicated for cutting tissue from the human body during surgical procedures and other applicable procedures. The device is sterilized by gamma radiation. The device is considered invasive and for transient use. The device meets intact skin and mucous membrane.

CONTRAINDICATIONS: Do not use other than surgeries. Do not use if the patient is allergic to metals. Do not use in cardiovascular, neurovascular, and ophthalmological surgeries.

HOW TO USE: Select the blade as needed. Inspect packaging for integrity and expiration date. Aseptically open the aluminum casing on the indicated side, so that the cutting side of the blade is facing upwards; With the help of a needle holder or surgical tweezers, push the blade towards the handle until they fit; Use the product according to appropriate surgical technique; After use, carefully remove the blade (using tweezers) by disconnecting it from the handle. Dispose of in an appropriate place in accordance with current legislation.

CLEANING/STERILIZATION: Product sterilized by gamma radiation. Disposable and ready-to-use. Not cleaning and disinfection methods are required.
- DISPOSAL:** Dispose in accordance with current local legislation.

WARNINGS: Read the instructions for use. The product must only be used by a qualified professional. Before use, check the integrity of the product and packaging along with the expiration date. Use the product immediately after opening the packaging. Single-use product, reprocessing is prohibited. Product sterility is not guaranteed if the packaging is damaged. Keep out of the reach of children.

PRECAUTIONS: Open the package from the opening direction to avoid injury.

ADVERSE EFFECTS: Improper use or incorrect use of the device may result in adverse events for the patient or user, such as deep cuts or injury to the user during blade assembly.

STORAGE/TRANSPORT: Store/transport away from direct sunlight and rain. Keep the product in a place with a temperature between 10°C and 40°C and humidity between 35% RH and 65% RH.

EXPIRY DATE: 05 years from the date of sterilization, in undamaged packaging.

COMPATIBILITY CHART – BLADE / HANDLE

Carbon steel

Blade	Handle
PCS 9	HANDLE 3
PCS 10	HANDLE 3
PCS 10A	HANDLE 3
PCS 11	HANDLE 3
PCS 12	HANDLE 3
PCS 12D	HANDLE 3
PCS 13	HANDLE 3
PCS 14	HANDLE 3
PCS 15	HANDLE 3
PCS 15C	HANDLE 3
PCS 16	HANDLE 3
PCS 17	HANDLE 3
PCS 18	HANDLE 4
PCS 19	HANDLE 4
PCS 20	HANDLE 4
PCS 21	HANDLE 4
PCS 22	HANDLE 4
PCS 23	HANDLE 4
PCS 24	HANDLE 4
PCS 25	HANDLE 4
PCS 36	HANDLE 4
PCS 40	HANDLE 4
PCS 60	HANDLE 8

Stainless steel

Blade	Handle
PSS 9	HANDLE 3
PSS 10	HANDLE 3
PSS 10A	HANDLE 3
PSS 11	HANDLE 3
PSS 12	HANDLE 3
PSS 12D	HANDLE 3
PSS 13	HANDLE 3
PSS 14	HANDLE 3
PSS 15	HANDLE 3
PSS 15C	HANDLE 3
PSS 16	HANDLE 3
PSS 17	HANDLE 3
PSS 18	HANDLE 4
PSS 19	HANDLE 4
PSS 20	HANDLE 4
PSS 21	HANDLE 4
PSS 22	HANDLE 4
PSS 23	HANDLE 4
PSS 24	HANDLE 4
PSS 25	HANDLE 4
PSS 36	HANDLE 4
PSS 40	HANDLE 4
PSS 60	HANDLE 8

**Uso odontológico**
Odontologic use
Uso odontológico


**Serviço de atendimento ao profissional**
Technical support
Servicio post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

**Paramount Surgimed Limited**
A-106, Rilco Industrial Area, Bhiwadi - 301 019, Distt. Alwar, Rajasthan, India.

Detentor: Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.
CNPJ 74.017.706/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300
R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Klugio Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná.
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121
Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

Rev 00 - 25.09.2023
Cód 32610880003

Notificação ANVISA:
Carbon steel: 80213429016
Stainless steel: 80213429016

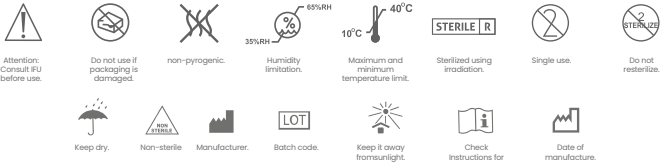

Hojas de Bisturí

Modelos: Acero carbono y Acero inoxidable

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN: Hojas de bisturí desechables.

COMPOSICIÓN: Modelos acero carbono y acero inoxidable

INDICACIÓN: Las hojas de bisturí desechables están indicadas para cortar tejido del cuerpo humano durante procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos aplicables. El dispositivo se esteriliza mediante radiación gamma. El dispositivo se considera invasivo y de uso transitorio. El dispositivo entra en contacto con piel y mucosas intactas.

CONTRAINDICACIONES: No utilizar más que en cirugías. No utilizar si el paciente es alérgico a los metales. No utilizar en cirugías cardiovasculares, neurovasculares y oftalmológicas.

CÓMO UTILIZAR: Seleccione la hoja según sea necesario. Inspeccione el embalaje para verificar su integridad y fecha de vencimiento. Abra asépticamente la carcasa de aluminio por el lado indicado, de modo que el lado de corte de la hoja quede hacia arriba; Con ayuda de un portaagujas o una pinza quirúrgica, empuje la hoja hacia el mango hasta que encaje en su lugar; Utilice el producto según la técnica quirúrgica adecuada; Después de su uso, retire con cuidado la hoja (con una pinza) desconectándola del mango. Eliminar en un lugar adecuado de acuerdo con la legislación vigente.

LIMPIEZA/ESTERILIZACIÓN: Producto esterilizado por radiación gamma. Producto desechable y listo para usar. No

se requieren métodos de limpieza y desinfección.

ELIMINACIÓN: Eliminar de acuerdo con la legislación local vigente.

ADVERTENCIAS: Leer las instrucciones de uso. El producto sólo debe ser utilizado por un profesional cualificado. Antes de su uso, verifique la integridad del producto y del empaque junto con la fecha de vencimiento. Utilice el producto inmediatamente después de abrir el embalaje. Producto de un solo uso, prohibido reprocesamiento. No se garantiza la esterilidad del producto si el embalaje está dañado. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES: Abra el paquete desde la dirección de apertura para evitar lesiones.

EFFECTOS ADVERSOS: El uso inadecuado o incorrecto del dispositivo puede provocar eventos adversos para el paciente o el usuario, como cortes profundos o lesiones al usuario durante el ensamblaje de la cuchilla.

ALMACENAJE/TRANSPORTE: Almacenar/transportar lejos de la luz solar directa y la lluvia. Mantenga el producto en un lugar con una temperatura entre 10°C y 40°C y una humedad entre 35% RH y 65% RH.

FECHA DE CADUCIDAD: 05 años a partir de la fecha de esterilización, en envases intactos.

TABLA DE COMPATIBILIDAD – HOJA / MANGO

Acero carbono

Hoja	Mango
PCS 9	MANGO 3
PCS 10	MANGO 3
PCS 10A	MANGO 3
PCS 11	MANGO 3
PCS 12	MANGO 3
PCS 12D	MANGO 3
PCS 13	MANGO 3
PCS 14	MANGO 3
PCS 15	MANGO 3
PCS 15C	MANGO 3
PCS 16	MANGO 3
PCS 17	MANGO 3
PCS 18	MANGO 4
PCS 19	MANGO 4
PCS 20	MANGO 4
PCS 21	MANGO 4
PCS 22	MANGO 4
PCS 23	MANGO 4
PCS 24	MANGO 4
PCS 25	MANGO 4
PCS 36	MANGO 4
PCS 40	MANGO 4
PCS 60	MANGO 8

Acero inoxidable

Hoja	Mango
PSS 9	MANGO 3
PSS 10	MANGO 3
PSS 10A	MANGO 3
PSS 11	MANGO 3
PSS 12	MANGO 3
PSS 12D	MANGO 3
PSS 13	MANGO 3
PSS 14	MANGO 3
PSS 15	MANGO 3
PSS 15C	MANGO 3
PSS 16	MANGO 3
PSS 17	MANGO 3
PSS 18	MANGO 4
PSS 19	MANGO 4
PSS 20	MANGO 4
PSS 21	MANGO 4
PSS 22	MANGO 4
PSS 23	MANGO 4
PSS 24	MANGO 4
PSS 25	MANGO 4
PSS 36	MANGO 4
PSS 40	MANGO 4
PSS 60	MANGO 8

 **Uso odontológico**
Odontologic use
Uso odontológico

 **Serviço de atendimento ao profissional**
Technical support
Serviço post-venta ao profissional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

 indusbello co.

 **Paramount Surgimed Limited**
A-106, RIICO Industrial Area, Bhiwadi - 301 019, Distt. Alwar, Rajasthan, India.

Detentor: Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.
CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300
R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Klugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná.
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121
Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

Rev 00 - 25.09.2023
Cód 326110880003

Notificação ANVISA:
Acero carbono: 80213429015
Acero inoxidable: 80213429016



Attention:
Consult IFU
before use.



Do not use if
packaging is
damaged.



non-pyrogenic.



Humidity
limitation.



Maximum and
minimum
temperature limit.



esterilizados
con Radiación
Gamma.



No reutilizar.



No esterilice
otra vez.



Proteja de la
humedad.



No esterilice.



Fabricante.



Código de lote.



Mantener
alejado de la luz
solar.



Consulte las
instrucciones
de uso.



Fecha de
fabricación.