

Mantas de Silicone

INSTRUÇÕES DE USO

A Manta de silicone é personalizada para cada modelo de estojo Indusbello. Possui a superfície em forma de pinos para facilitar a acomodação de material nos estojos de esterilização.

COMPOSIÇÃO: Silicone atóxico.

INDICAÇÕES: Acomodar instrumentais nos estojos de esterilização Indusbello a fim de facilitar o processo de esterilização em autoclave, impedindo que os materiais se movimentem durante o processo.

INSTRUÇÕES DE USO: O modelo da manta deve ser compatível com o estojo de esterilização. Coloque a manta de silicone dentro do estojo, mantendo-a plana. Acomode os instrumentais sobre a manta da melhor maneira possível, de acordo com as necessidades.

LIMPEZA: A remoção de sujidades (matérias orgânicas e inorgânicas) deve ser feita com uso de detergente enzimático (mínimo de três enzimas) com diluição conforme orientação do fabricante. A limpeza pode ser feita de forma manual ou de forma mecânica em cuba ultrassônica. Após a lavagem do material, deve ser feito o enxágue com água abundante para remover

quaisquer sujidades e/ou resíduos do detergente. Realize a inspeção visual e se for observado algum remanescente de sujidade, repita o processo de limpeza.

DESINFECÇÃO: Mantenha o produto imerso em ácido peracético a 0,2% durante dez minutos. Seque o produto com pano limpo e seco.

ACONDICIONAMENTO: Acondicione o produto em local exclusivo, armários fechados e protegidos de quaisquer contaminantes.

ADVERTÊNCIA: Certifique-se que o modelo da manta é compatível com modelo do estojo.

PRECAUÇÃO: Realize o processo de limpeza e desinfecção antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

PRAZO DE VALIDADE: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua manipulação.

DESCARTE: O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.



Uso odontológico

Odontologic use
Uso odontológico



Serviço de atendimento ao profissional

Technical support
Servicio post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.co



Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 00 - 12.01.2023 | Cód 326510880001
ANVISA Dispensado.


 Conformité Européenne.

 Dispositivo médico (Europa).

 Representante autorizado na comunidade europeia.

 Food and Drug Administration (USA).

 Não estéril.

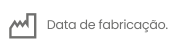

Silicone Mat for Case

USE INSTRUCTIONS

The Silicone Blanket is customized for each Indusbello case model. It has a pin-shaped surface to facilitate the accommodation of material in sterilization cases.

COMPOSITION: Non-toxic silicone.

INDICATIONS: Accommodate instruments in Indusbello sterilization cases in order to facilitate the autoclave sterilization process, preventing the materials from moving during the process.

INSTRUCTIONS FOR USE: The blanket model must be compatible with the sterilization kit. Place the silicone mat inside the case, keeping it flat. Arrange the instruments on the blanket in the best possible way, according to needs.

CLEANING: The removal of dirt (organic and inorganic matter) must be done using enzymatic detergent (minimum of three enzymes) with dilution according to the manufacturer's instructions. Cleaning can be done manually or mechanically in an ultrasonic tank. After washing the material, rinse with plenty of water to remove any dirt and/or

detergent residue. Carry out the visual inspection and if any remaining dirt is observed, repeat the cleaning process.

DISINFECTION: Manter o produto imerso em ácido peracético 0,2% por dez minutos. Seque o produto com um pano limpo e seco.

PACKAGING: Pack the product in an exclusive place, closed cabinets and protected from any contaminants.

WARNING: Make sure the blanket model is compatible with the case model.

CAUTION: Carry out the cleaning and disinfection process before use. Do not touch the product to the inner walls of the autoclave.

EXPIRY DATE: 05 years from the date of manufacture, in undamaged packaging. The shelf life of this product depends on the care taken during handling.

DISPOSAL: The disposal of this product must be carried out in accordance with current local environmental legislation.



Uso odontológico

Odontologic use
Uso odontológico



Serviço de atendimento ao profissional

Technical support
Servicio post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.co



Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kluge Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 00 - 12.01.2023 | Cód 326510880001
ANVISA Dispensado.



Conformité Européenne.



Medical device (Europe).



European Authorized Representative.



Food and Drug Administration (USA).



Non sterile.



Keep dry.



Keep it away from sunlight.



Manufacturer.



Date of manufacture.



Batch code.



Check Instructions for use.

Mantas de Silicona

INSTRUCCIONES DE USO

La Manta de Silicona se personaliza para cada modelo de estuche Indusbello. Tiene una superficie en forma de alfiler para facilitar el alojamiento del material en los estuches de esterilización.

COMPOSICIÓN: Silicona no tóxica.

INDICACIONES: Acomodar instrumentos en estuches de esterilización Indusbello para facilitar el proceso de esterilización en autoclave, evitando que los materiales se muevan durante el proceso.

INSTRUCCIONES DE USO: El modelo de manta debe ser compatible con el kit de esterilización. Coloque la alfombrilla de silicona dentro de la funda, manteniéndola plana. Disponer los instrumentos sobre la manta de la mejor manera posible, según las necesidades.

LIMPIEZA: La eliminación de la suciedad (materia orgánica e inorgánica) debe realizarse con detergente enzimático (mínimo de tres enzimas) con dilución según las instrucciones del fabricante. La limpieza se puede realizar de forma manual o mecánica en un tanque ultrasónico. Después de lavar el

material, aclarar con abundante agua para eliminar la suciedad y/o restos de detergente. Realice la inspección visual y si observa algún resto de suciedad, repita el proceso de limpieza.

DESINFECCIÓN: Mantener el producto sumergido en ácido peracético al 0,2% durante diez minutos. Seque el producto con un paño limpio y seco.

EMPAQUE: Empaque el producto en lugar exclusivo, en gabinetes cerrados y protegido de cualquier contaminante.

ATENCIÓN: Asegúrate de que el modelo de manta sea compatible con el modelo de funda.

PRECAUCIÓN: Realizar el proceso de limpieza y desinfección antes de su uso. No toque el producto con las paredes internas del autoclave.

FECHA DE CADUCIDAD: 05 años a partir de la fecha de fabricación, en embalaje intacto. La vida útil de este producto depende del cuidado que se tenga durante su manipulación.

ELIMINACIÓN: La eliminación de este producto debe realizarse de acuerdo con la legislación ambiental local vigente.



Uso odontológico

Odontologic use
Uso odontológico



Serviço de atendimento ao profissional

Technical support
Servicio post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.co



Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

EC REP

Obelis s.a
Bd. Général Wahis 531030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 00 - 12.01.2023 | Cód 326510880001
ANVISA Dispensado.



Conformité
Européenne.



Producto sanitario.
(Europa).



Representante
autorizado Europeo.



Food and Drug
Administration (USA).



No estéril.



Protéjalo de
la humedad.



Mantener alejado
de la luz solar.



Fabricante.



Fecha de fabricación.



Código de lote.



Consulte las
instrucciones de uso.