



Catálogo de produtos

Product catalog | Catálogo de productos

BEM-VINDO AO NOSSO CATÁLOGO DE PRODUTOS

SOBRE NÓS

Quem somos?

A Indusbello é uma marca brasileira que há mais de 30 anos desenvolve soluções inovadoras para o setor odontológico. Nosso propósito é facilitar o dia a dia dos profissionais da área, oferecendo produtos que unem qualidade, segurança e praticidade em cada detalhe.

Desde a criação dos primeiros itens, buscamos transformar o ambiente clínico em um espaço mais eficiente, organizado e confortável, valorizando o tempo, o desempenho e o bem-estar de quem cuida de sorrisos.

Com tecnologia, design e compromisso com a excelência, nossos produtos são projetados para garantir resultados precisos, otimizar procedimentos e proporcionar experiências mais seguras para profissionais e pacientes.

Este catálogo apresenta o que há de melhor em inovação odontológica, desenvolvida com o mesmo cuidado, confiança e paixão que movem a Indusbello desde o início de sua história.

“Inovamos para que cada sorriso seja tratado com precisão, conforto e confiança.”

Indusbello



SUMÁRIO

Explore as categorias e descubra soluções desenvolvidas para otimizar cada etapa do seu atendimento odontológico.

01 CIRURGIA E ESTERILIZAÇÃO

Surgery and sterilization / Cirugía y esterilización

- Estojo Semplicitá
- Lâmina para Bisturi
- Afastador Minnesota
- Kit Cas
- Estojo Evolutivo
- Indicador Biológico
- Sugadores descartáveis
- Estojos e Mantas

02 DENTÍSTICA E ESTÉTICA

Restorative Dentistry / Odontología Restauradora

- Espátulas, Sondas e Curetas
- Pasta Profilática
- Arcos para Isolamento
- Discos de Polimento
- Polidor Diamantado
- Borrachas para Profilaxia
- Escovas de Robinson
- Químicos para Dentística
- E-Mold
- Afastador Frontal para Estética
- Tiras
- Réguas Aureum

03 ENDODONTIA

Endodontics / Endodoncia

- Grampo invisível
- Aspirador endodôntico
- Cimento obturador
- Endofit régua milimetrada
- Pino de Fibras de Vidro
- Flexor de limas
- Tamborel e Refil

04 FOTOGRAFIA

Photography / Fotografía

- Contrastes Flexível
- Contraste Reto
- Calibrador de Cor
- Afastadores
- Cabos para Espelho Cristal
- Espelho Metálico Reto
- Espelhos de Cristal
- Espelho Metálico curvo
- Suporte para Flash Duplo

05 ODONTOPEDIATRIA

Pediatric Dentistry / Odontopediatria

- Abridores
- Afastadores
- Contraste Oclusal
- Dispositivo de Mordida
- Espelhos Cristal, Metálico e de mão
- Massageador de Gengiva
- Posicionadores Radiográficos
- Acessórios

06 RADIOLOGIA

Radiology / Radiología

- Endo Clarktec Digital
- Endo Clarktec Analógico
- Dispositivo ClarkTec
- Endo Cone Duo
- Cone Indicator Adulto e Infantil
- Bite Wings analógico e digital
- Cone Indicator analógico e digital
- Endo RH Plus analógico e digital
- Cone Indicator para Dentes Anteriores analógico e digital
- Dispositivo de mordida
- Fixador e Revelador radiográficos
- Fixadores para posicionadores digitais

07 USO GERAL

General use / Uso general

- Abritec PcD
- Flúor Gel
- Abritec - Abridores de boca
- Asper Óleo Lubrificante
- Adaptador para Sugador
- Marcadores de Instrumentos
- Afastadores Expandex e Lip Expand
- Bandejas autoclaváveis
- Estojos para Aparelhos
- Prendedor de Babador
- Cabos para Espelho Clínico
- Espelho Clínico Metálico
- Espelho Clínico n. 5
- Moldeiras para implantes
- Potes Dappen
- Case para Facetas
- Protetor Ocular
- Suporte para Alicates
- Seringa Carpule descartável
- Espátulas Plásticas




Cirurgia e Esterilização

Mais do que processos. Segurança em cada etapa.
Soluções desenvolvidas para apoiar procedimentos cirúrgicos e rotinas de esterilização com controle, organização e confiabilidade.

CONTROLE, ORGANIZAÇÃO E BIOSSEGURANÇA

Na cirurgia e na esterilização, cada detalhe importa. Por isso, desenvolvemos soluções que facilitam o fluxo clínico, auxiliam na organização dos instrumentos e contribuem para o cumprimento dos protocolos de biossegurança.

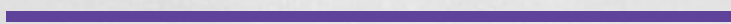

Estojo Semplicità

Case Semplicità / Semplicità Estuche



Design compacto e leve: Otimiza espaço em bandejas e autoclaves.



Cores disponíveis: preto, verde, rosa e azul




Versatilidade: 4 perfis de diâmetro (0,5 mm a 1 cm) para acomodar diferentes instrumentais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Polipropileno homopolímero.

Indicação: Organização e armazenamento de instrumentais odontológicos durante a esterilização e procedimentos clínicos.

Medidas: Pequeno: 190 x 95 x 34mm | Grande: 205 x 150 x 34mm.

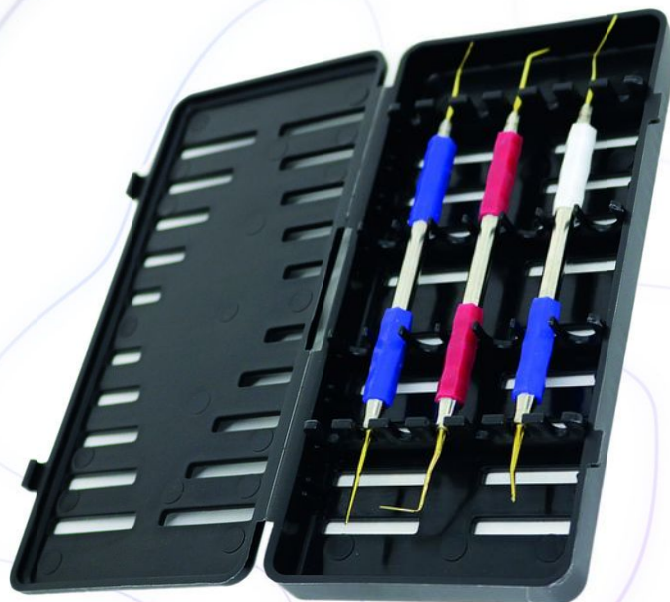


Autoclave
135°C / 275°F



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Os Estojos Autoclaváveis Indusbello permitem acomodação para esterilização e transporte de materiais.

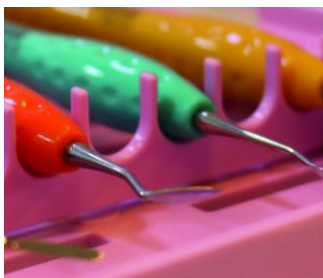

LANÇAMENTO



Lâmina para Bisturi

Scalpel Blades / Hojas de Bisturí



Afiada e precisa: Cortes precisos e maior controle do campo cirúrgico.



Esterilizada e pronta para uso: Uso único, com máxima segurança.



Encaixe seguro: Compatível com cabos nº 3, Garantindo firmeza e estabilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Aço carbono e aço inoxidável.

Indicação: Corte de tecidos em procedimentos odontológicos.

Uso: Produto de uso único e estéril; não requer limpeza prévia; descartar após o uso conforme normas de biossegurança.



Para mais detalhes, escaneie o QR Code e consulte a IFU.



Fabricadas com modelos em Aço carbono e Aço inoxidável, garantem durabilidade e eficiência. Garanta qualidade, segurança e precisão em seus procedimentos cirúrgicos odontológicos com as lâminas para Bisturi Indusbello.

As lâminas cirúrgicas estéreis de aço inoxidável são embaladas individualmente em papel alumínio com papel inibidor de corrosão volátil (VCI).

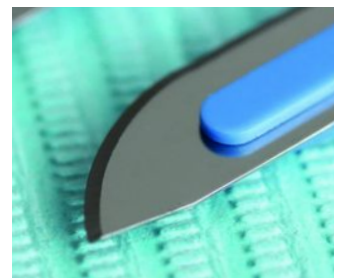




TABELA DE COMPATIBILIDADE LÂMINA X CABO

Aço Carbono

Modelo de lâmina	Cabo compatível
PCS 9	CABO 3
PCS 10	CABO 3
PCS 10A	CABO 3
PCS 11	CABO 3
PCS 12	CABO 3
PCS 12D	CABO 3
PCS 13	CABO 3
PCS 14	CABO 3
PCS 15	CABO 3
PCS 15C	CABO 3
PCS 16	CABO 3
PCS 17	CABO 3
PCS 18	CABO 4
PCS 19	CABO 4
PCS 20	CABO 4
PCS 21	CABO 4
PCS 22	CABO 4
PCS 23	CABO 4
PCS 24	CABO 4
PCS 25	CABO 4
PCS 36	CABO 4
PCS 40	CABO 4
PCS 60	CABO 8

Aço Inoxidável

Modelo de lâmina	Cabo compatível
PSS 9	CABO 3
PSS 10	CABO 3
PSS 10A	CABO 3
PSS 11	CABO 3
PSS 12	CABO 3
PSS 12D	CABO 3
PSS 13	CABO 3
PSS 14	CABO 3
PSS 15	CABO 3
PSS 15C	CABO 3
PSS 16	CABO 3
PSS 17	CABO 3
PSS 18	CABO 4
PSS 19	CABO 4
PSS 20	CABO 4
PSS 21	CABO 4
PSS 22	CABO 4
PSS 23	CABO 4
PSS 24	CABO 4
PSS 25	CABO 4
PSS 36	CABO 4
PSS 40	CABO 4
PSS 60	CABO 8

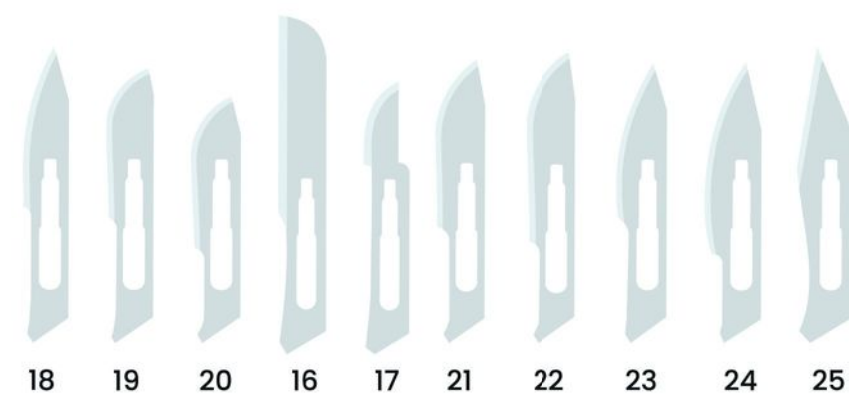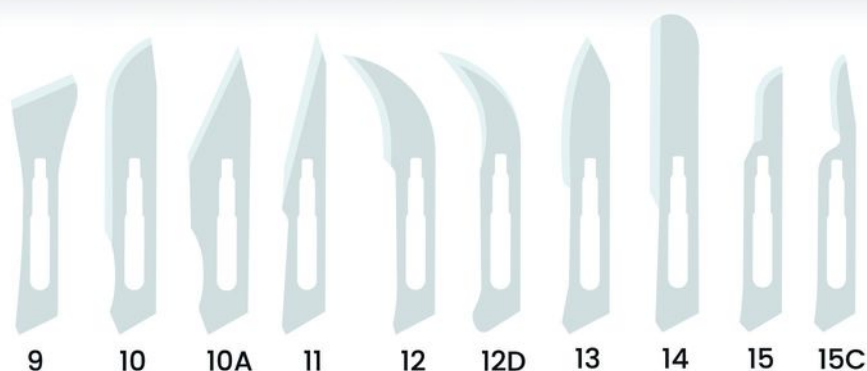

Afastador Minnesota

Minnesota Retractor



Design anatômico:
Bordas arredondadas para conforto e proteção.



Afastamento preciso:
Ideal para melhorar a visualização do campo operatório.



Alta durabilidade: Aço inox autoclavável e de fácil esterilização.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Aço inoxidável.

Indicação: Afastamento de tecidos moles (lábios e bochechas) durante procedimentos odontológicos.

Uso: Utilizar conforme protocolo clínico.






Autoclave
135°C / 275°F

Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Confeccionado em aço inox, produto possui duas extremidades e formato anatômico com bordas arredondadas que proporcionam conforto ao paciente.

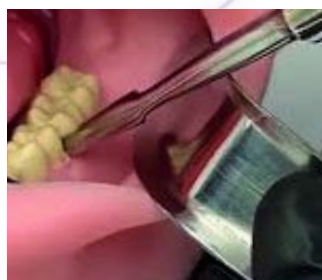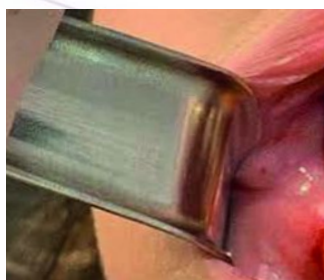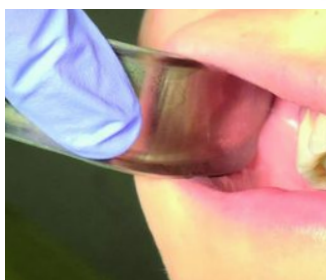

Kit CAS



Kit completo:
Sistema para realização de enxerto ósseo.



Elevação segura:
Facilita a elevação da membrana sinusal com segurança.



Sistema hidráulico:
Elevação precisa com mais controle e facilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Tampa: Polifenilsulfona; Base: Polifenilsulfona; Fundo: Polissulfona; Pinos: Inox; Suporte: Silicone; Perfil: Silicone atóxico..

Indicação: O KIT CAS é indicado para cirurgia de levantamento da membrana do seio maxilar.

Uso: O conjunto possui um sistema de elevação hidráulica que levanta a membrana com facilidade e segurança, além de um sistema de transporte de ossos para transferência e enchimento de materiais de enxerto ósseo.



Autoclave
135°C / 275°F




Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.




Veja o caso
clínico em vídeo

Técnica minimamente invasiva para elevação da membrana do seio maxilar, sem acesso lateral, para colocação imediata de implantes dentários em maxila atrófica.

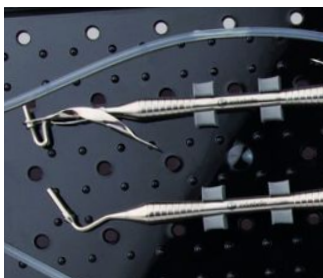

O Kit acompanha as peças:

- **Twist Drill - $\varnothing 2.0\text{mm}$:** Broca indicada para a perfuração inicial.
- **Fixture - $\varnothing 2.8$ e $\varnothing 3.3\text{mm}$:** Após a perfuração inicial, é a broca indicada para perfurar o osso e acessar a membrana do paciente.
- **Spare:** Guia para observar paralelismo.
- **Stopper:** Bloqueia o contato excessivo da broca com a membrana sinusal, disponibilizado nas graduações de 2 a 12mm.
- **Membrane Lifter:** Auxilia na elevação da membrana sinusal.
- **Bone Spreader - $\varnothing 2.0$ e $\varnothing 3.0\text{mm}$:** Instrumento utilizado para distribuir o material ósseo do paciente.
- **Referenciador de Profundidade:** Instrumento que, ao contato com a membrana sinusal, permite tocá-la sem risco de perfuração.
- **Bone Carrier:** Utilizado para transportar o material e introduzi-lo na cavidade.
- **Bone Condenser:** Instrumento usado para a compactação do material de enxerto ósseo.

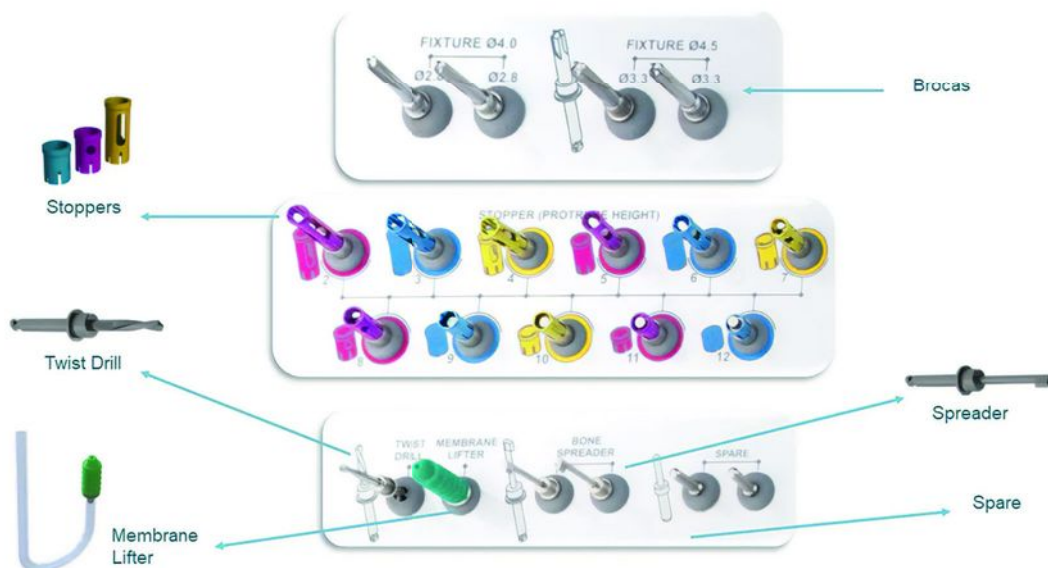

Estojo Evoluto

Case Evoluto / Evoluto Estuche



Design compacto e leve: Facilita a organização de materiais. Otimiza espaço em autoclaves.



Cores disponíveis: azul, azul escuro, vermelho, verde, rosa, amarelo, bege, fumê



Personalização: Montagem do kit de acordo com a necessidade do procedimento

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição: Termoplástico rígido.

Indicação: Organização e suporte de instrumentais odontológicos durante procedimentos clínicos.

Uso: Acomodar os instrumentais conforme a necessidade do atendimento ou transporte.

Características: Design compacto para melhor organização. • Trava segura para fechamento.

• Acabamento resistente. • Permite transporte seguro dos instrumentais.

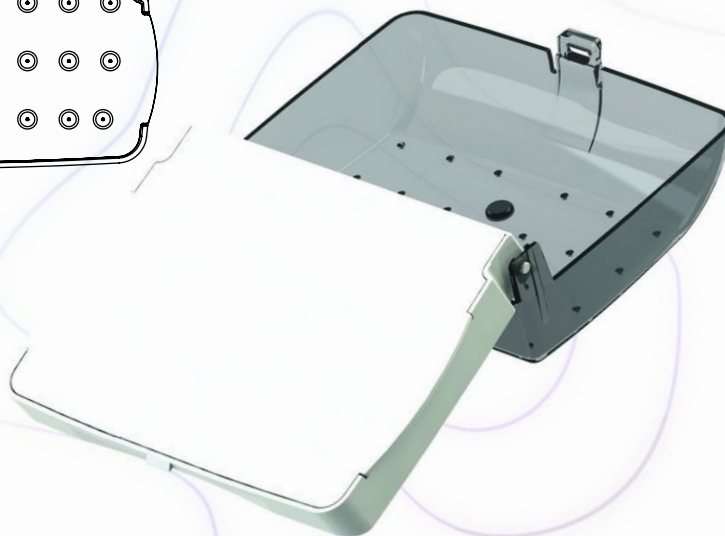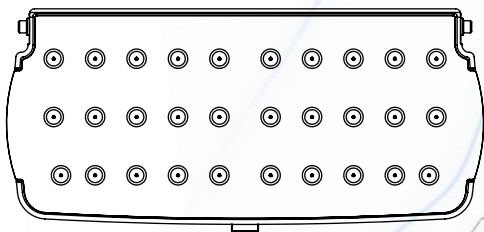

Autoclave
135°C / 275°F



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Estojo compacto e versátil desenvolvido para suporte e organização de instrumentais odontológicos, com design exclusivo que facilita o transporte e o acondicionamento durante os procedimentos clínicos.



LANÇAMENTO



Sentinella – Indicador Biológico

Biological Indicator



Monitoramento Eficaz: Verifica a eficiência do processo de esterilização.



Segurança Comprovada: Detecta falhas e garante esterilização confiável.



Uso Prático: Fácil leitura e aplicação em rotinas de esterilização.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Indicador biológico por pH (vapor).

Indicação: Monitoramento da eficiência da esterilização a vapor, garantindo maior segurança dos materiais processados.

Uso: Utilizar conforme protocolo de controle biológico de esterilização.

Apresentação: Disponível em embalagens com 10 ou 50 unidades.




Autoclave
135°C / 275°F

Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Indicador biológico de leitura rápida desenvolvido para monitorar a eficácia do processo de esterilização, oferecendo maior segurança para os materiais esterilizados com resultado em apenas 8 horas.

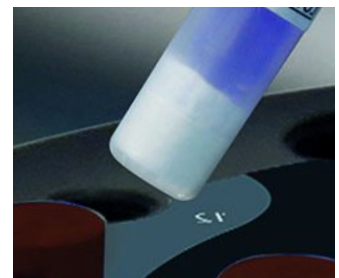

Sugador Cirúrgico Descartável Estéril

Surgical Aspirator Tips / Aspirador Quirúrgico

Sugador indicado para aspiração de fluidos durante procedimentos cirúrgicos, proporcionando higiene, praticidade e segurança clínica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: PVC atóxico (livre de ftalatos)
Ponteiras: Polietileno e pigmentos atóxicos.

Indicação: Aspiração de fluidos em procedimentos cirúrgicos odontológicos, inclusive em áreas de difícil acesso.

Características: Acompanha duas ponteiras (2mm e 3mm) para atender as diversas situações clínicas

Apresentação: Embalagens com 10, 20, 40 ou 50 unidades.



Aspiração eficiente: permite sucção precisa mesmo nos acessos mais difíceis durante procedimentos cirúrgicos.



Uso seguro e estéril: produto descartável, indicado para uso cirúrgico, reduzindo riscos de contaminação cruzada.



Versatilidade clínica: acompanha dois diâmetros de ponteiras, atendendo a diferentes procedimentos cirúrgicos.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Descartável
Disposable
Desechable

Sugador Cirúrgico com Coletor de Ossos Descartável Estéril

*Bone Collector Surgical Aspirator Tips
Aspirador Quirúrgico con Colector de Huesos*

Sugador indicado para aspiração cirúrgica com coleta de fragmentos ósseos, oferecendo praticidade, higiene e segurança durante o procedimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: PVC atóxico (não contém Ftalatos), polietileno, nylon e pigmento.

Indicação: Aspiração de fluidos em procedimentos cirúrgicos odontológicos, inclusive em áreas de difícil acesso.

Uso: Produto estéril e descartável, de uso único.

Características: Acompanha duas ponteiras (2mm e 3mm) para atender as diversas situações clínicas



Controle: auxilia na separação do material aspirado, favorecendo o controle clínico durante o procedimento.



Coleta óssea segura: peneira óssea com malha extremamente fina, que retém partículas minúsculas de ossos com eficiência, esterilização.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Descartável
Disposable
Desechable



Estojo Autoclaváveis

Mais do que dispositivos de transporte: soluções para esterilização, organização e segurança.

Leves e fáceis de transportar, com tampa transparente que permite ver o conteúdo interno e trava de segurança exclusiva.

**TRANSFORME A
ESTERILIZAÇÃO
EM UM
PROCEDIMENTO
MAIS ÁGIL E
SEGURO.**

Os Estojo Indusbelo são ideais para acomodar instrumentos, brocas, limas e outros materiais que precisam de esterilização, armazenamento ou transporte.

Fabricados em resina termoplástica com acessórios em silicone, combinam leveza, durabilidade e praticidade.

Escolha o modelo que melhor atende seu perfil clínico — e conte com a qualidade Indusbelo para elevar o padrão do seu atendimento.





Autoclave
135°C / 275°F

Tolerância geral +/- 3mm.

Estoque 2801

Case 2801 / Estuche 2801

Estoque para esterilização em autoclave.

Dimensões internas:

174mm x 79mm x 18mm.

Para melhor acomodação dos instrumentais, utilize mantas de silicone Indusbello nos tamanhos:

(172 x 77 x 16 mm).



Autoclave
135°C / 275°F

Tolerância geral +/- 3mm.

Estoque 2802

Case 2802 / Estuche 2802

Estoque para esterilização em autoclave.

Dimensões internas:

179mm x 79mm x 28mm.

Para melhor acomodação dos instrumentais, utilize mantas de silicone Indusbello nos tamanhos:

(172 x 77 x 14 mm).



Autoclave
135°C / 275°F

Tolerância geral +/- 3mm.

Estoque 2803

Case 2803 / Estuche 2803

Estoque para esterilização em autoclave.

Dimensões internas:

241mm x 149mm x 17mm.

Para melhor acomodação dos instrumentais, utilize mantas de silicone Indusbello nos tamanhos:

(246 x 148 x 13 mm).



Autoclave
135°C / 275°F

Tolerância geral +/- 3mm.

Estoque 2804

Case 2804 / Estuche 2804

Estoque para esterilização em autoclave.

Dimensões internas:

185mm x 91mm x 47mm.

Para melhor acomodação dos instrumentais, utilize mantas de silicone Indusbello nos tamanhos: (188 x 93 x 16 mm).



Autoclave
135°C / 275°F

Tolerância geral +/- 3mm.

Estoque 2806

Case 2806 / Estuche 2806

Estoque para esterilização em autoclave.

Dimensões internas:

237mm x 145mm x 54mm.

Para melhor acomodação dos instrumentais, utilize mantas de silicone Indusbello nos tamanhos: (246 x 148 x 13 mm).



Autoclave
135°C / 275°F

Tolerância geral +/- 3mm.

Estoque 2808

Case 2808 / Estuche 2808

Estoque para esterilização em autoclave.

Dimensões internas:

174mm x 79mm x 38mm.

Para melhor acomodação dos instrumentais, utilize mantas de silicone Indusbello nos tamanhos: (172 x 77 x 14 mm).



Autoclave
135°C / 275°F

Tolerância geral +/- 3mm.

Estoque 2810

Case 2810 / Estuche 2810


Estoque para esterilização em autoclave.

Dimensões internas:

185mm x 91mm x 28mm.

Para melhor acomodação dos instrumentais, utilize mantas de silicone Indusbello nos tamanhos:

(188 x 93 x 16 mm).

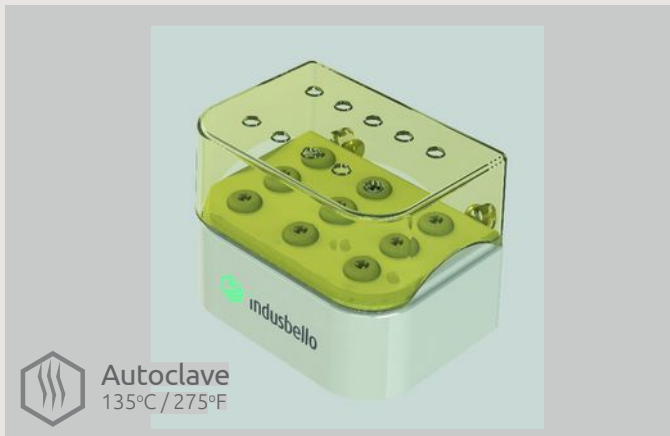

Autoclave
135°C / 275°F

Tolerância geral +/- 3mm.

Estoque 2807 Broqueiro

Case 2807 - Drills / Estuche 2807 - Fresas


Estoque para esterilização em autoclave.

Dimensões internas:

73mm x 50mm x 52mm.

Baixa rotação ou Alta rotação:

- 9, 12 ou 15 brocas.

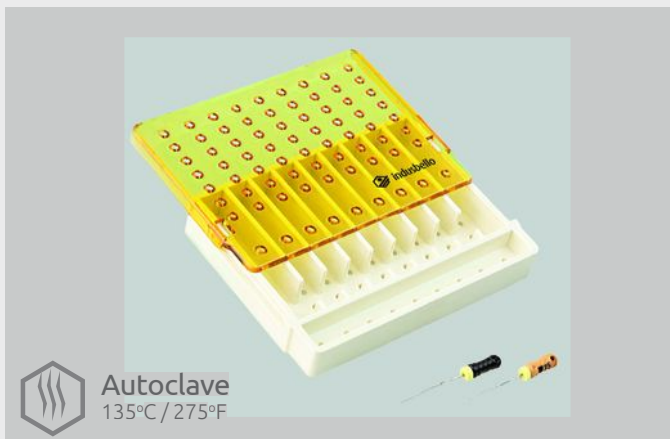

Autoclave
135°C / 275°F

Tolerância geral +/- 3mm.

Estoque 2818 - Porta Limas

2818 - Endofiles case / 2818 - Portallimas

Estoque para esterilização em autoclave.

Dimensões internas:

69,2mm x 54,5mm x 9,4mm.

Capacidade: até 10 limas

*(Limas não inclusas)

Manta de Silicone

Silicone Mats / Mantas de Silicona



Máxima Proteção:
Evita contato entre instrumentais durante a esterilização.



Design Inteligente:
Pinos de silicone flexíveis que fixam com segurança.



Alta Durabilidade: Silicone atóxico, autoclavável até 135 °C.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Silicone atóxico.

Indicação: Organização e estabilização de instrumentais durante a esterilização.

Uso: Coloque a manta de silicone dentro do estojo, mantendo-a plana. Acomode os instrumentais sobre a manta de acordo com as necessidades.

Cores: ● ●

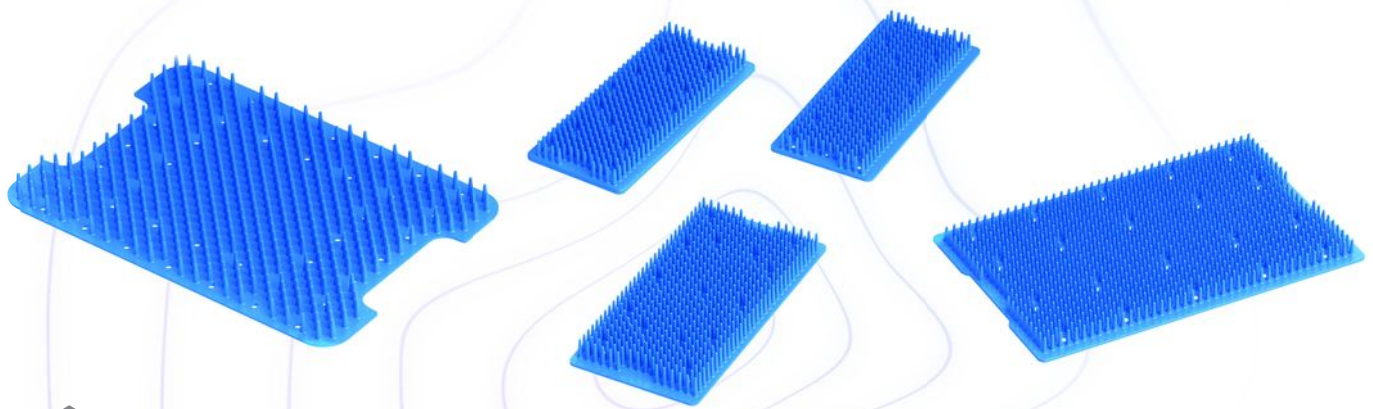




Autoclave
135°C / 275°F

Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Manta de silicone para proteção e acomodação de instrumentais em estojos de esterilização.

Modelo de Manta	Aplicação em Estojos
2801 172,5 x 77,5 x 16mm	2801, 2802 e 2808
2802 172,5 x 77,5 x 14mm	2801, 2802 e 2808
2803 246 x 148 x 13mm	2803
2804 188 x 93 x 16mm	2804 e 2810

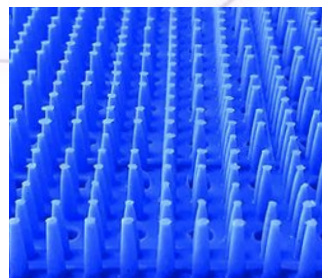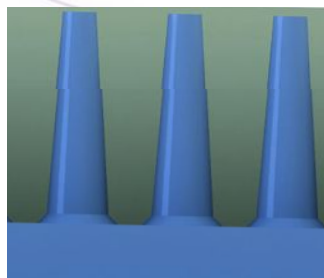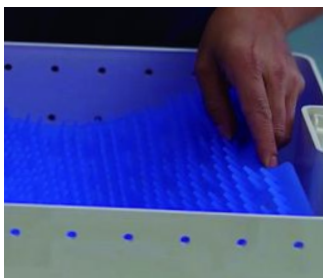



Dentística e Estética

Mais do que procedimentos. Harmonia, precisão e resultado.

Soluções desenvolvidas para auxiliar tratamentos restauradores e estéticos com controle, funcionalidade e excelência nos detalhes.

**DETALHES QUE
FAZEM A
DIFERENÇA NO
RESULTADO
FINAL**

Na dentística e na estética, cada escolha impacta o resultado. Por isso, desenvolvemos soluções que auxiliam no controle do procedimento, na reprodução anatômica e na fidelidade estética, valorizando o trabalho do profissional.

LANÇAMENTO



Espátula Artem

Artem Composite Placement / Espátula Artem



Precisão restauradora: uso em restaurações anteriores e posteriores.



Delicadez Operacional: conforto de empunhadura e controle durante o uso.



Design anatômico: Mais controle e eficiência na escultura.



Alta Durabilidade: aço inox autoclavável e resistente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Pontas metálicas com cabos em silicone atóxico, coloridos e ergonômicos.

Indicação: Utilizada para auxiliar na reconstrução da coroa dental devolvendo sua forma e função.

Modelos: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.






Autoclave
135°C / 275°F

Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Espátula desenvolvida para facilitar a manipulação e inserção de resinas compostas, oferecendo maior controle durante o procedimento restaurador graças ao novo design das pontas e aos cabos ergonômicos em silicone.



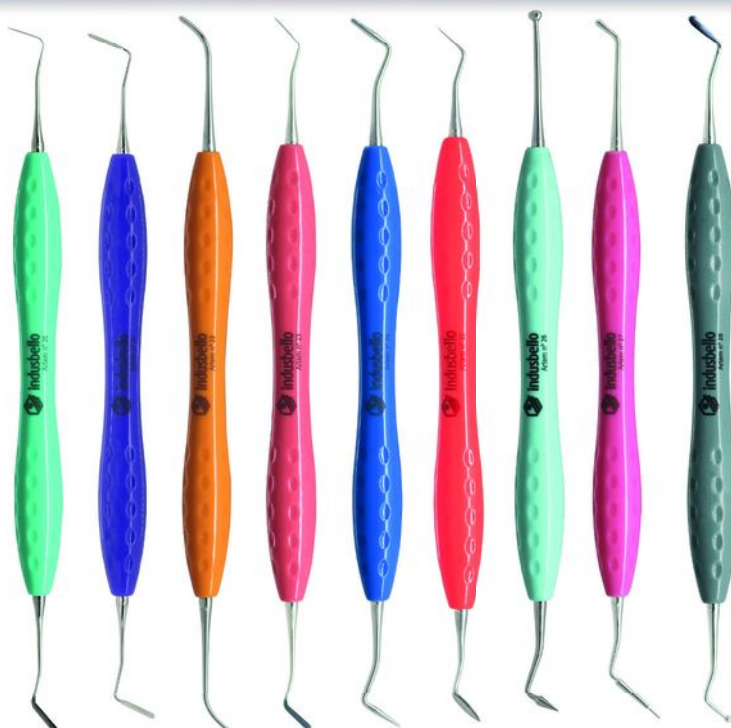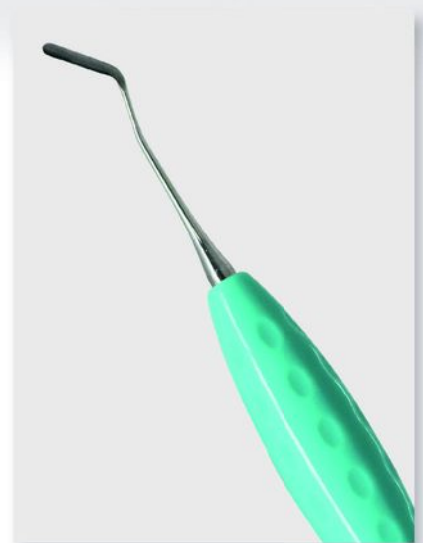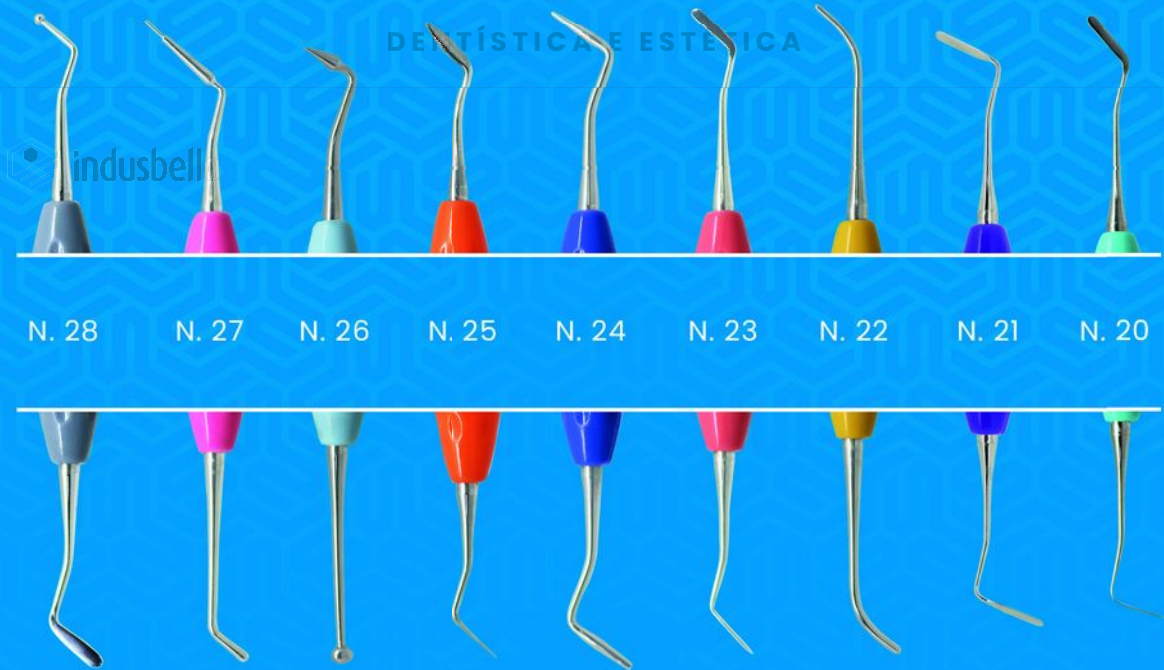

Espátula Carbonio

Carbonio Composite Placement



Desempenho restaurador: pontas que facilitam a manipulação sem aderência da resina.



Revestimento DLC: Mais resistência e menor aderência.



Leveza superior: Até 25% mais leve, reduz a fadiga no uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Alumínio, aço inox e revestimento de carbono(DLC).

Indicação: Manipulação e inserção de resinas compostas em procedimentos restauradores odontológicos.

Modelos: Silicato; 01; 02; 03; 04; 05 e 06.




Autoclave
135°C / 275°F

Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Desenvolvidas para otimizar a escultura restauradora, com menos adesão de material e conforto no uso contínuo.

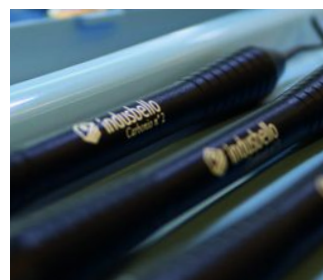



SILICATO N. 01 N. 02 N. 03 N. 04 N. 05 N. 06



LANÇAMENTO



Espátula Carbonio Flexível

Carbonio Flexible Composite Placement Espátula Carbonio Flexible



Desempenho restaurador:
Precisão e adaptação para modelagem em restaurações e trabalhos protéticos.



Flexibilidade controlada:
Pontas que se adaptam à anatomia dental.



Design Ergonômico: Maior conforto e controle durante o uso prolongado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Alumínio, aço inox e revestimento de carbono(DLC).

Indicação: Manipulação e inserção de resinas compostas em procedimentos restauradores odontológicos.

Modelos: 01; 02; 03; 04 e 05.





Autoclave
135°C / 275°F

Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Flexibilidade controlada para melhor modelagem em procedimentos restauradores e protéticos, com empunhadura confortável e maior controle.

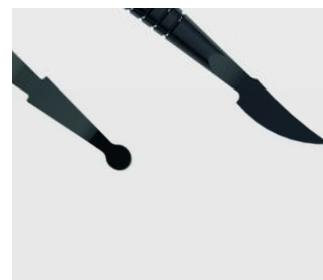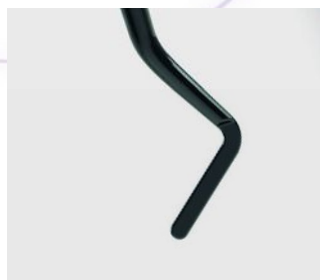




N. 01

N. 02

N. 03

N. 04

N. 05

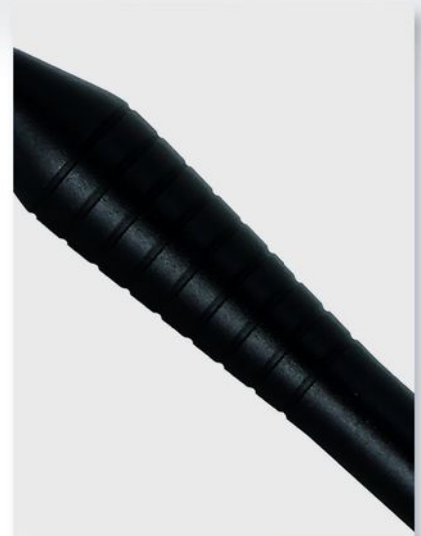

LANÇAMENTO



Sonda Periodontais

Periodontal Probes / Sondas Periodontales



Precisão de leitura: Marcações nítidas para medições confiáveis.



Conforto ergonômico: Cabos em silicone atóxico e confortável.



Design funcional: Mais controle e eficiência na escultura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Aço inoxidável com cabos em silicone atóxico, coloridos e ergonômicos.

Indicação: Avaliação periodontal clínica, incluindo medição de bolsas periodontais, sulco gengival e análise de envolvimento de furca em dentes multirradiculares.


Modelos: Sonda C do Norte e Sonda Nabers

Autoclave
135°C / 275°F

Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.




Instrumentais desenvolvidas para avaliação clínica periodontal, permitindo a medição da profundidade do sulco gengival, bolsas periodontais e análise da região de furca.

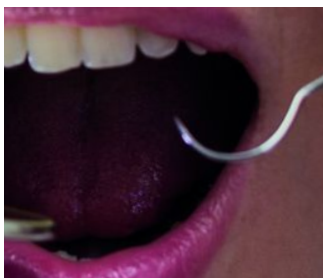



SONDA
CDO
NORTE

SONDA
NABERS

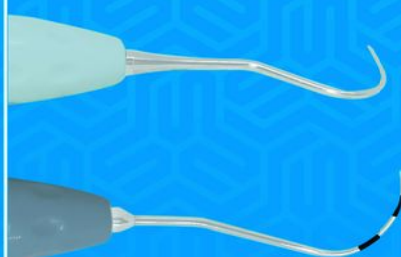

LANÇAMENTO



Curetas Periodontais

Gracey Curettes / Curetas Gracey



Corte preciso: Lâmina afiada para remoção eficiente do cálculo.



Design específico: Angulação ideal para cada região.



Conforto clínico: Cabo ergonômico para maior controle.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Aço inoxidável com cabos em silicone atóxico, coloridos e ergonômicos.

Indicação: Raspagem e alisamento radicular.

Modelos: Gracey 5-6, 7-8, 11-12, 13-14, Mini Gracey 5-6, 7-8, 11-12 e 13-14.




Autoclave
135°C / 275°F



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Instrumentais periodontais área-específicos desenvolvidos para raspagem e alisamento radicular supra e subgingival, permitindo adaptação precisa às diferentes superfícies dentárias e maior controle clínico durante o tratamento periodontal.

Numeração da Cureta	Principais Indicações	Região/Superfície Principal
Gracey 5-6	Dentes anteriores e pré-molares	Faces vestibular, lingual e proximal
Gracey 7-8	Faces vestibular e lingual de dentes posteriores	Molares e pré-molares (vestibular/lingual)
Gracey 9-10	Faces vestibular e lingual de dentes posteriores	Molares e pré-molares (vestibular/lingual)
Gracey 11-12	Face mesial de dentes posteriores	Molares e pré-molares (superfície mesial)
Gracey 13-14	Face distal de dentes posteriores	Molares e pré-molares (superfície distal)

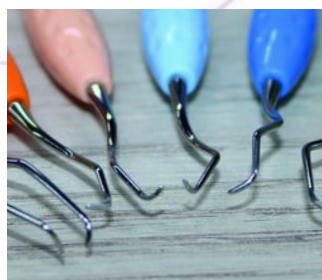

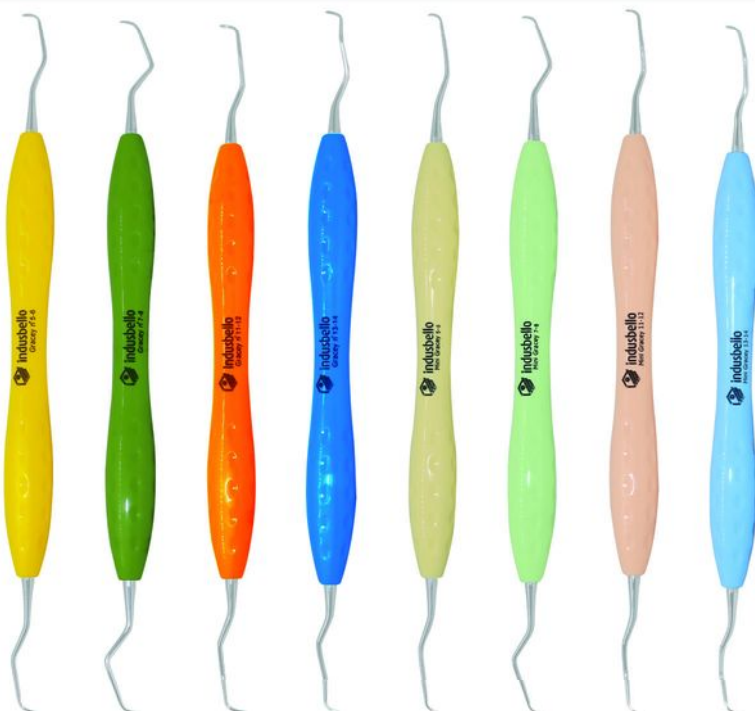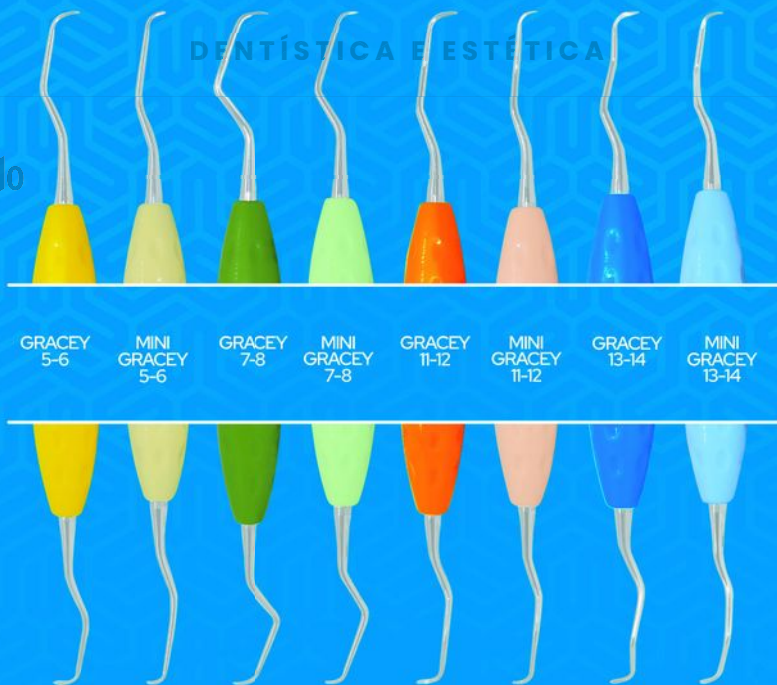

Espátulas Flexíveis

Flexible Composite Placement / Espátula Flexible



Flexibilidade funcional:
Melhor adaptação da resina.



Design especializado:
Mais controle e precisão na escultura.



Superfície antiaderente:
Acabamento e eficiente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Pontas metálicas flexíveis e cabo em aço inoxidável.

Indicação: Manipulação, inserção e modelagem de resinas compostas em procedimentos restauradores e protéticos.

Modelos: N° 01; N° 02; N° 03; N° 04 e N° 05.





Autoclave
135°C / 275°F

Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Espátulas desenvolvidas para facilitar a manipulação e inserção de resinas compostas, oferecendo maior adaptação às superfícies dentárias graças às pontas flexíveis, proporcionando controle, precisão e acabamento mais uniforme nas restaurações.

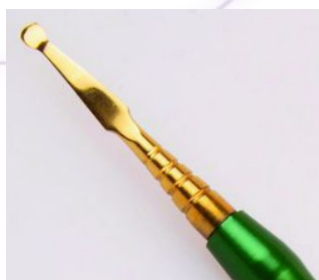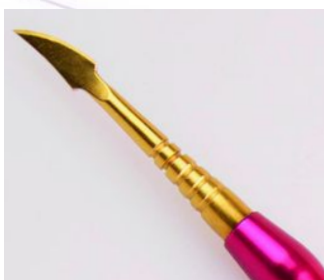



Espátulas de Titânio

Titanium-coated Composite Placement Espátula Titanium



Alta resistência: Titânio durável e leve.



Superfície antiaderente: Melhor manipulação da resina.



Precisão clínica: Mais controle na escultura restauradora.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Alumínio anodizado e aço inox. Cerdas sintéticas no pincel da espátula nº5.

Indicação: Manipulação e inserção de resinas compostas em procedimentos restauradores odontológicos.

Modelos: Interproximal, Nº 01; Nº 02; Nº 03; Nº 04, Nº 05, Nº 06, Nº 11, Nº 12, Nº 15 e Silicato.




Autoclave
135°C / 275°F


Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Espátulas desenvolvidas para manipulação e inserção de resinas compostas, oferecendo maior controle durante o procedimento restaurador graças às pontas em titânio, que auxiliam na redução da aderência do material.

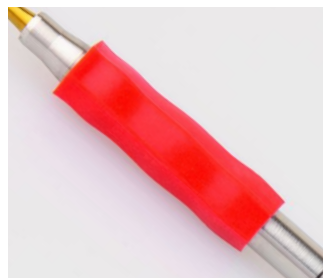

Interproximal N. 01 N. 02 N. 03 N. 04 N. 05 N. 06 N. 11 N. 12 N. 15 Silicato

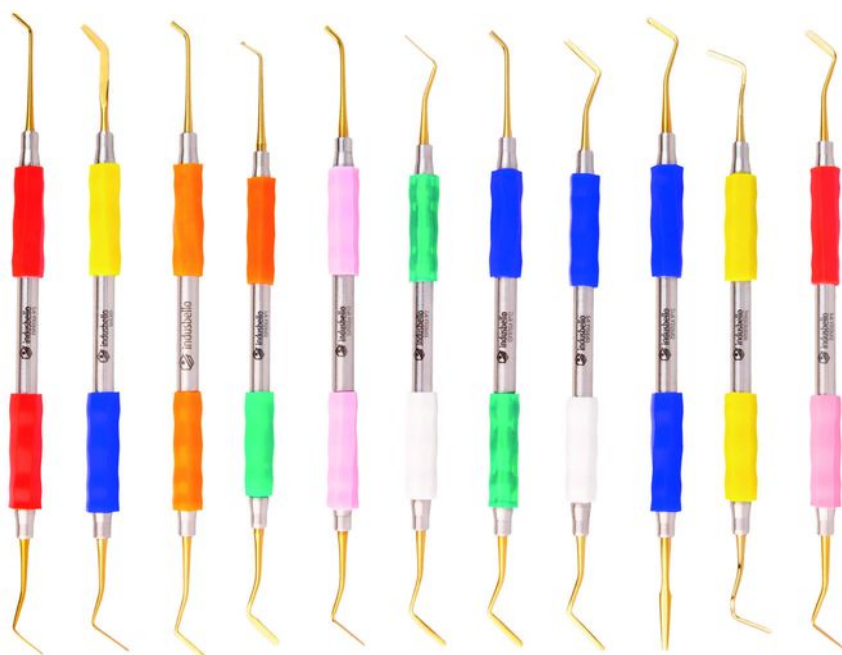

LANÇAMENTO



Pasta Profilática

Prophylactic Paste / Pasta Profiláctica



Limpeza eficaz: Remoção suave de biofilme e pigmentações



Aplicação Facilitada: Espalhamento uniforme durante o procedimento



Proteção do Esmalte: Profilaxia segura e confortável para o paciente

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Pasta profilática com agentes abrasivos suaves.

Indicação: Indicado para a remineralização do esmalte dental e prevenção da cárie dentária, ao tornar os dentes mais resistentes à ação dos ácidos.

Uso: Utilizar com escova de Robinson e taça de borracha, conforme protocolo clínico.


Sabores disponíveis: Morango e Menta.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Pasta indicada para profilaxia odontológica, auxiliando na remoção de placa e manchas superficiais, proporcionando limpeza e polimento dos dentes.

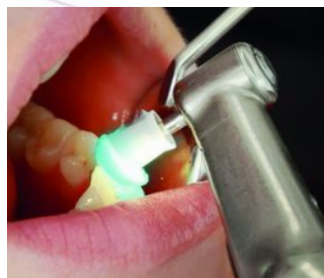

Arcos para Isolamento

Dam Frames / Arcos



Isolamento absoluto:
Fixação eficiente do
lençol de borracha.



Estrutura articulada:
Melhor posicionamento
e estabilidade.



Material esterilizável:
Compatível com os
protocolos clínicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material esterilizável.

Indicação: Isolamento absoluto dos dentes em procedimentos odontológicos, por meio da fixação do dique de borracha.

Modelos: Arco Young - Arco Ostby - Arco Dobrável

Arco Young

Arco Ostby

Arco Dobrável




Autoclave
135°C / 275°F



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.

Arcos articulados desenvolvidos para fixação do lençol de borracha, permitindo o isolamento absoluto dos dentes durante procedimentos clínicos, proporcionando campo operatório limpo, seco e com melhor visibilidade.

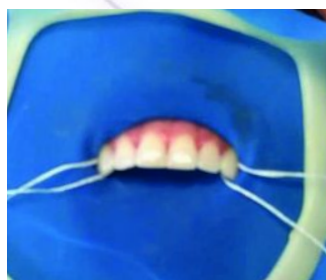

Dischi – Discos de Polimento

Polishing Disks / Discos de Pulido

Discos abrasivos indicados para acabamento e polimento de restaurações, proporcionando superfície lisa e melhor estética.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Poliéster com abrasivos de alumina

Indicação: Acabamento e polimento em restaurações de resina composta.

Uso: Utilizar em baixa rotação conforme protocolo clínico, com movimentos controlados em toda a superfície a ser polida.

Características: Sistema com quatro granulações – grossa, média, fina e extrafina – que permite polimento progressivo; disponível em versões com centro de silicone ou centro metálico; acompanha mandril.

Apresentação: Kit com 40 unidades, divididas em 4 granulações.

Dimensões: Discos disponíveis em dois diâmetros: 12 mm e 14 mm.

 **Versatilidade de aplicação:** disponíveis com centro de silicone ou centro metálico, adaptando-se a diferentes preferências clínicas.

 **Polimento em etapas:** discos de poliéster com abrasivo em quatro granulações, permitindo acabamento progressivo e controlado.

 **Granulações identificadas por cor:** grossa (roxo), média (azul), fina (verde) e extrafina (rosa), facilitando a sequência correta de uso.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



1 Produto de
uso único

Lucidare – Polidor Diamantado

Diamond impregnated polishing system / Sistema de pulido impregnado diamante

Polidor diamantado indicado para acabamento e brilho final de restaurações, proporcionando superfície lisa e alto desempenho estético.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Fabricado em aço inoxidável, borracha de poliuretano com diamante industrial incorporado.

Indicação: Acabamento e polimento de restaurações dentárias.

Uso: Utilizar em baixa rotação conforme protocolo clínico, com movimentos controlados em toda a superfície a ser polida.

Características:

- Sistema sequencial de granulações para acabamento progressivo.

Apresentação: Kits com discos de diferentes granulações.

Modelos/Granulações: Pré-Polimento, Polimento Final, Combos com sequência completa de granulações.

 **Tecnologia diamantada:** discos de silicone impregnados com pó de diamante, proporcionando alto poder de polimento e durabilidade.

 **Sistema completo de polimento:** contém 03 unidades para pré-polimento e 03 unidades para polimento, otimizando todas as etapas do acabamento.

 **Granulações funcionais:** disponível nas granulações média (rosa) para pré-polimento e fina (bege) para polimento final.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Autoclave
135°C / 275°F

Profilassi – Borrachas para Profilaxia e Polimento

Rubber for Prophylaxis | Goma para Profilaxis

Borrachas indicadas para profilaxia odontológica, auxiliando na limpeza e polimento das superfícies dentárias.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Borrachas de silicone em mandril.

Indicação: Profilaxia dental e polimento das superfícies dentárias.

Características: Disponível nos modelos taça e cone; Duas durezas (hard e soft); permitem polimento controlado e eficiente durante procedimentos profiláticos.

Modelos: Hard e Soft.



Profilaxia eficiente: indicadas para procedimento de limpeza e polimento.



Compatibilidade prática: modelo para uso em mandril, garantindo fácil encaixe e estabilidade durante o procedimento.



Duas opções de dureza: disponíveis nas versões soft e hard, permitindo melhor adaptação às diferentes necessidades clínicas.



Spazzo – Escovas de Robinson

Robinson brush | Robinson cepillo

Escova para profilaxia odontológica, indicada para remoção de resíduos e auxílio na limpeza clínica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Escovas de nylon em mandril.

Indicação: procedimento de profilaxia.

Uso: Mandril deve ser encaixado no contra-ângulo para uso em baixa rotação, em conjunto com pasta profilática, conforme protocolo clínico.

Características: Escovas em mandril disponíveis em três formatos (cônica, plana e taça) e duas durezas (hard e soft), permitindo adaptação a diferentes superfícies dentárias e controle durante o polimento.

Apresentação: Embalagem com 20 unidades.

Modelos: Cônica – Hard / Soft, Plana – Hard / Soft

Taça – Hard / Soft, Combinação: 10 Hard + 10 Soft



Limpeza eficiente: remove resíduos e placa com facilidade.



Cerdas macias: não agride esmalte e gengiva.



Uso clínico: ideal para profilaxia odontológica.



Adfix – Adesivo Ortodôntico

Orthodontic Adhesive / Adhesivo de Ortodoncia

Adesivo odontológico para fixação temporária de dispositivos ortodônticos, com aplicação prática e segura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Monômeros metacrilato, vidro alumínio borossilicato, fluoreto de sódio, caforoquinona e amina.

Indicação: Colagem de bráquetes metálicos, poliméricos e cerâmicos ao esmalte dental em tratamentos ortodônticos.

Uso: Instalação do bráquete ortodôntico.

Características: Proporciona adesão segura e eficaz entre os bráquetes e a superfície dentária, contribuindo para maior estabilidade durante o tratamento.

 **Adesão confiável:** fixação segura de bráquetes.

 **Ampla compatibilidade:** metálicos, poliméricos e cerâmicos.

 **Desempenho clínico:** aderência consistente ao esmalte.



Uni – Adesivo Odontológico

Dental Adhesive / Adhesivo Dental

Adesivo universal para procedimentos restauradores, indicado para promover união eficiente entre dente e material restaurador.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Monômero dimetacrilato, Iniciadores, Adesivo e Álcool etílico.

Indicação: Promover a adesão de materiais restauradores, como resinas compostas, à estrutura dentária ou a materiais restauradores prévios.

Uso: Utilizar conforme protocolo clínico de adesão restauradora.

Características: Adesivo de alto desempenho que proporciona ligação eficiente entre o dente e os materiais restauradores, contribuindo para maior estabilidade e longevidade das restaurações.

 **Alta performance adesiva:** desenvolvido para promover adesão forte e duradoura em procedimentos restauradores.

 **Confiabilidade no tratamento:** contribui para maior estabilidade e longevidade das restaurações.

 **Versatilidade clínica:** indicado para a união entre resinas compostas e a estrutura dentária.



Silano 5ml

Silane Union Agent / Silano

Agente de união indicado para promover adesão entre cerâmicas, porcelanas e materiais restauradores.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Álcool etílico e metacrilóxi-propil-trimetoxisilano.

Indicação: Agente de união para superfícies de porcelanas, cerômeros e pinos de fibras de vidro

Uso: Aplicar conforme protocolo clínico de cimentação e adesão restauradora.

Características: Composto utilizado como agente de união entre superfícies de materiais que possuem composições orgânicas e inorgânicas.



Agente de união eficaz: utilizado para promover a ligação entre superfícies de materiais com composições orgânicas e inorgânicas.



Indicação restauradora: indicado para procedimentos que exigem compatibilidade entre diferentes superfícies.



Melhora da adesão: favorece a união química entre o material restaurador e o substrato, contribuindo para melhor desempenho clínico.

LANÇAMENTO



Barreira Gingival

Gingival Barrier / Barrera Gingival

Resina fotopolimerizável para proteção da gengiva durante procedimentos clínicos e estéticos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: UDMA, HEMA, Canforoquinona, Amina terciária: 4-etil dimetilaminobenzoato, Silica Nanométrica e Pigmentos.

Indicação: Proteção do tecido gengival em procedimentos com risco de irritação da gengiva por contato com materiais clínicos.

Uso: Aplicar conforme protocolo clínico para isolamento gengival.

Características: Produto pronto para uso, desenvolvido para criar uma barreira protetora sobre a gengiva durante procedimentos odontológicos.



Isolamento eficaz: indicada para isolamento e proteção do tecido gengival durante procedimentos clínicos.



Proteção tecidual: auxilia na prevenção de irritações causadas pelo contato com produtos utilizados nos procedimentos odontológicos.



Fotopolimerizável: material de fácil aplicação e remoção.



Condicionador Ácido Fluorídrico (10%)

Hydrofluoric Acid Conditioner 10% / Acondicionador de Ácido Fluorídrico 10%

Condicionador indicado para preparo de superfícies cerâmicas, promovendo microrretenção e melhor adesão dos materiais restauradores.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Gel à base de ácido fluorídrico nas concentrações de 10%.

Indicação: Condicionamento ácido de porcelanas e peças protéticas para melhorar a adesão de sistemas cimentantes e restauradores.

Uso: Aplicar conforme protocolo clínico de condicionamento ácido em superfícies cerâmicas.

Características: Produto pronto para uso; desenvolvido para facilitar e aprimorar a ancoragem mecânica em restaurações indiretas.



Melhora da ancoragem mecânica: auxilia no preparo da superfície, favorecendo a retenção e a adesão dos materiais restauradores.



Condicionamento específico: indicado para o condicionamento ácido de porcelanas e peças protéticas.



Produto pronto para uso: apresentação que proporciona praticidade e agilidade na rotina clínica.



Condicionador Ácido Fosfórico 37%

37% Phosphoric acid conditioner / Acondicionador de ácido fosfórico 37%

Condicionador dental para preparo do esmalte e dentina em procedimentos adesivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Gel com ácido fosfórico a 37%.

Indicação: Condicionamento ácido do esmalte e da dentina em procedimentos restauradores.

Uso: Aplicar conforme protocolo clínico de condicionamento ácido.

Características: Gel pronto para uso, desenvolvido para promover preparo adequado da superfície dental antes da aplicação de sistemas adesivos e materiais restauradores.



Condicionamento eficaz: gel com ácido fosfórico a 37% indicado para o condicionamento ácido do esmalte e da dentina.



Aplicação controlada: formulação em gel que permite aplicação precisa e maior controle clínico.



Desempenho adesivo: promove preparo adequado da superfície dentária, favorecendo a adesão dos materiais restauradores.



E-mold – Placa para Moldeiras

Custom Fitted Tray Plates / Placa Para Férulas Dentales

Placa termomoldável indicada para confecção de moldeiras individuais, oferecendo adaptação precisa e praticidade na moldagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material termoplástico transparente.

Indicação: Confecção de moldeiras flexíveis para procedimentos odontológicos.

Uso: Utilizar conforme técnica de termomoldagem para produção de moldeiras personalizadas.

Características: Produzida em material transparente que não irrita a gengiva; permite a confecção de moldeiras flexíveis com boa adaptação às estruturas bucais.

Modelos:

- 01 mm – embalagem com 20 unidades
- 02 mm – embalagem com 10 unidades
- 03 mm – embalagem com 06 unidades



Conforto e segurança: produzida em material transparente que não irrita a gengiva, garantindo maior conforto ao paciente.



Flexibilidade funcional: indicada para a confecção de moldeiras flexíveis, adaptando-se com precisão às necessidades clínicas.



Visualização facilitada: material transparente que permite melhor controle durante a confecção da moldeira.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Afastador de Lábios Frontal para Estética

Vertical Lip Retractor / Retractor de Labios Frontal para Estética

Afastador indicado para exposição frontal da arcada, proporcionando melhor acesso e visibilidade durante procedimentos clínicos odontológicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Polímero termoplástico.

Indicação: Afastamento labial para exposição dos dentes em procedimentos clínicos odontológicos.

Uso: Posicionar conforme protocolo clínico para afastamento dos lábios frontais.

Características: Material flexível que promove retração labial uniforme, melhorando o acesso, a visualização e o controle do campo operatório durante o atendimento.



Afastamento eficiente: Exposição clara da arcada para execução dos procedimentos.



Encaixe seguro: Formato anatômico que mantém o posicionamento sem necessidade de reposicionamento constante.



Conforto ao paciente: Flexibilidade que reduz a pressão sobre os tecidos moles.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Esterilização Química
Chemical sterilization
Esterilización química

Tira de Poliéster Azul

Blue Polyester Strip / Tira de Poliéster Azul

Tira indicada para restaurações, auxiliando na contenção do material e na definição do contorno proximal, com melhor visualização durante o procedimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Poliéster azul.

Indicação: Isolamento do dente a ser restaurado em relação aos dentes adjacentes, auxiliando na contenção do material restaurador na cavidade.

Uso: Utilizar conforme técnica restauradora para separação proximal durante procedimentos clínicos.

Características: Tira flexível, resistente e descartável, desenvolvida para facilitar a adaptação do material restaurador e o controle proximal.

Dimensões: 0,05 × 10 × 120 mm.



Transparência ideal: facilita a visualização e adaptação da resina.



Acabamento preciso: superfície lisa para melhor contorno proximal.



Alta resistência: poliéster flexível.

LANÇAMENTO



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Tira de Poliéster

Polyester Strip / Tira de Poliéster

Tira transparente indicada para restaurações, auxiliando na contenção do material e na obtenção de melhor contorno proximal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Poliéster.

Indicação: Isolamento do dente a ser restaurado em relação aos dentes adjacentes, auxiliando na contenção do material restaurador na cavidade.

Uso: Utilizar conforme técnica restauradora para separação proximal durante procedimentos clínicos.

Características: Tira flexível, transparente e descartável, desenvolvida para facilitar a adaptação do material restaurador e o controle proximal.

Dimensões: 0,05 × 10 × 120 mm.



Isolamento restaurador: indicada para isolar o dente a ser restaurado dos dentes adjacentes durante procedimentos restauradores.



Controle do material: auxilia no confinamento do material restaurador dentro da cavidade, favorecendo melhor adaptação e acabamento.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Descartável
Disposable
Desechable

Tira de Lixa de Poliéster

Polyester Sanding Strip / Tira de Lijado de Poliéster

A tira de lixa de poliéster proporciona um melhor acabamento e polimento de restaurações dentais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Filme de poliéster, resina odontológica, óxido de alumínio granulometria 240 e 320.

Indicação: Indicado para acabamento e polimento das faces interproximais das restaurações de resinas compostas.

Características: Com duas partes, uma fina e outra mais grossa, a tira de lixa é confeccionada em poliéster e óxido de alumínio, sua finalidade é o acabamento e polimento de restaurações dentais.

Dimensões: Em tira: 4 x 170mm



Acabamento interproximal: permite acabamento preciso em restaurações entre os dentes.



Remoção de excessos: facilita a remoção de excessos de material restaurador.



Controle e precisão: maior controle durante o acabamento em áreas interproximais.



Descartável
Disponible
Desechable

Tira de Lixa de Aço

*Steel separating Strips
Separación de Acero Tiras*

Tira abrasiva indicada para acabamento e ajuste de restaurações interproximais, proporcionando melhor adaptação, contorno e polimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Aço inoxidável abrasivo.

Indicação: Acabamento e polimento das faces proximais em procedimentos restauradores.

Uso: Utilizar conforme técnica restauradora para ajuste proximal e refinamento das restaurações.

Características: Tiras abrasivas desenvolvidas para facilitar o acabamento interdental, proporcionando melhor adaptação e finalização das restaurações.

Dimensões: 4 x 120 mm ou 6 x 120 mm.



Acabamento preciso: indicada para o acabamento e polimento das faces proximais das restaurações.



Controle clínico: auxilia no ajuste fino e na definição do contorno proximal.



Descartável
Disponible
Desechable

Tira Matriz de Aço

Steel Strip / Tira de Aço

Tira metálica indicada para restaurações, auxiliando na contenção do material e na formação do contorno proximal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Aço inoxidável.

Indicação: Proteção dos dentes adjacentes durante o preparo cavitário.

Uso: Utilizar conforme técnica restauradora para isolamento e proteção proximal.

Características: Tira metálica resistente e maleável, desenvolvida para adaptação às superfícies dentárias durante o preparo cavitário.

Alturas disponíveis: 5 mm ou 7 mm.



Proteção cavitária: indicada para a proteção dos dentes adjacentes durante o preparo cavitário.



Versatilidade de aplicação: disponível nas espessuras de 5 mm ou 7 mm.



Material resistente: fabricada em aço inoxidável, oferecendo resistência e estabilidade durante o uso clínico.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Descartável
Disposable
Desechable

Filum – Fibra de Vidro Trançada

Braided Glass Fiber / Fibra de Vidrio Trenzada

Fibra de vidro trançada impregnada com resina composta fotopolimerizável.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Resina composta impregnada.

Indicação: reforçar restaurações de resina composta; realizar contenções periodontais, ortodônticas e de dentes avulsionados; produzir próteses dentárias adesivas e/ou provisória; e agir como mantenedor de espaço em odontopediatria.

Medidas: 8,5cm x 2mm x 0,25mm.



Impregnação fotopolimerizável: fibra impregnada com resina composta fotopolimerizável, facilitando a aplicação e a integração ao procedimento clínico.



Alta resistência: estrutura trançada que proporciona durabilidade e desempenho mecânico confiável em diferentes aplicações clínicas.



Reforço restaurador versátil: solução em fibra de vidro trançada indicada para reforço de restaurações em resina composta e contenção dentária.



1

Produto de
uso único

LANÇAMENTO

Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Réguas Aureum

Réguas milimetradas para dentística

Aureum Rulers Millimeter Rulers for Dentistry | Reglas Aureum Reglas Milimétricas para Odontología



Planejamento estético preciso: Facilita a análise da proporção áurea.



Análise completa: Kit com 9 peças para avaliação estética.



Medições milimetradas: Marcações precisas, sem cálculos manuais.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Polímero termoplástico transparente.

Indicação: Planejamento estético e medições odontológicas, incluindo análise de proporções dentárias e faciais.

Uso: Utilizar conforme protocolo clínico para marcações e medições durante o planejamento restaurador e estético.

Modelos: Régua de sorriso, Régua para análise individual e Régua para fotografia.

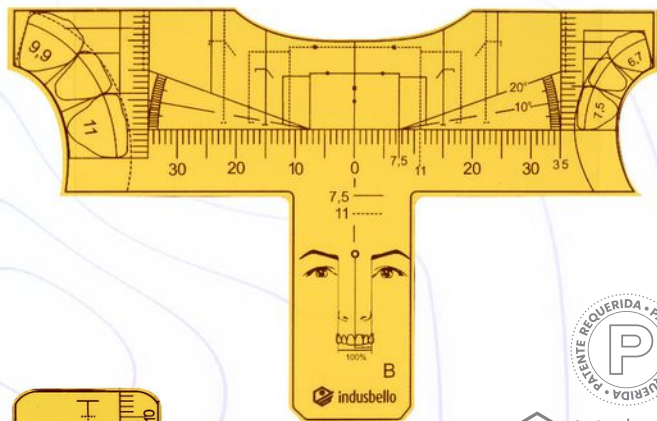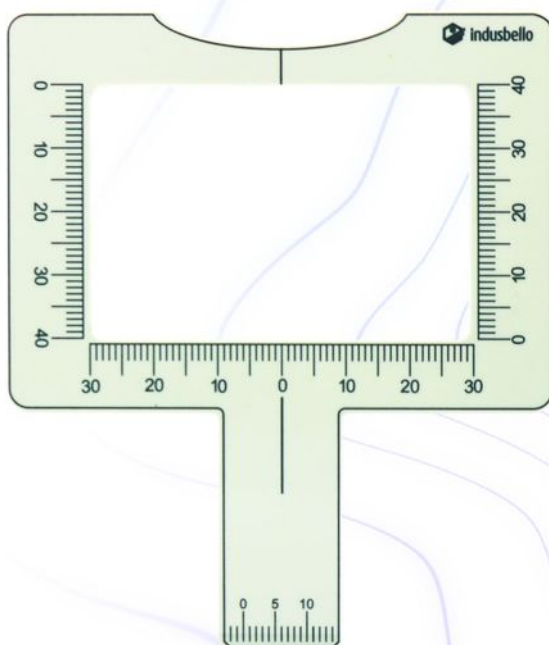



Autoclave
135°C / 275°F






Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.

Réguas desenvolvidas para auxiliar no planejamento estético odontológico, permitindo medições precisas e proporções faciais e dentárias, contribuindo para previsibilidade e harmonização dos resultados clínicos.

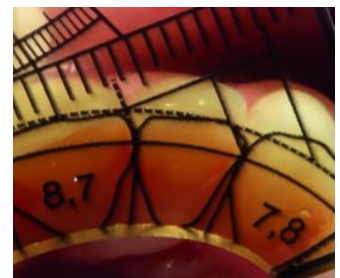


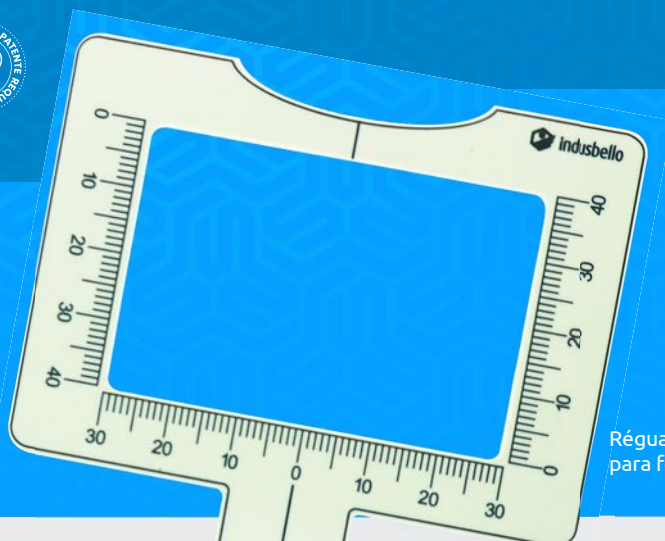



Régua milimetrada para fotografia.

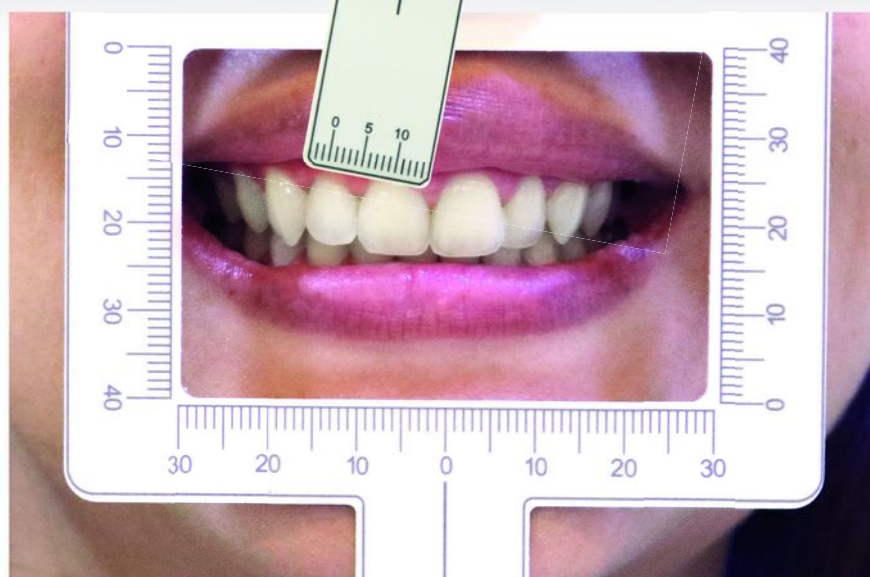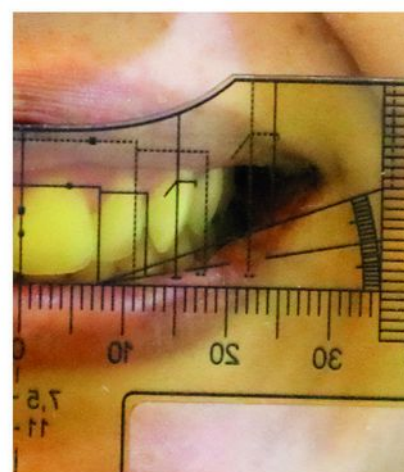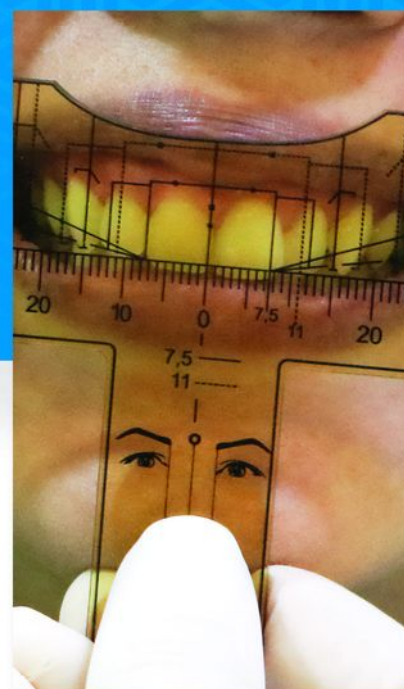

Réguas para análise de proporção dentária individual estética.

Réguas para análise da proporção áurea dentária.

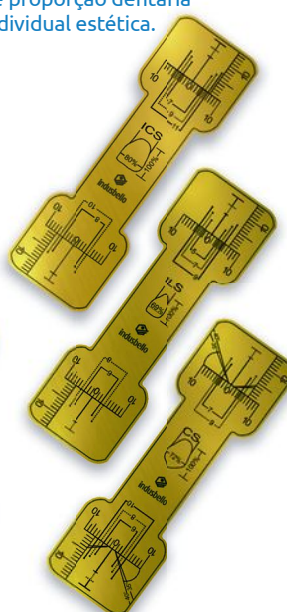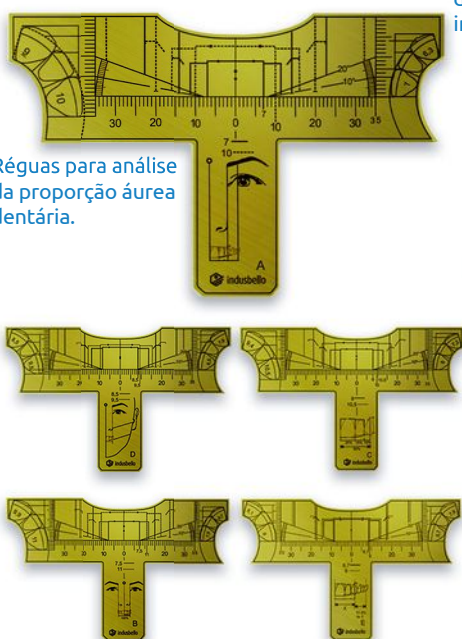

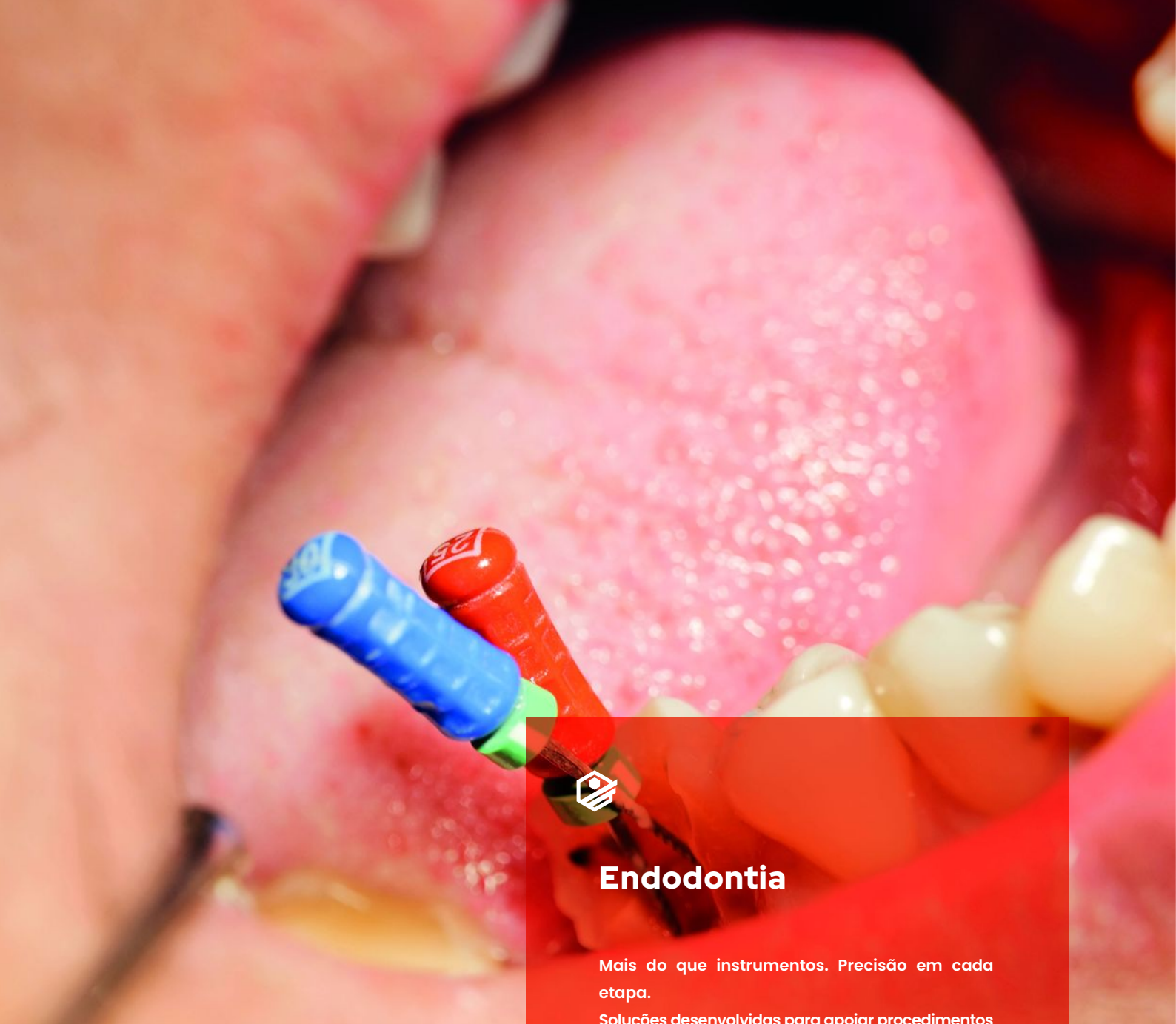

Endodontia


Mais do que instrumentos. Precisão em cada etapa.

Soluções desenvolvidas para apoiar procedimentos endodônticos com segurança, controle e eficiência, contribuindo para resultados clínicos previsíveis.

**CONTROLE E
PRECISÃO
EM CADA
PROCEDIMENTO**

A endodontia exige atenção absoluta aos detalhes.

Por isso, desenvolvemos soluções que contribuem para um melhor controle do campo operatório, otimização do fluxo clínico e maior segurança durante o atendimento.

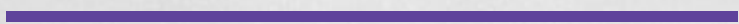

Grampo Invisível

Invisible Clamp | Grapas Invisíveis



Baixa radiopacidade:
Material transparente,
discreto na radiografia.



Aplicação precisa:
Posicionamento estável
e seguro.



Isolamento absoluto:
Eficiência no campo
operatório.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: UDEL P1700 NT11 (NATURAL) – Polissulfona.

Indicação: Isolamento absoluto dos dentes durante procedimentos odontológicos.

Modelos: • GI-01 – molares inferiores • GI-02 – molares superiores
• GI-03 – pré-molares superiores e inferiores



Produto de uso único.
Single use / Un solo uso

Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Grampo para isolamento absoluto que
não interfere na radiografia, garantindo
fixação do lençol de borracha com mais
praticidade clínica.





GI - 01
Molares
inferiores



GI - 02
Molares
superiores



GI - 03
Pré-molares
superiores
e inferiores

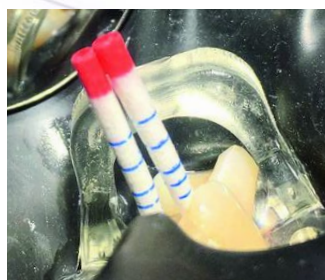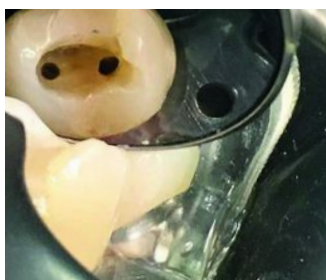

Aspirador Endodôntico

Endodontic Aspirator/ Ejector endodôntico

Sistema de aspiração desenvolvido para remoção eficiente das soluções irrigadoras durante o tratamento endodôntico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Conjunto com cânula e pontas aspiradoras.

Indicação: Aspiração de soluções irrigadoras durante procedimentos endodônticos.

Uso: Conectar ao sistema de sucção e utilizar conforme protocolo clínico durante a irrigação dos canais radiculares.

Características: Acompanha 01 cânula e 03 pontas com diferentes diâmetros, permitindo adaptação a diferentes anatomias de canais e maior eficiência na aspiração.

Pontas incluídas: 1,0 mm • 1,5 mm • 2,0 mm.



Precisão clínica: ponteiros com diferentes diâmetros que permitem melhor adaptação aos canais radiculares.



Aspiração eficiente: indicado para a aspiração de soluções irrigadoras durante o tratamento endodôntico.



Conjunto completo: acompanha 01 cânula e 03 ponteiros com diâmetros de 1,0 mm, 1,5 mm e 2,0 mm.



Cimento Obturador Provisório

Temporary Filling Material / Material Provisional para Obturación

Material indicado para vedação temporária de cavidades, oferecendo praticidade clínica e fácil remoção na etapa seguinte do tratamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Cimento provisório odontológico.

Indicação: Restaurações provisórias e vedação temporária de cavidades.

Uso: Aplicar diretamente na cavidade conforme protocolo clínico.

Características: Endurece com a saliva; de fácil remoção pelo profissional.



Endurecimento prático: endurece com a saliva, dispensando etapas adicionais no preparo.



Restauração temporária: indicado para restaurações provisórias em procedimentos odontológicos.



Remoção facilitada: material de fácil remoção pelo profissional.



Endofit – Régua Milimetrada de Limas

Millimeter Rule for Files / Regla Milimetrada para Limas

Régua milimetrada para medição do comprimento de trabalho em endodontia, auxiliando no ajuste preciso das limas durante o preparo dos canais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Resina termoplástica.

Indicação: Medição do comprimento de trabalho de limas endodônticas.

Uso: Utilizar para ajuste e conferência do comprimento das limas durante o tratamento endodôntico.

Características: Régua leve com marcação a laser; possui cursor exclusivo que facilita a definição do comprimento de trabalho, proporcionando maior precisão clínica.

Cores: ● ● ●



Marcação a laser: escala milimetrada com gravação a laser, garantindo maior durabilidade e legibilidade.



Medição precisa: indicada para a definição do comprimento de trabalho em procedimentos endodônticos.



Cursor exclusivo: possui cursor deslizante que facilita o ajuste e a padronização das medições.



Durevole – Pino de Fibra de Vidro (com ou sem broca)

Fiber Glass Posts (with or without drill)

Perno de Fibra de Vidro (con o sin fresa de largo)

Pino intracanal indicado para reforço e retenção de restaurações em dentes tratados endodonticamente, com versão com ou sem broca para maior praticidade clínica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Fibra de vidro.

Indicação: Reforço intracanal e retenção de restaurações em dentes tratados endodonticamente.

Uso: Utilizar conforme protocolo clínico de cimentação de pinos de fibra.

Características: Formato duplo-cônico translúcido; possui elásticos de identificação por cor, facilitando a seleção do modelo; disponível nas versões com ou sem broca.

Modelos: 0.3; 0.5; 1.0; 2.0 e 3.0.



Reforço estrutural confiável: indicado para reforço e retenção em restaurações, contribuindo para maior estabilidade clínica.



Formato duplo-cônico translúcido: favorece melhor adaptação ao canal e estética superior, além de permitir adequada transmissão de luz.



Identificação por cor: elásticos de identificação coloridos que facilitam a seleção do modelo durante o procedimento.



Flexor de Limas – Endodônticas

Endodontic files flexor / Flexor de limas para endodoncia

indicado para curvar limas endodônticas, auxiliando na adaptação à anatomia do canal e oferecendo mais controle durante o preparo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Aço inox.

Indicação: Curvatura de limas endodônticas para melhor adaptação à anatomia do canal radicular.

Uso: Utilizar para curvar e ajustar as limas antes da instrumentação dos canais.

Características: Design exclusivo que proporciona melhor empunhadura, facilitando a curvatura das limas e contribuindo para maior precisão durante o procedimento endodôntico.



Curvatura controlada: facilita a curvatura das limas endodônticas para melhor adaptação à anatomia do canal.



Precisão no preparo: auxilia no pré-ajuste das limas, contribuindo para maior segurança e eficiência no tratamento endodôntico.



Design ergonômico: formato exclusivo que proporciona melhor empunhadura e controle durante o procedimento.

Veja Também: **Estojo 2818 Porta Limas** em Cirurgia e Esterilização.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Autoclave
135°C / 275°F

Tamborel

Endo Clean Stand / Tamborel

Organizador para limas endodônticas que facilita a disposição, visualização e manuseio dos instrumentos durante o atendimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Estrutura em resina com refis de espuma.

Indicação: Organização e apoio de limas endodônticas durante procedimentos clínicos.

Uso: Utilizar para acomodar limas manuais e rotatórias ao longo do tratamento endodôntico.

Características: Permite acomodação de limas de até 31 mm; acompanha 02 refis de espuma; disponível em várias cores.

Acessório: Refil de espuma para Tamborel com 15 mm de espessura, disponível em embalagens com 12 ou 45 unidades.

Cores: ● ● ● ● ●



Organização endodôntica: mini-organizador indicado para acomodação de limas endodônticas manuais e rotatórias.



Capacidade funcional: permite a acomodação de limas com comprimento de até 31 mm.



Praticidade no uso: acompanha 02 refis de espuma, facilitando a organização e o acesso durante o procedimento.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Autoclave
135°C / 275°F

Refil de Espuma para Tamborel

Endo clean stand refill / Recambio para Tamborel

Espuma de reposição para o Tamborel, indicada para manter a organização e acomodação das limas endodônticas durante o atendimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Espuma.

Indicação: Reposição do refil do Tamborel para acomodação de limas endodônticas.

Uso: Inserir no Tamborel conforme necessidade de substituição do refil original.

Características: Espessura de 15 mm; compatível com o Tamborel Indusbello; mantém as limas organizadas durante o atendimento clínico.

Apresentação: Embalagem com 12 ou 45 refil de espuma para tamborel.



Régua Endofit





Tamborel



Flexor de Limas



Fotografia

Mais do que imagens. Precisão em cada detalhe. Soluções desenvolvidas para registrar procedimentos com clareza, fidelidade e controle, contribuindo para diagnósticos, acompanhamento clínico e comunicação profissional.

IMAGENS QUE VALORIZAM O PROCEDIMENTO

Registros bem feitos fazem parte de um atendimento completo. Com soluções funcionais e confiáveis, a fotografia clínica se torna uma aliada no planejamento, na comunicação e na evolução dos tratamentos.

Contraste Flexível

Flexible Contrast / Contraste Flexible



Evidência fotográfica:
Realça os dentes em
imagens clínicas.



Material flexível e atóxico:
Conforto e segurança no uso.



Acabamento antirreflexo:
Elimina reflexos e melhora
a nitidez.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material flexível e atóxico.

Indicação: Fotografia odontológica intraoral para evidência dos dentes.

Uso: Posicionar atrás ou ao redor dos dentes conforme técnica fotográfica.




Autoclave
135°C / 275°F



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.

Instrumento manual para evidenciar os dentes em fotografias odontológicas, reduzindo reflexos e proporcionando maior contraste das estruturas dentárias, contribuindo para imagens mais nítidas e profissionais.

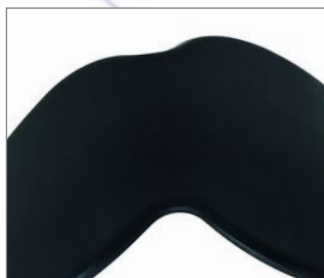

Contrastes

Contrast



Evidência fotográfica:
Imagens clínicas mais nítidas.



Estabilidade e segurança:
Firmeza e adaptação no uso.



Acabamento antirreflexo:
Elimina reflexos para melhor desempenho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Alumínio com revestimento antiaderente atóxico preto.

Indicação: Fotografia odontológica intraoral para destaque das estruturas dentárias.

Uso: Posicionar conforme técnica fotográfica para evidenciar os dentes durante os registros clínicos.

Modelos: Nº 04 – Frontal – Nº 05 – Frontal – Nº 07 – Frontal – Nº 08 – Lateral / Oclusal






Autoclave
135°C / 275°F

Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Instrumentos utilizados em fotografia odontológica para evidenciar os dentes, reduzir reflexos e melhorar o desempenho das imagens intraorais, oferecendo diferentes formatos para maior segurança e firmeza durante o uso.

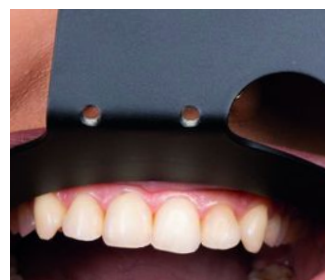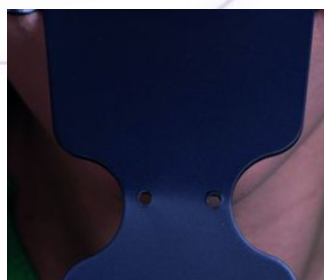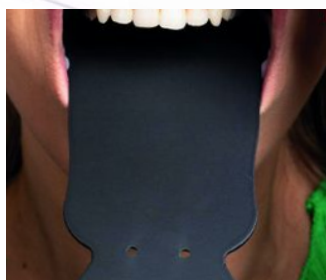

Nº 07 Frontal



Nº 04 Frontal



Nº 05 Frontal



Oclusal



Nº 08 Lateral



LANÇAMENTO



Calibrador de Cor

Flexible Contrast / Contraste Flexible



Seleção precisa: Auxilia na escolha exata da cor dental.



Padronização clínica: Garante avaliação consistente da tonalidade.



Leitura confiável: Referência estável para resultados estéticos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material termoplástico com referência cromática.

Indicação: Calibração de cor em fotografias odontológicas e registros clínicos.

Uso: Posicionar na área a ser fotografada para referência de cor durante a captura da imagem.




Autoclave
135°C / 275°F

Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Instrumento utilizado em fotografia odontológica para padronização e correção de cores, auxiliando na obtenção de imagens mais fiéis à tonalidade real dos dentes e tecidos, contribuindo para diagnósticos e planejamentos estéticos mais precisos.

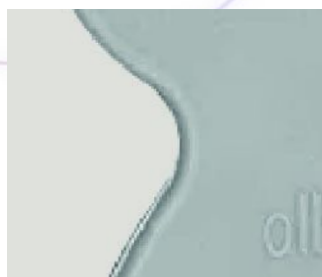



Afastador "C"



Afastador "V"



Afastador "V2"

Afastador Labial "C"

Retractor "C"

Afastador indicado para retração dos lábios, facilitando a visualização da arcada durante procedimentos clínicos e fotografia odontológica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Policarbonato.

Indicação: Afastamento labial em procedimentos clínicos e fotografia odontológica.

Uso: Posicionar conforme necessidade para afastamento dos lábios durante o atendimento.

Características: Bordas arredondadas e sem rebarbas, evitando desconforto ao paciente; auxilia na obtenção de fotografias odontológicas com melhor enquadramento e visibilidade das estruturas.

Cores:  



Conforto ao paciente: Bordas arredondadas e acabamento sem rebarbas, proporcionando conforto durante o uso.



Qualidade fotográfica: Melhor exposição da arcada para facilitar procedimentos restauradores e estéticos.



Estabilidade no posicionamento: Formato em "C" que mantém o afastador firme e seguro durante o procedimento.



Afastador "MF"

Retractor "MF"

Afastador labial indicado para retração do lábio superior ou inferior, facilitando o acesso ao campo operatório e a visualização clínica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Policarbonato.

Indicação: Afastamento labial em procedimentos clínicos e fotografia odontológica.

Uso: Posicionar na parte interna do lábio superior ou inferior conforme necessidade clínica.

Características: Formato anatômico que possibilita encaixe perfeito na região interna dos lábios, oferecendo estabilidade durante o uso.

Cores:  



Encaixe anatômico: formato anatômico que possibilita ajuste preciso na parte interna do lábio superior ou inferior.



Conforto e estabilidade: material resistente que garante segurança e conforto ao paciente durante o uso.



Aplicação prática: design funcional que facilita o posicionamento e a manutenção do afastamento labial.



Afastador "V"

Retractor "V"

Afastador labial indicado para retração e exposição da arcada, facilitando procedimentos clínicos e fotografia odontológica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Policarbonato.

Indicação: Afastamento labial em procedimentos clínicos e fotografia odontológica.

Uso: Posicionar conforme necessidade para afastamento dos lábios durante o atendimento.

Características: Bordas arredondadas e sem rebarbas, proporcionando conforto ao paciente; favorece maior amplitude nas fotografias odontológicas laterais.

Tamanhos: P e G.

Cores:  



Conforto ao paciente: bordas arredondadas e acabamento sem rebarbas, proporcionando conforto durante o uso.



Qualidade fotográfica: permite melhor afastamento labial, proporcionando maior visibilidade e qualidade nas fotografias odontológicas.



Design funcional: formato em "V" que facilita o posicionamento e garante estabilidade durante o procedimento.



Afastador "V2"

Retractor "V2"

Afastador labial indicado para maior abertura e exposição da arcada, facilitando procedimentos clínicos e fotografia odontológica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Policarbonato.

Indicação: Afastamento labial em procedimentos clínicos e fotografia odontológica.

Uso: Posicionar conforme necessidade para retração dos lábios durante o atendimento.

Características: Design anatômico que favorece maior abertura lateral; bordas arredondadas para conforto do paciente; facilita o enquadramento em registros fotográficos.

Tamanhos: P e G.

Cores:  



Qualidade fotográfica: proporciona afastamento labial eficiente, garantindo melhor visibilidade e qualidade nas fotografias odontológicas.



Conforto ao paciente: bordas arredondadas e acabamento sem rebarbas, proporcionando conforto durante o uso.



Design aprimorado: formato "V2" desenvolvido para facilitar o posicionamento e oferecer maior estabilidade durante o procedimento.



Espelho Metálico

Metallic Mirror / Espejo Metálico



Reflexão precisa: Imagens orais nítidas e de alta qualidade.



Opções de modelos: cinco modelos para diferentes aplicações



Conforto ao paciente: Contornos arredondados e ajuste seguro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Aço inoxidável com superfície altamente polida que favorece excelente reflexo sem distorções.

Indicação: Fotografia odontológica intraoral e visualização indireta de superfícies dentárias em procedimentos clínicos e registros.

Uso: Posicionar conforme técnica fotográfica para refletir a imagem desejada; manter as mãos fora do campo visual da câmera.




Autoclave
135°C / 275°F

Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Instrumento utilizado em fotografia odontológica para visualização intraoral, permitindo reflexão de imagem precisa e melhor enquadramento durante os registros clínicos, mantendo as mãos fora do campo de visão da câmera.

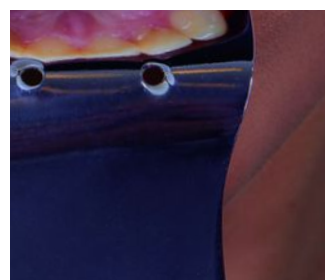



IBM001
Oclusal



IBM-002
Lingual



IBM-003
Lateral



IBM-004
Oclusal
e lateral



IBM-005
Oclusal



LANÇAMENTO



Espelho Metálico Reto

"Flat" Metallic Mirror / Espejo Metálico "Recto"



Reflexão precisa: Imagens intrabucais nítidas e fiéis.



Conforto no posicionamento: Ajuste confortável ao paciente.



Qualidade fotográfica: Melhor definição nas imagens clínicas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Aço inoxidável.

Indicação: Visualização indireta e fotografia odontológica intraoral.

Uso: Posicionar conforme necessidade clínica ou fotográfica para refletir as estruturas bucais.

IBM 04



IBM 05




Autoclave
135°C / 275°F

Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Espejo utilizado em fotografia odontológica e procedimentos clínicos para visualização indireta das estruturas bucais, permitindo melhor acesso visual às áreas posteriores e registros intraorais mais precisos.

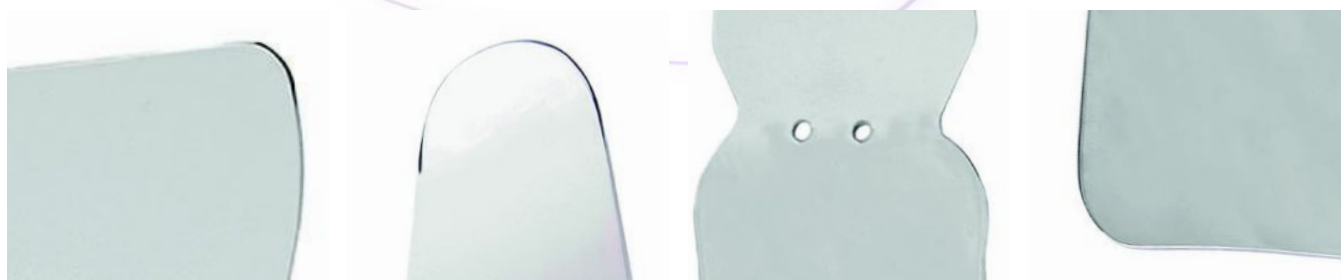

Espelho Cristal

Crystal Mirror / Espejo Cristal



Aplicação versátil: Uso em diversas áreas e fotos intrabucais.



Reflexão de alta qualidade: Espelho dupla face com imagem nítida.



Conforto ao paciente: Bordas arredondadas para melhor adaptação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Vidro cristal.

Indicação: Visualização indireta e fotografia odontológica intraoral.

Uso: Acoplar ao cabo para espelho cristal e posicionar conforme necessidade clínica ou fotográfica.




Autoclave
135°C / 275°F



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.

Espelho utilizado em fotografia odontológica e procedimentos clínicos para visualização indireta das estruturas bucais, permitindo melhor acesso às áreas posteriores e registros intraorais com maior nitidez.

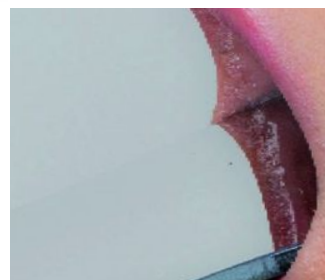

IB-01 Lingual



IB-02
Lateral



IB-03
Oclusal
Infantil



IB-04
Oclusal
Adulto



Cabo para Espelho Cristal

Crystal Mirror Handle / Mango para Espejo Cristal



Material resistente:
Alumínio anodizado, leve e durável.



Manuseio preciso: Melhor controle dos espelhos cristal.



Cabeça móvel: Ajuste fácil e posicionamento ideal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Aço inoxidável.

Indicação: Suporte para espelhos cristal em procedimentos clínicos e registros fotográficos intraorais.

Uso: Rosquear o espelho cristal no cabo e posicionar conforme necessidade clínica.

Cores: 





Autoclave
135°C / 275°F



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.

Cabo indicado para acoplamento de espelhos cristal, permitindo melhor empunhadura e controle durante procedimentos clínicos e fotografia odontológica, facilitando a visualização indireta das estruturas bucais.

***Espelhos e o cabos são vendidos separadamente.**

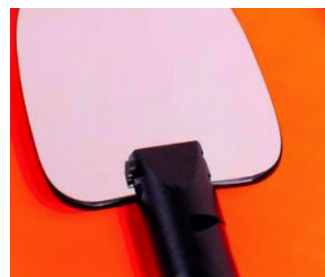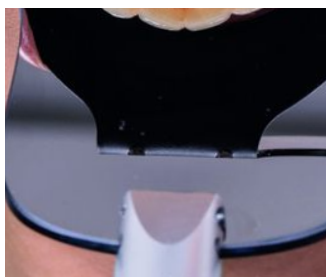

Suporte de Flash Duplo

Dual Flash Bracket / Soporte de Flash Duplo



Fotografia clínica precisa: Maior controle de luz e menos sombras.



Iluminação otimizada: Melhor posicionamento de flashes externos.



Compatível com flashes externos: Uso com câmeras com ou sem fio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Alumínio anodizado, poliacetal, aço e borracha.

Indicação: Fotografia odontológica com uso de flashes externos, especialmente em imagens intraorais.

Uso: Fixar a câmera na base central do suporte; encaixar os flashes nas extremidades, ajustar os braços articulados conforme necessidade de iluminação e capturar imagens com luz equilibrada.

Modelos: • SF2-N (Nikon) e SF2-C (Cannon).



Autoclave
135°C / 275°F

Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Suporte para câmera fotográfica com dois pontos de fixação de flashes externos, permitindo posicionar as fontes de luz em ângulos ideais para melhorar a iluminação das fotografias odontológicas e obter imagens com maior nitidez, contraste e detalhamento.





Canon



Nikon



Odontopediatria

Mais do que instrumentos. Cuidado, confiança e acolhimento. Soluções desenvolvidas para tornar o atendimento infantil mais tranquilo, seguro e eficiente, promovendo conforto para a criança e praticidade para o profissional.

**PEQUENOS
PACIENTES.
GRANDES
CUIDADOS.**

Cuidar do sorriso infantil exige atenção, delicadeza e produtos confiáveis.

A linha Indusbello para Odontopediatria oferece recursos que facilitam os procedimentos clínicos, reduzem o estresse da criança e proporcionam mais segurança durante o atendimento.

Design funcional, materiais de alta qualidade e praticidade no dia a dia do consultório.

Abridor de Boca Apritec Infantil

Mouth Opener - Infant

Abridor indicado para manter a boca aberta em pacientes infantis, facilitando o acesso clínico com mais conforto e segurança durante o atendimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Plásticos atóxicos (material médico).

Indicação: Manutenção da boca aberta em pacientes infantis durante atendimento odontológico.

Uso: Posicionar entre as arcadas dentárias de acordo com o tamanho indicado para o paciente; utilizar em conformidade com protocolos clínicos.

Características: Projetado para conforto e segurança em crianças; medidas específicas para adaptação anatômica infantil; auxilia no acesso do profissional ao campo clínico.

Modelos/Tamanhos: 14 mm • 20 mm • 26 mm • 32 mm.

Cores: ● ● ● ●



Acomodação oclusal segura: indicado para auxiliar na abertura bucal e acomodação oclusal durante o atendimento infantil.



Modelos lúdicos e funcionais: disponível nas versões Standard ou Animais, tornando o procedimento mais amigável para a criança.



Conforto ao paciente: design anatômico que promove estabilidade e reduz o esforço durante a abertura bucal.



Afastador "C" Infantil

Retractor "C" - Infant

Afastador labial indicado para retração dos lábios em pacientes infantis, facilitando a visualização da arcada durante procedimentos clínicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material termoplástico atóxico.

Indicação: Afastamento labial em procedimentos clínicos e fotografia odontológica em pacientes infantis.

Uso: Posicionar conforme necessidade para afastar os lábios durante o atendimento.

Características: Formato em "C" adaptado ao arco infantil, com bordas arredondadas para conforto da criança; facilita a visualização e o acesso clínico.

Cores: ● ●



Conforto ao paciente infantil: bordas arredondadas e acabamento sem rebarbas, proporcionando conforto durante o uso.



Indicação específica: ideal para fotografar dentes anteriores em pacientes infantis.



Qualidade fotográfica: auxilia no afastamento labial, proporcionando melhor visibilidade e qualidade nas fotografias odontológicas.



Afastador “MF” Infantil

Retractor “MF” - Infant

Afastador labial indicado para retração do lábio superior ou inferior em pacientes infantis, facilitando o acesso ao campo operatório.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material termoplástico atóxico.

Indicação: Afastamento labial em procedimentos clínicos e fotografia odontológica em pacientes infantis.

Uso: Posicionar na região interna do lábio superior ou inferior conforme necessidade durante o atendimento.

Características: Formato adaptado às dimensões da cavidade infantil; proporciona conforto e estabilidade durante o uso; facilita a visualização e o acesso clínico em pacientes crianças.

Cores:  



Encaixe anatômico infantil: formato anatômico que possibilita ajuste preciso na parte interna do lábio superior ou inferior do paciente infantil.



Indicação fotográfica: ideal para fotografias oclusais em pacientes infantis.



Conforto e segurança: fabricado em material resistente, proporcionando estabilidade e conforto durante o uso.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Autoclave
135°C / 275°F

Afastador “V” Infantil

Retractor “V” - Infant

Afastador labial indicado para maior abertura e exposição da arcada em pacientes infantis, facilitando procedimentos clínicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material termoplástico atóxico.

Indicação: Afastamento labial em procedimentos clínicos e fotografia odontológica em pacientes infantis.

Uso: Posicionar conforme necessidade para afastar os lábios durante o atendimento.

Características: Formato “V” adaptado às dimensões da cavidade infantil; bordas arredondadas para maior conforto; proporciona maior amplitude de exposição em áreas laterais.

Cores:  



Conforto ao paciente infantil: bordas arredondadas e acabamento sem rebarbas, proporcionando conforto durante o uso.



Amplitude fotográfica: proporciona maior abertura para fotografias odontológicas laterais, facilitando o registro de dentes posteriores.



Design funcional: formato em “V” que facilita o posicionamento e garante estabilidade durante a fotografia clínica.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Autoclave
135°C / 275°F

Afastador “V2” Infantil

Retractor “V2” - Infant

Afastador labial indicado para maior abertura lateral da arcada em pacientes infantis, facilitando o acesso clínico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material termoplástico atóxico.

Indicação: Afastamento labial em procedimentos clínicos e fotografia odontológica em pacientes infantis.

Uso: Posicionar conforme necessidade para afastar os lábios durante o atendimento.

Características: Formato “V2” adaptado às dimensões da cavidade infantil; bordas arredondadas para conforto ao paciente; proporciona maior amplitude lateral de exposição.

Cores:  



Conforto ao paciente infantil: bordas arredondadas e acabamento sem rebarbas, proporcionando conforto durante o uso.



Empunhadura aprimorada: design que proporciona melhor pega e maior controle durante o uso clínico.



Qualidade fotográfica: afastamento eficiente que favorece melhor visibilidade e qualidade nas fotografias odontológicas.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Autoclave
135°C / 275°F

Afastador Labial Expandex Infantil

Retractor Expandex - Infant

Afastador indicado para retração simultânea dos lábios em pacientes infantis, proporcionando melhor exposição da arcada durante procedimentos clínicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material termoplástico atóxico e flexível.

Indicação: Afastamento labial em procedimentos clínicos e fotografia odontológica em pacientes infantis.

Uso: Posicionar conforme necessidade para retrain os lábios durante o atendimento.

Características: Formato que proporciona maior abertura e exposição do campo clínico; adaptado ao tamanho da cavidade infantil; bordas arredondadas para conforto do paciente.

Cores:    



Encaixe confortável: fabricado em material altamente flexível, proporcionando ajuste preciso e confortável ao paciente infantil.



Produto esterilizável: compatível com esterilização, garantindo biossegurança na rotina clínica.



Conforto e segurança: design que reduz a pressão nos tecidos, auxiliando no afastamento labial de forma confortável.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Autoclave
135°C / 275°F

Afastador Labial e Lingual Lip Expand Infantil

Retractor Lip Expand - Infant

Afastador indicado para retração simultânea dos lábios e da língua em pacientes infantis, facilitando a visualização da arcada durante procedimentos clínicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material termoplástico atóxico e flexível.

Indicação: Afastamento labial e lingual em procedimentos clínicos e fotografia odontológica em pacientes infantis.

Uso: Posicionar conforme necessidade para retrain os lábios e a língua durante o atendimento clínico.

Características: Formato anatômico que possibilita afastamento simultâneo dos lábios e da língua; adapta-se às dimensões da cavidade infantil; bordas arredondadas para maior conforto ao paciente.



Exposição ampliada: afasta lábios e bochechas, proporcionando melhor visualização da área de trabalho.



Bloqueador de língua integrado: design com exclusivo bloqueador de língua que auxilia no controle e na segurança do procedimento.



Flexibilidade funcional: material flexível que garante conforto ao paciente infantil durante o uso clínico.



Contraste Oclusal Infantil

Occlusal Contrast - Infant

Contraste indicado para fotografia odontológica infantil, auxiliando na visualização das superfícies oclusais e no registro clínico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Alumínio com revestimento antiaderente atóxico preto.

Indicação: Fotografia odontológica oclusal em pacientes infantis.

Uso: Posicionar sobre a arcada dentária infantil conforme técnica fotográfica para enfatizar os detalhes oclusais.

Características: Superfície preta sem reflexo que maximiza o contraste do dente na imagem; adapta-se ao arco infantil; bordas arredondadas para conforto ao paciente; facilita a obtenção de imagens oclusais nítidas.



Evidência fotográfica: desenvolvido para evidenciar os dentes, proporcionando melhor desempenho em fotografias oclusais infantis.



Acabamento antirreflexo: revestimento preto atóxico e antiaderente que elimina reflexos indesejados.



Material resistente: fabricado em alumínio, garantindo durabilidade e estabilidade durante o uso clínico.



Espelho Cristal Infantil IB03

Crystal Mirror IB03 - Infant / Espejo Cristal IB03 - Infantil

Contraste para fotografia odontológica infantil, facilitando a visualização oclusal e o registro clínico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Vidro cristal.

Indicação: Visualização indireta e fotografia odontológica intraoral em pacientes infantis.

Uso: Acoplar ao cabo para espelho cristal e posicionar conforme necessidade clínica ou fotográfica.

Características: Superfície altamente reflexiva que proporciona imagens mais nítidas; tamanho adaptado ao arco infantil; formato que facilita o posicionamento e aumenta o conforto do paciente durante o uso.



Reflexão de alta qualidade: espelho plano, dupla face, com cristal metalizado em ambos os lados, proporcionando imagem nítida e fiel.



Precisão visual: superfície refletiva que auxilia na captura de detalhes com maior definição.



Aplicação fotográfica: indicado para fotografias intrabucais na odontologia, especialmente em pacientes infantis.



Espelho Metálico Infantil IBM006

Metallic Mirror IBM 006 - Infant

Espejo Metálico IBM 006 - Infantil

Espelho para visualização intraoral em pacientes infantis, facilitando o acesso às áreas posteriores e o registro clínico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Metal polido.

Indicação: Visualização indireta e fotografia odontológica intraoral em pacientes infantis.

Uso: Posicionar conforme necessidade clínica ou fotográfica para refletir as estruturas bucais.

Características: Superfície altamente reflexiva; tamanho adaptado ao arco infantil; contornos arredondados para maior conforto; facilita o posicionamento durante registros intraorais.



Fotografia clínica infantil: indicado para fotografias oclusais e laterais em pacientes infantis.



Reflexão eficiente: espelho metálico com dupla face que proporciona imagem nítida para melhor registro fotográfico.



Manuseio facilitado: formatos angulados que auxiliam no posicionamento e no controle durante o uso.



Espelho de Mão

Hand Mirror / Espejo de Mano

Espelho para visualização dos dentes pelo paciente, auxiliando na explicação de procedimentos e apresentação de resultados clínicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Estrutura em material resistente com superfície espelhada.

Indicação: Visualização dos dentes e acompanhamento de procedimentos clínicos pelo paciente.

Uso: Manusear conforme necessidade para mostrar áreas tratadas ou resultados estéticos.

Características: Formato anatômico que facilita a empunhadura; superfície reflexiva que permite visualização clara; ideal para comunicação clínica e apresentação de resultados.

Cores: ● ● ● ●



Experiência lúdica: formato de dente que torna a consulta mais divertida e acolhedora para o paciente infantil.



Aproximação com o paciente: auxilia na interação e no engajamento durante o atendimento odontológico.



Design atrativo: disponível em diversas cores, contribuindo para um ambiente clínico mais lúdico.



Massageador de Gengivas

Gum Massager / Masajeador de Encías

Acessório indicado para estimular a gengiva, auxiliando na circulação local e no conforto durante a higiene bucal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material flexível e atóxico.

Indicação: Massagem gengival e estímulo dos tecidos periodontais, podendo auxiliar em rotinas de prevenção e bem-estar oral.

Uso: Aplicar movimentos suaves sobre a gengiva conforme orientação profissional.

Características: Ponta macia para contato confortável com o tecido gengival; formato anatômico que facilita o manuseio; auxilia na estimulação da gengiva e na sensação de alívio local.



Alívio gengival: indicado para massagear a gengiva do bebê, auxiliando no conforto durante o desenvolvimento bucal.



Estimulação suave: textura adequada para promover massagem delicada e segura.



Uso precoce: recomendado a partir dos primeiros 3 meses de idade.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Posicionador Radiográfico Cone Indicator Infantil

Cone Indicator X-Ray Positioner - Infant / Cone Indicator Infantil

Posicionador indicado para radiografias intrabucais em pacientes infantis, auxiliando no alinhamento do cilindro e no correto enquadramento da imagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Estrutura em polímero termoplástico com componentes de apoio para filme.

Indicação: Realização de radiografias intrabucais periapicais e interproximais em pacientes infantis.

Uso: Posicionar o filme no suporte e alinhar o cilindro do aparelho conforme o indicador, seguindo a técnica radiográfica.

Características: Sistema que auxilia no paralelismo e no direcionamento do feixe de raios-X; facilita o enquadramento da imagem; formato adaptado à anatomia infantil; contribui para redução de erros de posicionamento e de repetição de exames.



Precisão radiográfica: permite a execução de radiografias periapicais e interproximais com rapidez e exatidão.



Indicação infantil: desenvolvido para uso em pacientes infantis, proporcionando melhor posicionamento e conforto durante o exame.



Compatibilidade clínica: utilizado com filme radiográfico (não incluso).



Posicionador Radiográfico Cone Indicator para Dentes Anteriores Infantil

Cone Indicator for Anterior Teeth - Infant / Cone Indicator Dientes Anteriores - Infantil

Posicionador indicado para radiografias intrabucais de dentes anteriores em pacientes infantis, auxiliando no alinhamento do cilindro e no enquadramento da imagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Estrutura em polímero termoplástico com suporte para filme.

Indicação: Realização de radiografias intrabucais em dentes anteriores de pacientes infantis.

Uso: Posicionar o filme no suporte e alinhar o cilindro do aparelho conforme o indicador, seguindo a técnica radiográfica.

Características: Auxilia no paralelismo e direcionamento do feixe de raios-X; facilita o enquadramento da imagem; formato adaptado à anatomia infantil; contribui para redução de erros de posicionamento e de repetição de exames.



Indicação específica: formato adequado à anatomia infantil, facilitando o correto alinhamento do filme radiográfico.



Precisão no posicionamento: desenvolvido para permitir a execução de radiografias periapicais em dentes anteriores infantis com rapidez e exatidão.



Apoio de mordida integrado: auxilia na estabilização durante o exame, proporcionando maior conforto e colaboração do paciente.



Dispositivo de Mordida Para Cone Indicator Infantil

Bite Device - Infant / Dispositivo para Mordida

Acessório indicado para estabilizar filme radiográfico em pacientes infantis, facilitando o posicionamento durante o exame.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Polímero termoplástico.

Indicação: Apoio de mordida para radiografias intrabucais em pacientes infantis, auxiliando no posicionamento correto do sensor ou filme.

Uso: Acoplar ao Cone Indicator Infantil e solicitar que o paciente morda suavemente para estabilização durante o exame.

Características: Formato adaptado à anatomia infantil; contribui para redução de erros de posicionamento e de repetição de exames.



Compatibilidade garantida: encaixe preciso que assegura o correto posicionamento durante a realização das radiografias.



Reposição exclusiva: refil desenvolvido especificamente para uso no Posicionador Cone Indicator Infantil.



Conforto ao paciente infantil: auxilia na estabilização da mordida, proporcionando maior segurança e colaboração durante o exame.



Prendedor de Babador Infantil

Bib Clip / Porta Babero

Acessório indicado para fixação do babador em pacientes infantis, mantendo-o firme durante o atendimento clínico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material flexível com presilhas de fixação.

Indicação: Fixação de babadores em pacientes infantis durante procedimentos clínicos.

Uso: Prender as presilhas de fixação ao babador e coloque no paciente.

Características: Cordão ajustável; presilhas que garantem boa fixação; leve e confortável para uso em crianças; facilita a rotina clínica e contribui para maior organização do atendimento.

Cores: ● ● ● ● ●



Fixação segura: utilizado para prender guardanapos, babadores de pano, papel ou plástico durante procedimentos clínicos.



Modelos disponíveis: opções Fio e Slim (mais fino), adaptando-se às diferentes necessidades do atendimento.



Conforto ao paciente infantil: design leve que não causa incômodo durante o uso.



Dispositivo ClarkTec:

Um avanço tecnológico para o tratamento endodôntico.

A radiografia é um exame diagnóstico fundamental na odontologia, sendo utilizada para a avaliação de diversas condições bucais, incluindo cárie, doença periodontal, lesões endodônticas e fraturas dentárias.

Além do auxílio diagnóstico, ela é fundamental no planejamento dos tratamentos gerais, desde a Periodontia até a Reabilitação Oral, sendo essencial em algumas situações no transoperatório bem como para o controle de longevidade dos tratamentos.

As radiografias periapicais são do tipo "intrabucal" e fornecem uma visão geral dos grupos dentários e estruturas adjacentes. As radiografias periapicais são utilizadas em uma variedade de procedimentos odontológicos, incluindo tratamento endodôntico, cirurgia oral e implantes dentários.


O posicionamento correto do aparelho de raios X é essencial para a obtenção de radiografias periapicais precisas. O posicionador radiográfico é um equipamento que facilita o posicionamento do aparelho radiográfico, garantindo a obtenção de imagens de alta qualidade fornecendo imagens precisas e em proporção 1:1.

O desenvolvimento da inovação na área da radiologia está transformando a radiologia odontológica, tornando-a uma ferramenta ainda mais poderosa para o diagnóstico e tratamento de doenças bucais. Um dos



produtos idealizados, em parceria do cirurgião-dentista Dr. Andre Caliman com a Indusbello, é o dispositivo ClarkTec.

O posicionador radiográfico Endo ClarkTec Digital é um aperfeiçoamento dos posicionadores radiográficos utilizados na Odontologia para a realização de radiografias periapicais através da Técnica de Clark. Essa técnica é indicada para maximizar as informações fornecidas pelo exame radiográfico, pois através da mesio e/ou distoangulação é possível dissociar raízes e canais paralelos (Figura 1) e auxiliar na localização de dentes inclusos e corpos estranhos.

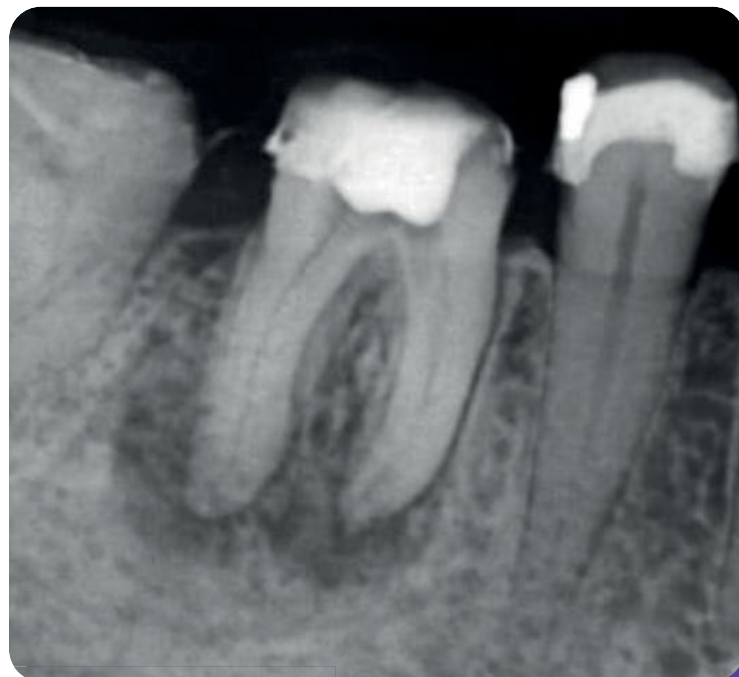

Conjunto Endo Clarktec Digital para sensores digitais. Exclusivo pote autoclavável



Incluso 18 fixadores para maior compatibilidade com sensores digitais.

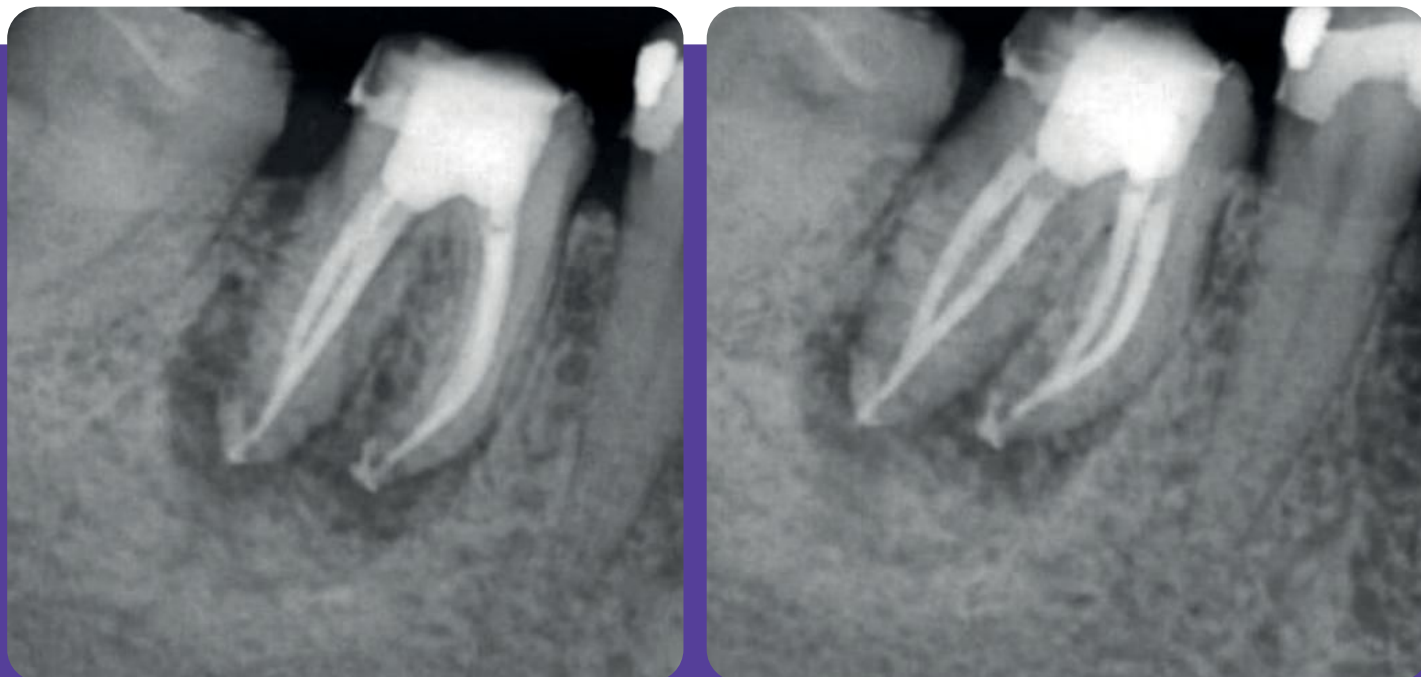


Figura 1: Esquerda para Direita - Radiografia Inicial Ortorradial, Radiografia Final Ortorradial, Radiografia Final Mesiorradial.



Conjunto Endo Clarktec para película radiográfica.

O dispositivo ClarkTec é um equipamento seguro e eficaz, que pode ser utilizado por profissionais de odontologia de todas as especialidades.

O posicionador radiográfico é composto por uma haste, um anel de orientação para o cilindro do aparelho de raios X, um suporte para o receptor de imagem e um dispositivo de mordida. O Dispositivo ClarkTec é acoplado entre o anel de orientação e a haste, permitindo a angulação do anel de orientação em até 20 graus, para mesial ou distal, o que possibilita a obtenção de radiografias periapicais em diferentes incidências.

Outra vantagem do uso do dispositivo ClarkTec se mostra na redução da radiação - o dispositivo é projetado para minimizar o índice de erros nas aquisições radiográficas, aumentando a precisão do exame e reduzindo a necessidade de exposições radiográficas desnecessárias - assim como diminui o tempo de trabalho.

*Endo ClarkTec que apresentam versões que permitem o uso com películas radiográficas ou placas de fósforo e com sensores radiográficos das diversas marcas existentes no mercado.

* O dispositivo ClarkTec está disponível individualmente e nos kits de posicionadores.




**Acompanhe
nossas Novidades**




Dr. Andre B. Caliman, Santo André - SP
Cirurgião Dentista - Especialista e Mestre
em Endodontia. @andrecaliman

Utilização em incidência ortorradial

Setas do dispositivo
ficam alinhadas.

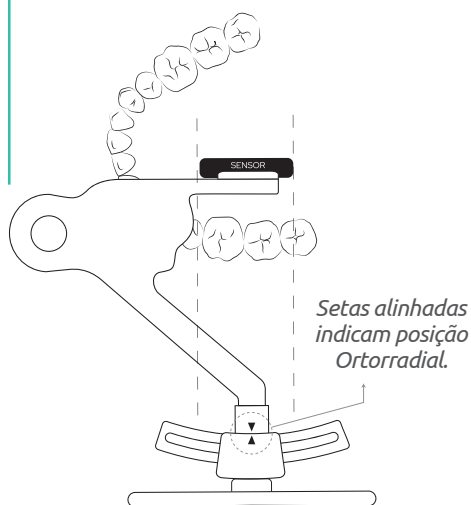

Utilização em incidência mesiorradial ou distorradial

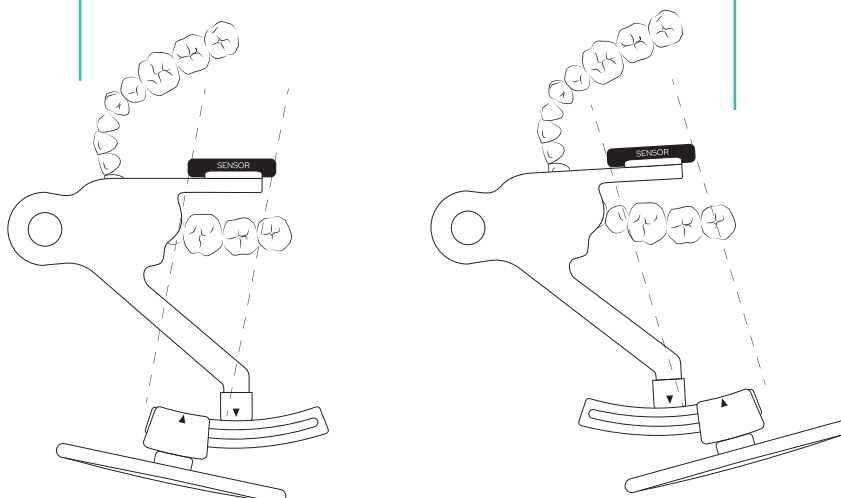

Imagens meramente ilustrativas.



Radiologia

A linha de Radiologia Indusbelllo oferece soluções que auxiliam no correto posicionamento durante exames radiográficos intraorais.


Desenvolvidos para proporcionar estabilidade, alinhamento e praticidade, os dispositivos contribuem para imagens mais precisas e diagnósticos mais seguros

**REALIZE
RADIOGRAFIAS
COM MAIS
PRECISÃO E
CONFIANÇA**

Os dispositivos de radiologia da Indusbelllo auxiliam no posicionamento adequado de sensores digitais, filmes radiográficos e placas de fósforo, garantindo alinhamento correto e maior precisão na captura das imagens.

Fabricados com materiais resistentes e de alta qualidade, oferecem durabilidade, praticidade no uso clínico e compatibilidade com diferentes sistemas radiográficos.

Soluções pensadas para facilitar a rotina do profissional e contribuir para exames mais rápidos, organizados e confiáveis.

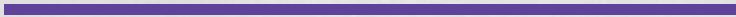

INOVAÇÃO



Posicionador Radiográfico Endo ClarkTec Digital

Endo ClarkTec Digital X-Ray Positioner



Precisão de angulação: Padroniza a tomada radiográfica e reduz repetições



Fluxo clínico ágil: Facilita o posicionamento do sensor durante o procedimento.



Adaptação universal: Compatível com sensores digitais mais utilizados no consultório.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Polímero termoplástico com suporte para sensor digital.

Indicação: Radiografias periapicais endodônticas com sensores digitais, incluindo técnica de Clark.

Uso: Posicionar o sensor no suporte e alinhar o cilindro do aparelho, ajustando a angulação quando necessário.






Autoclave
135°C / 275°F

Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Sistema indicado para posicionamento preciso de sensores digitais durante exames radiográficos endodônticos, auxiliando no alinhamento do feixe de raios-X e na obtenção de imagens mais previsíveis, especialmente em aquisições com variação da angulação horizontal (técnica de Clark).

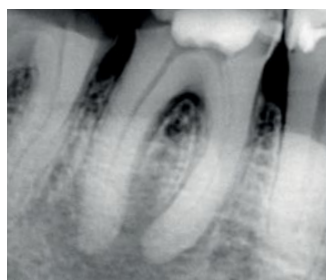

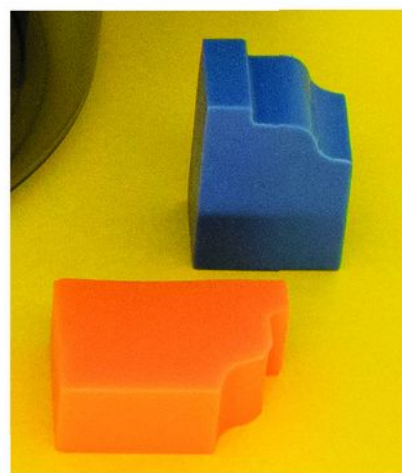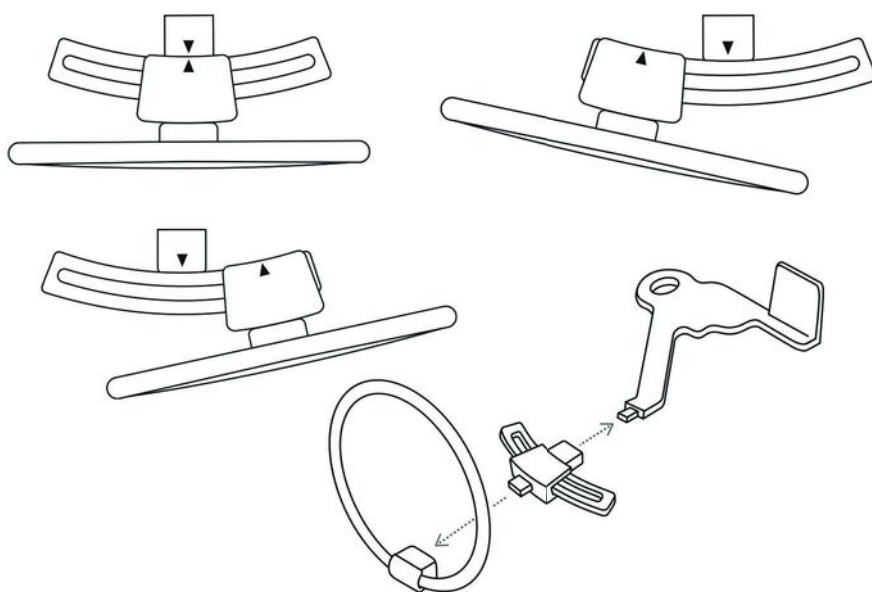

Posicionador Radiográfico Endo ClarkTec

Endo ClarkTec X-Ray Positioner

Posicionador indicado para radiografias endodônticas, auxiliando na variação da angulação horizontal e na localização de estruturas durante o exame.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Policarbonato, Poliacetal, Silicone e Pigmentos Atóxicos.

Indicação: Radiografias periapicais endodônticas com filme convencional, incluindo aplicação da técnica de Clark para localização de canais e estruturas.

Uso: Inserir o filme no suporte e posicionar conforme a técnica radiográfica, alinhando o cilindro do aparelho. Indicado exclusivamente para uso com filme radiográfico convencional.

Características: Auxilia no paralelismo e direcionamento do feixe de raios X, melhora o enquadramento da imagem e reduz erros de posicionamento e repetição de exames.



Aplicação endodôntica: desenvolvido para uso no transoperatório do tratamento endodôntico, auxiliando na correta angulação das imagens.



Compatibilidade clínica: utilizado com filme radiográfico (não incluso), garantindo padronização do exame.



Projeto de inovação: produto desenvolvido em parceria com o Dr. Andre Caliman, unindo conhecimento clínico e precisão técnica.



Posicionador Radiográfico Dispositivo ClarkTec

ClarkTec Device

Dispositivo indicado para aplicação da técnica de Clark, auxiliando na variação de angulação horizontal para localização de estruturas em radiografias periapicais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Estrutura em polímero termoplástico.

Indicação: Radiografias periapicais com aplicação da técnica de Clark.

Uso: Acoplar ao posicionador ClarkTec e ajustar conforme a angulação desejada para execução da técnica radiográfica.

Características: Permite variação precisa da angulação horizontal; auxilia na identificação de estruturas sobrepostas; contribui para imagens mais previsíveis; facilita o posicionamento correto durante o exame e ajuda a reduzir repetições radiográficas.



Versatilidade de uso: indicado para adaptação em posicionadores radiográficos Indusbello, ampliando as possibilidades de obtenção de imagens.



Precisão de incidência: permite a realização de radiografias periapicais nas incidências ortorradial, mesiorradial e distorradial, com melhor controle de angulação.



Aplicação endodôntica: ideal para o transoperatório do tratamento endodôntico, auxiliando na padronização das imagens radiográficas.



Posicionador Radiográfico Endo Cone Duo

Endo Cone Duo X-Ray Positioner

Posicionador indicado para radiografias intrabucais e endodônticas, auxiliando na variação de angulação e na localização de estruturas durante o exame.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Estrutura em polímero termoplástico com suportes para filme.

Indicação: Radiografias intrabucais endodônticas.

Uso: Posicionar o filme no suporte e alinhar o cilindro do aparelho conforme o posicionador, seguindo a técnica radiográfica.

Características: Sistema Duo permite aquisição de radiografias periapicais, interproximais e periapicais em transoperatório de endodontia. Compatível com filme convencional; contribui para melhor enquadramento da imagem e redução de erros de posicionamento.



Padronização radiográfica: posicionadores disponíveis em cinco modelos distintos, proporcionando melhor alinhamento das imagens.



Sistema completo: acompanha 01 pote autoclavável com 06 posicionadores, sendo 01 para radiografia interproximal e 05 para radiografias periapicais.



Versatilidade de aplicação: indicado para a obtenção de radiografias periapicais, inclusive durante tratamentos endodônticos, e para radiografias interproximais.

LANÇAMENTO



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Autoclave
135°C / 275°F

Posicionador Radiográfico Cone Indicator Adulto e Infantil

Cone Indicator X-Ray Positioner Adult and Infant
Posicionador Cono Indicador - Adultos y Niños

Posicionador indicado para radiografias intrabucais, auxiliando no alinhamento do cilindro e no correto enquadramento da imagem em pacientes adultos e infantis.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Estrutura em polímero termoplástico com componentes de apoio para filme.

Indicação: Radiografias intrabucais periapicais e interproximais em pacientes adultos e infantis.

Uso: Posicionar o filme no suporte e alinhar o cilindro do aparelho conforme o indicador, seguindo a técnica radiográfica.

Características: Auxilia no paralelismo e direcionamento do feixe de raios-X; facilita o enquadramento da imagem; reduz erros de posicionamento e necessidade de repetição do exame; versões com formatos adaptados à anatomia adulta e infantil.



Aplicação completa: indicado para a realização de radiografias periapicais e interproximais em pacientes adultos e infantis.



Sistema organizado: acompanha 01 pote autoclavável, 07 posicionadores e 06 dispositivos de mordida, garantindo praticidade no uso clínico.



Padronização radiográfica: os posicionadores auxiliam no correto alinhamento do filme, proporcionando imagens mais precisas e repetíveis.

LANÇAMENTO



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Autoclave
135°C / 275°F

Posicionador Radiográfico Bite Wings

Bite Wings X-Ray Positioner

Posicionador indicado para radiografias interproximais, auxiliando no alinhamento do cilindro e no correto enquadramento da imagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Estrutura em polímero termoplástico com suporte para sensor ou filme radiográfico.

Indicação: Radiografias interproximais (bite wing) para avaliação de cáries, adaptação de restaurações e nível ósseo.

Uso: Posicionar o filme no suporte e alinhar o cilindro do aparelho conforme o posicionador, seguindo a técnica radiográfica.

Características: Facilita o paralelismo e o direcionamento do feixe de raios-X; contribui para enquadramento preciso da imagem; ajuda a reduzir erros de posicionamento e repetição de exames; disponível em versões adulto e infantil.



Aplicação clínica eficiente: ideal para exames de rotina e diagnóstico de cáries interproximais.



Padronização do exame: auxilia no correto posicionamento do filme radiográfico, contribuindo para imagens mais nítidas e reproduzíveis.



Diagnóstico interproximal: indicado para a realização de radiografias interproximais com rapidez e precisão.



Posicionador Radiográfico Bite Wings Digital

Bite Wings Digital X-Ray Positioner

Posicionador indicado para radiografias interproximais com sensores digitais, auxiliando no alinhamento do cone e no enquadramento da imagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Estrutura em polímero termoplástico com suporte para sensor digital.

Indicação: Radiografias interproximais (bite wing) com sensores digitais, para avaliação de cáries, adaptação de restaurações e nível ósseo.

Uso: Posicionar o sensor digital no suporte e alinhar o cilindro do aparelho conforme o posicionador, seguindo a técnica radiográfica.

Características: Compatível com sensores digitais; facilita o paralelismo e o direcionamento do feixe de raios-X; contribui para enquadramento preciso da imagem; ajuda a reduzir erros de posicionamento e repetição de exames; disponível em versões adulto e infantil.



Imagens mais confiáveis: auxilia no alinhamento correto do sensor e do feixe de raios-X, favorecendo diagnósticos mais precisos.



Fixação segura do sensor: sistema de suporte que mantém o sensor estável durante a radiografia.



Mais praticidade clínica: fixadores variados permitem adaptação a diferentes sensores digitais.



Posicionador Radiográfico Cone Indicator

Cone Indicator X-Ray Positioner

Posicionador para radiografias intrabucais, auxiliando no alinhamento do clínica e no correto enquadramento da imagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Policarbonato, Poliacetal, Silicone e Pigmentos Atóxicos.

Indicação: Indicado para auxiliar na realização de radiografias periapicais de dentes superiores e inferiores e radiografias interproximais de dentes posteriores.

Uso: Posicionar o filme no suporte e alinhar o cilindro do aparelho utilizando o indicador para obter o enquadramento correto.

Características: Orienta o posicionamento do feixe de raios X, melhora o enquadramento da imagem e ajuda a evitar repetições de exame. disponível em versões adulto e infantil.



Radiografias precisas: permite a realização de radiografias periapicais e interproximais com rapidez e exatidão.



Aplicação clínica: indicado para uso com filme radiográfico (não incluso), atendendo às rotinas de radiologia odontológica convencional.



Kit completo: contém 02 peças para dentes posteriores, 01 peça para dentes anteriores, 01 Bite Wings para radiografias interproximais de dentes posteriores e 03 dispositivos de mordida.



Posicionador Radiográfico Cone Indicator Digital

Cone Indicator Digital X-Ray Positioner

Posicionador para radiografias intrabucais com sensores digitais, auxiliando no alinhamento do cilindro e no enquadramento da imagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Estrutura em polímero termoplástico com suportes para sensor digital.

Indicação: Radiografias intrabucais periapicais e interproximais com sensores digitais.

Uso: Posicionar o sensor digital no suporte e alinhar o cilindro do aparelho conforme o indicador, seguindo a técnica radiográfica.

Características: Compatível com sensores digitais; auxilia no paralelismo e direcionamento do feixe de raios-X; facilita o enquadramento da imagem; contribui para redução de erros de posicionamento e necessidade de repetição de exames.



Radiografias digitais precisas: permite a realização de radiografias periapicais e interproximais com rapidez e exatidão.



Compatibilidade digital: desenvolvido para uso com sensor digital (não incluso), atendendo às rotinas de radiologia odontológica digital.



Mais praticidade: acompanha 18 fixadores (9 para fixar o sensor na posição vertical e 9 para fixar o sensor na posição horizontal), atendendo os diversos modelos de sensores do mercado.



Posicionador Radiográfico Endo RH Plus

Endo RH Plus X-Ray Positioner

Posicionador para radiografias endodônticas, auxiliando no alinhamento do cilindro e no correto enquadramento da imagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Estrutura em polímero termoplástico com suportes para filme radiográfico.

Indicação: Radiografias intrabucais endodônticas.

Uso: Posicionar o filme no suporte e alinhar o cilindro do aparelho conforme o posicionador, seguindo a técnica radiográfica.

Características: Auxilia no paralelismo e no direcionamento do feixe de raios-X; facilita o enquadramento da imagem; contribui para redução de erros de posicionamento e repetição de exames; compatível com filme convencional; indicado para rotina clínica em endodontia.



Uso clínico: desenvolvido para utilização com filme radiográfico (não incluso), garantindo praticidade e precisão no transoperatório.



Versatilidade de aplicação: as peças são utilizáveis tanto para dentes anteriores quanto posteriores, otimizando a rotina clínica e reduzindo a troca de componentes.



Biossegurança: todos os componentes são autoclaváveis, atendendo aos protocolos de controle de infecção.



Posicionador Radiográfico Endo RH Plus Digital

Endo RH Plus Digital X-Ray Positioner

Posicionador para radiografias endodônticas com sensores digitais, auxiliando no alinhamento do cilindro e no enquadramento da imagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Estrutura em polímero termoplástico com suportes para sensor digital.

Indicação: Radiografias intrabucais endodônticas com sensores digitais.

Uso: Posicionar o sensor digital no suporte e alinhar o cilindro do aparelho conforme o posicionador, seguindo a técnica radiográfica.

Características: Compatível com sensores digitais; auxilia no paralelismo e direcionamento do feixe de raios-X; facilita o enquadramento da imagem; contribui para redução de erros de posicionamento e repetição de exames; indicado para rotina clínica em endodontia.



Uso clínico: desenvolvido para utilização com sensor digital (não incluso), garantindo precisão no posicionamento e melhor enquadramento da imagem radiográfica.



Versatilidade de aplicação: as peças são utilizáveis tanto para dentes anteriores quanto posteriores, otimizando a rotina clínica e proporcionando maior eficiência durante o atendimento.



Compatibilidade digital: acompanha 18 fixadores com tamanhos apropriados para diversos modelos de sensores digitais disponíveis no mercado.



Posicionador Radiográfico Cone Indicator para Dentes Anteriores

*Cone Indicator for Anterior Teeth / Cone Indicator
Dientes Anteriores*

Posicionador indicado para radiografias periapicais de dentes anteriores, auxiliando no alinhamento do cilindro e no enquadramento da imagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Estrutura em polímero termoplástico com suporte para filme.

Indicação: Radiografias periapicais em dentes anteriores.

Uso: Posicionar o filme no suporte e alinhar o cilindro do aparelho conforme o indicador, seguindo a técnica radiográfica.

Características: Auxilia no paralelismo e direcionamento do feixe de raios-X; facilita o enquadramento da imagem; formato adaptado à região anterior; contribui para redução de erros de posicionamento e repetição de exames.



Uso: desenvolvido para utilização com **filme radiográfico (não incluso)**, sendo ideal para a rotina clínica em procedimentos diagnósticos e de acompanhamento.



Indicação clínica: permite a realização de **radiografias periapicais de dentes anteriores** com rapidez e precisão, assegurando correto posicionamento e melhor enquadramento da imagem.



Precisão e estabilidade: o design do posicionador auxilia no alinhamento adequado do cilindro de raios X, contribuindo para imagens mais consistentes e confiáveis.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Autoclave
135°C / 275°F

Posicionador Radiográfico Cone Indicator Digital para Dentes Anteriores

*Digital Cone Indicator for Anterior Teeth / Cone
Indicator Digital Dientes Anteriores*

Posicionador para radiografias periapicais de dentes anteriores com sensores digitais, auxiliando no alinhamento do cilindro e no enquadramento da imagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Estrutura em polímero termoplástico com suporte para sensor digital.

Indicação: Radiografias periapicais em dentes anteriores com sensores digitais.

Uso: Posicionar o sensor digital no suporte e alinhar o cilindro do aparelho conforme o indicador, seguindo a técnica radiográfica.

Características: Compatível com sensores digitais; auxilia no paralelismo e direcionamento do feixe de raios-X; facilita o enquadramento da imagem; formato adaptado à região anterior; contribui para redução de erros de posicionamento e repetição de exames.



Uso digital: desenvolvido para utilização com **sensor digital (não incluso)**, assegurando posicionamento estável e alinhamento adequado durante a captura da imagem.



Acessórios inclusos: acompanha **09 fixadores** verticais, compatíveis com diferentes modelos de sensores digitais, oferecendo versatilidade e adaptação à rotina clínica.



Biossegurança: fabricado em material **autoclavável**, permitindo esterilização em **até 135 °C**, conforme os protocolos de controle de infecção.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Autoclave
135°C / 275°F

Refil – Dispositivo de Mordida

Bite Device / Dispositivo para Mordida

Refil para reposição do apoio de mordida, auxiliando na estabilização do sensor ou filme durante radiografias intrabucais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Polímero termoplástico.

Indicação: Reposição do apoio de mordida em posicionadores radiográficos intrabucais.

Uso: Encaixar no dispositivo de mordida conforme o modelo do posicionador e utilizar durante a aquisição radiográfica.

Características: ajuda a manter a estabilidade do posicionador, reduzir movimentos e erros durante o exame.



Indicação: refil do dispositivo de mordida desenvolvido para uso nos Posicionadores **Radiográficos Cone Indicator Indusbello**, garantindo estabilidade e correto posicionamento durante a realização das radiografias.



Material: fabricado em **material esterilizável**, adequado aos protocolos de biossegurança.



Compatibilidade: compatível com os posicionadores Cone Indicator da linha Indusbello, sendo indicado para reposição e manutenção da rotina clínica.



Revelador e Fixador Radiográficos

Radiographic Developer and Fixer / Revelador y Fijador Radiográfico

Soluções indicadas para processamento manual de filmes radiográficos, garantindo revelação da imagem e fixação adequada do exame.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Soluções químicas específicas para revelação e fixação radiográfica.

Indicação: Processamento manual de filmes radiográficos odontológicos.

Uso: Utilizar conforme protocolo radiográfico, respeitando os tempos adequados de revelação, lavagem intermediária e fixação.

Características: Proporcionam contraste adequado e boa definição da imagem; asseguram fixação eficiente do filme; indicados para rotina clínica em radiologia odontológica.



Indicação: produtos destinados ao **processamento químico de filmes radiográficos**, utilizados nas etapas de **revelação e fixação**, garantindo qualidade de imagem e estabilidade do resultado radiográfico.



Comercialização: vendidos **separadamente** (Revelador Radiográfico e Fixador Radiográfico)..



Características: Prontos para uso, **Não necessitam diluição**. Proporcionam processamento confiável e padronizado do filme radiográfico



Kit com 18 Fixadores

Para posicionadores digitais

18 Sensor Holder kit for X-ray Positioner / Kit de 18 Fijadores para Sensor de Posicionador



Material esterilizável:
Seguro e conforme
protocolos clínicos.



Compatibilidade ampla:
Para diversos sensores
digitais.




Composição: 18 fixadores
(9 horizontais e 9 verticais).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Polímero termoplástico.

Indicação: Fixação de sensores digitais em posicionadores radiográficos.

Uso: Encaixar o fixador compatível com o modelo do sensor no posicionador e posicionar conforme a técnica radiográfica.

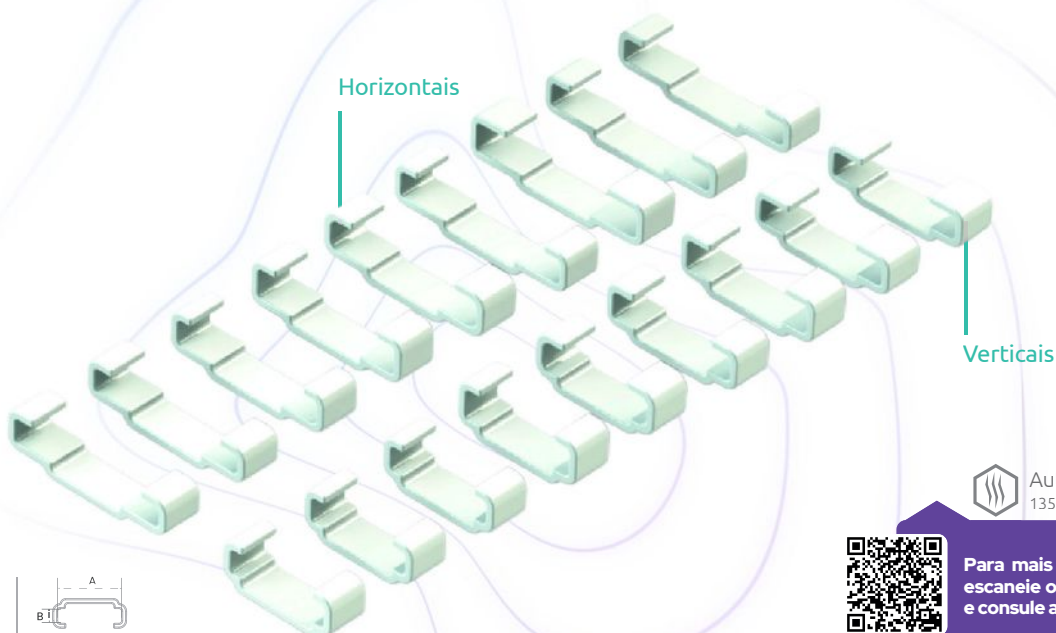

Autoclave
135°C / 275°F



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



HORIZONTAL
A x B

37,7 x 7 mm

38 x 5 mm

38,5 x 6 mm

39,8 x 5,7 x 5 mm

40,5 x 7 mm

44 x 6,1 mm

44 x 5,6 mm

44,2 x 5,5 mm

44,5 x 7 mm



VERTICAL
A x B

25 x 5 mm

25 x 5,7 mm

25,6 x 5,8 mm

27,8 x 7 mm

28 x 7 mm

31,3 x 6,2 mm


32,2 x 7 mm

32,5 x 5,6 mm

32,7 x 5,7 mm

Conjunto de fixadores indicado para adaptação de sensores digitais aos posicionadores radiográficos, auxiliando no encaixe correto do sensor e proporcionando maior estabilidade durante a aquisição radiográfica.



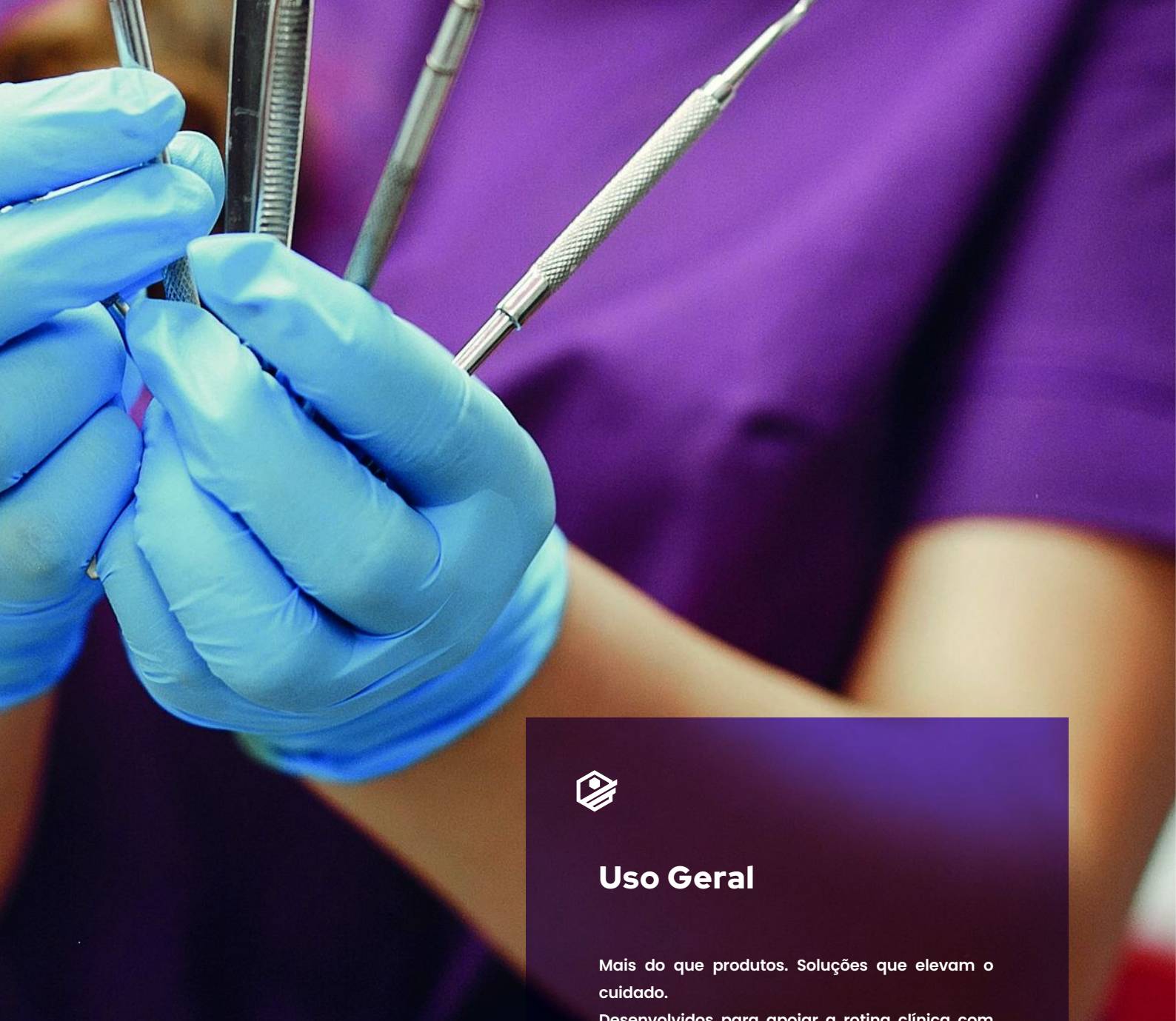

Uso Geral

Mais do que produtos. Soluções que elevam o cuidado.

Desenvolvidos para apoiar a rotina clínica com eficiência, segurança e praticidade, os produtos Indusbelo acompanham o profissional em cada etapa do atendimento.

**QUALIDADE
QUE FAZ
PARTE DO
PROCEDIMENTO**

Cada detalhe importa na prática clínica.

Por isso, desenvolvemos produtos que auxiliam o profissional desde a preparação até a finalização do atendimento, promovendo mais segurança, organização e eficiência.

Design funcional, desempenho consistente e confiança em cada uso.

Abritec PcD

Abritec PwD



Aplicação clínica: Apoio e segurança em atendimentos prolongados.



Medidas disponíveis: 14 mm, 20 mm, 26 mm e 32 mm.



Características: Design funcional e material autoclavável.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material atóxico.

Indicação: Manutenção da abertura bucal em pacientes com dificuldade de manter a boca aberta ou resistência ao atendimento odontológico.

Uso: Posicionar entre as arcadas dentárias conforme o tamanho indicado para o paciente, seguindo o protocolo clínico.

Medidas: 14 mm • 20 mm • 26 mm • 32 mm.

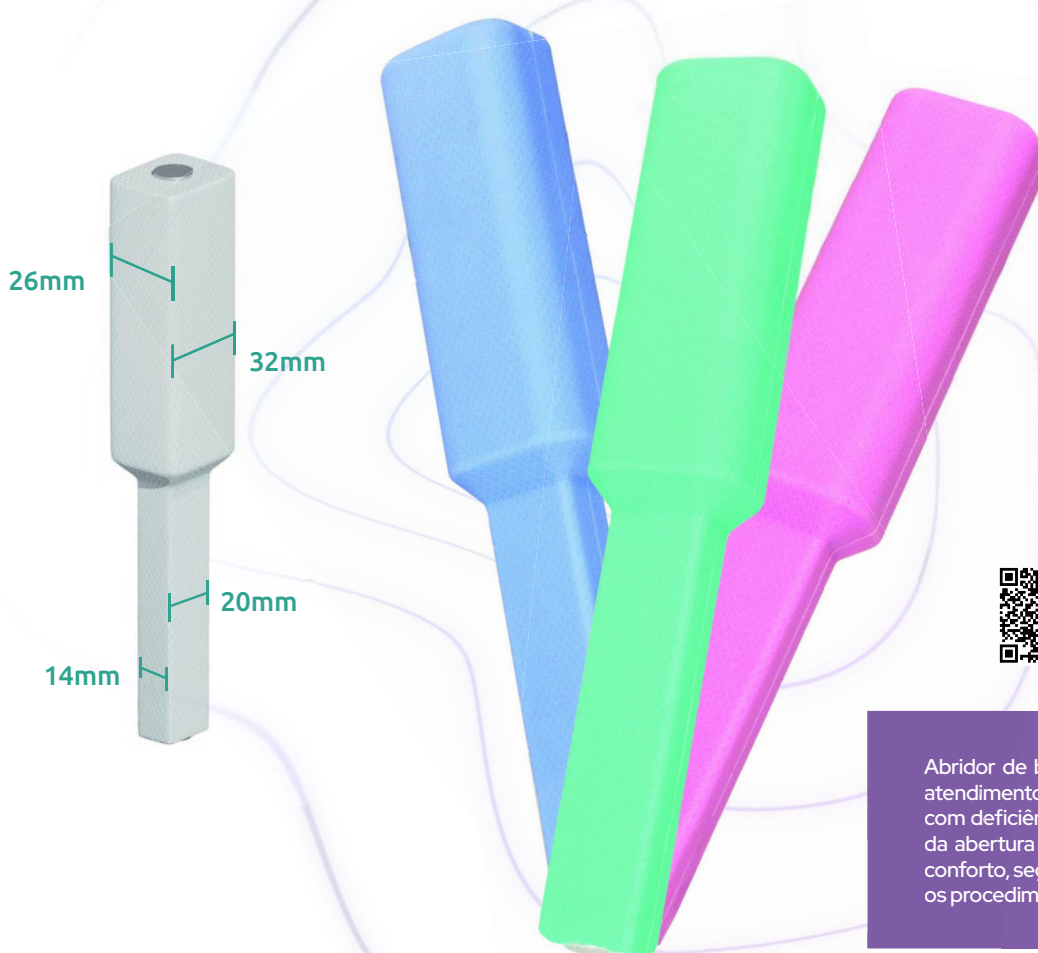

Cores






Autoclave
135°C / 275°F




Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.

Abridor de boca indicado para auxiliar no atendimento odontológico de pessoas com deficiência, facilitando a manutenção da abertura bucal e proporcionando mais conforto, segurança e estabilidade durante os procedimentos clínicos.

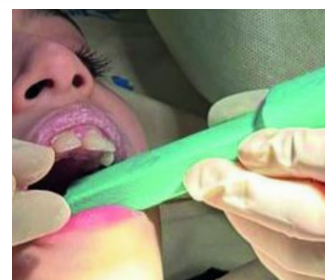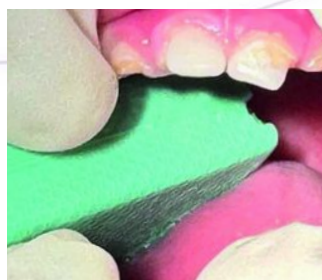


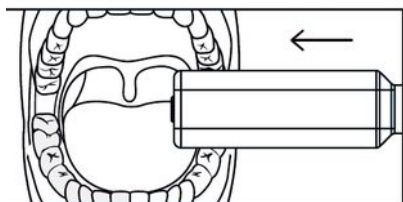

1. Escolha o lado ideal e mantenha o Abracec PcD estável entre a maxila e a mandíbula do paciente.

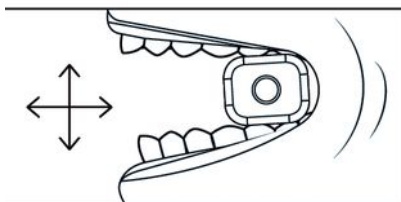

2. Posicione o Abracec PcD entre os pré-molares e molares. Desta forma, o paciente manterá a boca aberta, facilitando a estabilização da abertura bucal e a realização do procedimento.

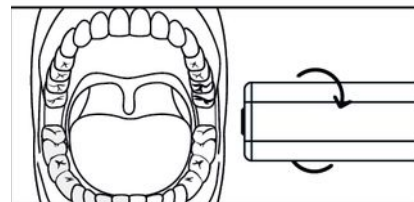

3. Em cada lado do Abracec PcD existem duas medidas. Se necessário, durante o procedimento, gire o cabo para alterar as dimensões.



Flúor Gel

Fluoride Gel | Gel de Flúor



Proteção eficaz: Auxilia na prevenção da cárie.



Fortalecimento do esmalte: Ação remineralizante.



Aplicação prática: Ideal para uso clínico e preventivo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Gel fluoretado.

Indicação: Profilaxia e prevenção da cárie dental por meio de aplicação tópica de flúor.

Sabores: Tutti-frutti e Menta.



Para mais detalhes, escaneie o QR Code e consulte a IFU.

Gel indicado para aplicação tópica de flúor, auxiliando na prevenção da cárie e no fortalecimento do esmalte dental.



Abritec

Mouth Opener

Abridor indicado para manter a boca aberta durante procedimentos odontológicos, facilitando o acesso clínico com mais conforto e segurança.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material atóxico.

Indicação: Manutenção da abertura bucal em atendimentos odontológicos, especialmente em pacientes com dificuldade de manter a boca aberta.

Uso: Posicionar entre as arcadas dentárias conforme o tamanho indicado para o paciente, seguindo o protocolo clínico.

Características: Formato anatômico que proporciona apoio e estabilidade durante o atendimento; contribui para melhor visibilidade e acesso às estruturas bucais.

Cores: 



Modelos: Pequeno (Odontopediatria), Médio e Grande.



Indicação: Indicado para **acomodação oclusal durante a abertura bucal**, auxiliando o atendimento odontológico com maior conforto e estabilidade para o paciente.



Aplicação clínica: Seu formato foi desenvolvido para proporcionar **encaixe adequado**, favorecendo a abertura bucal de forma segura e confortável durante procedimentos clínicos.



Asper

Óleo Lubrificante

Lubricant Oil / Aceite Lubricante

Óleo indicado para manutenção de instrumentos rotatórios, auxiliando no desempenho e na durabilidade das peças.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Óleo lubrificante específico para equipamentos odontológicos.

Indicação: Lubrificação de turbinas, contra-ângulos e peças de mão.

Uso: Aplicar conforme protocolo de manutenção dos equipamentos, antes dos processos de esterilização.

Características: Facilita o desempenho dos instrumentos rotatórios; contribui para redução de atrito e prolonga a vida útil das peças; disponível em duas versões.

Apresentação: Disponível nas versões 200ml e 500ml. Tradicional e Mentolada.



Modelos: Padrão e Mentol.



Indicação: Indicado para **lubrificação de canetas odontológicas de alta e baixa rotação**, contribuindo para o correto funcionamento e maior durabilidade dos equipamentos.



Aplicação clínica: Lubrifica eficientemente os componentes internos, reduzindo atrito e desgaste, prevenindo falhas operacionais e garantindo desempenho estável durante o uso clínico.



Adaptador para Sugador

Aspirator adaptor/ Adaptador para aspirador

Adaptador indicado para conexão de sugadores aos sistemas de sucção, garantindo encaixe seguro e praticidade clínica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Polímero termoplástico.

Indicação: Adaptação de sugadores aos sistemas de sucção odontológicos.

Uso: Encaixar entre o sugador e a mangueira de sucção conforme o diâmetro compatível.

Características: Permite conexão prática entre diferentes modelos de sugadores; proporciona melhor vedação; contribui para estabilidade durante a aspiração; facilita a rotina clínica.

Cores: 



Indicação: Dispositivo **flexível** utilizado para facilitar a conexão entre o sugador odontológico e o equipamento, garantindo encaixe seguro e funcional durante os procedimentos clínicos.



Aplicação clínica: Promove adaptação eficiente entre diferentes diâmetros de sucção, contribuindo para maior praticidade no uso do sugador e melhor desempenho na aspiração.



Dimensões: Diâmetro interno: **6 mm**
Diâmetro externo: **11 mm**



Autoclave
135°C / 275°F

Marcadores de Instrumentos

Silicone Code Rings

Anéis identificadores para organização de instrumentais, facilitando a separação por kits ou profissionais durante a rotina clínica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Silicone atóxico.

Indicação: Identificação e organização de instrumentais odontológicos.

Uso: Encaixar o marcador no cabo do instrumento conforme necessidade de identificação.

Características: Flexível e resistente; disponível em diferentes cores para facilitar a categorização dos instrumentos; não interfere na empunhadura; auxilia no controle e padronização dos kits clínicos.

Cores: 



Identificação por cores: Disponíveis em diversas cores, permitem a **rápida identificação dos instrumentos**, facilitando a organização durante os procedimentos clínicos.



Organização eficiente: Auxiliam na separação e padronização dos instrumentos, **otimizando o fluxo de trabalho** e reduzindo erros na rotina clínica.



Versatilidade de modelos: Disponíveis nos formatos **redondo e sextavado**, adaptam-se a diferentes tipos de instrumentos e preferências do profissional.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Afastador Labial Expandex

Retractor Expandex

Afastador indicado para retração simultânea dos lábios, proporcionando melhor exposição da arcada durante procedimentos clínicos e fotografia odontológica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material termoplástico atóxico e flexível.

Indicação: Afastamento labial em procedimentos clínicos e fotografia odontológica.

Uso: Posicionar conforme necessidade para afastar os lábios durante o atendimento.

Características: Formato que proporciona maior abertura e visibilidade da arcada; material flexível para melhor adaptação; bordas arredondadas para maior conforto do paciente.

Cores: ● ● ● ● ●




Exposição eficiente: Afasta lábios e tecidos moles de forma estável, proporcionando melhor visualização da área de trabalho.



Conforto ao paciente: Fabricado em material flexível, adapta-se suavemente à anatomia labial, **reduzindo o desconforto durante o uso clínico.**



Qualidade fotográfica: As bordas arredondadas contribuem para **fotografias odontológicas mais limpas**, com melhor enquadramento e menos interferências.

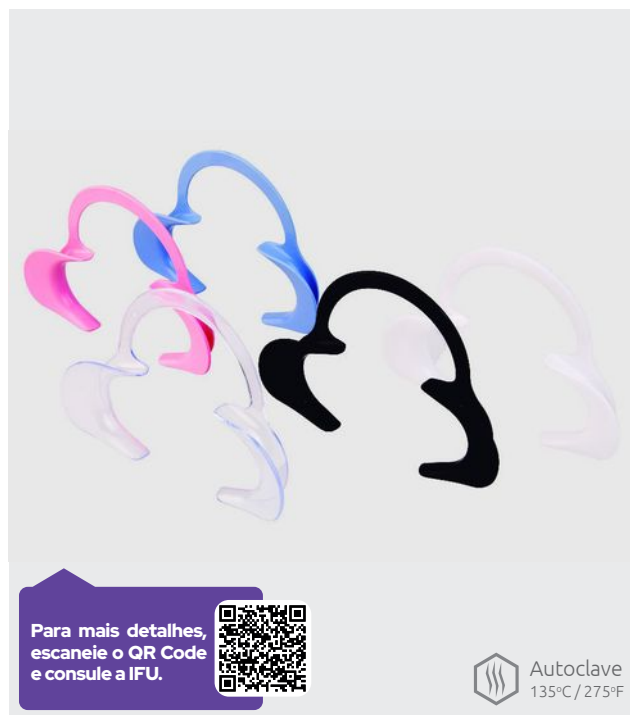

Afastador Labial e Lingual Lip Expand

Retractor Lip Expand

Afastador indicado para retração simultânea dos lábios e da língua, facilitando a visualização da arcada durante procedimentos clínicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material termoplástico atóxico e flexível.

Indicação: Afastamento labial e lingual em procedimentos clínicos e fotografia odontológica.

Uso: Posicionar conforme necessidade para afastar lábios e língua durante o atendimento.

Características: Formato anatômico que permite afastamento simultâneo; material flexível para melhor adaptação à cavidade bucal; bordas arredondadas para maior conforto do paciente; contribui para melhor visibilidade da arcada.

Cores: ● ● ● ● ●



Bloqueador de língua integrado: Conta com **exclusivo bloqueador lingual**, que mantém a língua afastada e melhora o acesso ao campo operatório.



Exposição ampliada: Afasta lábios e bochechas de forma eficiente, garantindo **maior visibilidade da área clínica.**



Conforto e flexibilidade: Fabricado em material flexível, adapta-se à anatomia do paciente, **reduzindo desconfortos durante o procedimento.**



Bandeja

Fluorescente com Glitter, Fosca e Fluorescente.

Tray - Glitter, Matte, Fluorescent Bandeja - Glitter, Mate, Fluorescente



Organização eficiente: Mantém instrumentais organizados e acessíveis.



Material resistente: Durável e compatível com esterilização.



Praticidade clínica: Facilita transporte e preparo dos procedimentos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicação: Organização e apoio de instrumentais e materiais odontológicos durante procedimentos clínicos.

Uso: Dispor os instrumentais sobre a bandeja conforme a necessidade do atendimento.



Autoclave
135°C / 275°F




Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Bandeja utilizada para organização e apoio de instrumentais odontológicos durante o atendimento clínico, auxiliando na disposição prática dos materiais e contribuindo para uma rotina mais organizada.



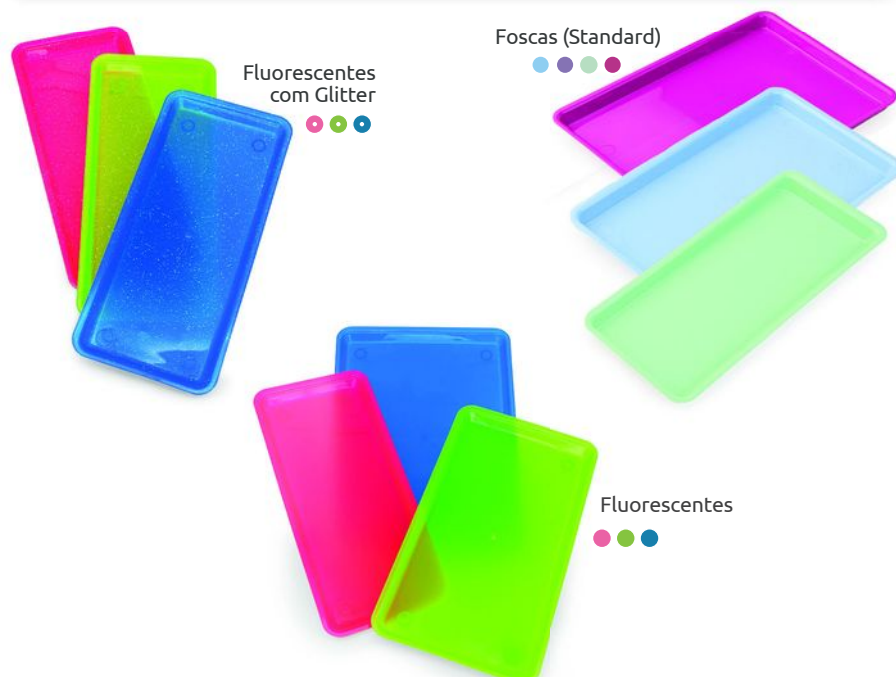

Box para Aparelhos

Retainer Case / Box para aparatos



Proteção segura: Armazena e protege aparelhos com eficiência.



Material resistente: Durável e de fácil higienização.



Fechamento prático: Segurança no transporte e armazenamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material termoplástico.

Indicação: Armazenamento de aparelhos ortodônticos, placas e dispositivos removíveis.

Uso: Colocar o aparelho limpo dentro do box e manter fechado quando não estiver em uso.



Autoclave
135°C / 275°F



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.

Estojo indicado para armazenamento e transporte de aparelhos ortodônticos ou placas removíveis, auxiliando na proteção do dispositivo contra poeira, impactos e contaminações quando fora da boca.





Prendedor de Babador Soft

Silicone bib clip / Porta babero silicona

Prendedor com cordão macio para fixação do babador, oferecendo conforto ao paciente e praticidade durante o atendimento clínico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Cordão flexível com presilhas de fixação.

Indicação: Fixação de babadores em pacientes durante procedimentos clínicos.

Uso: Prender o babador à presilha de fixação e colocar no paciente.

Características: Cordão macio ("soft") que proporciona maior conforto; presilhas resistentes para boa fixação; leve, prático e de fácil manuseio; contribui para organização da rotina clínica.

Cores: ● ● ● ●



Uso clínico versátil: Indicado para **babadores de pano, papel ou plástico**, adaptando-se às diferentes rotinas de atendimento.



Fixação segura: Mantém o babador, guardanapo ou papel firmemente preso durante todo o procedimento clínico.



Modelos disponíveis: Disponível nos modelos **Fio, Slim e Soft**, atendendo diferentes preferências de uso e manuseio.



Prendedor de Babador

Bib Clip / Porta Babero

Acessório para fixação do babador, mantendo-o firme durante o atendimento clínico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Cordão flexível com presilhas de fixação.

Indicação: Fixação de babadores em pacientes durante procedimentos clínicos.

Uso: Prender o babador à presilha de fixação e colocar no paciente.

Características: Ajustável, leve e prático; presilhas resistentes que garantem boa fixação; contribui para conforto do paciente e organização da rotina clínica.

Modelos: Espiral - Fio - Slim



Fixação segura: Mantém o babador, guardanapo ou papel firmemente preso durante todo o procedimento clínico.



Uso clínico versátil: Indicado para **babadores de pano, papel ou plástico**, adaptando-se às diferentes rotinas de atendimento.



Conforto e mobilidade: Permite **liberdade de movimento** ao paciente sem perder a eficiência na fixação do babador.



Cabo para Espelho Clínico

Dental Mirror Handle / Cable de espejo clínico

Cabo indicado para acoplamento do espelho clínico, proporcionando firmeza e controle durante o exame odontológico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Aço inoxidável.

Indicação: Suporte para espelhos clínicos em procedimentos odontológicos.

Uso: Rosquear o espelho clínico no cabo e posicionar conforme necessidade durante o exame.

Características: Formato anatômico para melhor empunhadura; compatível com espelhos clínicos padrão; proporciona estabilidade e conforto durante o uso.

Cores: ● ● ● ● ●



Manuseio clínico: Desenvolvido para o **manuseio de espelhos clínicos odontológicos**, facilitando o acesso e a visualização durante os procedimentos.



Maior alcance: Prolonga a **haste de manipulação**, proporcionando melhor alcance e mais conforto ao profissional durante o uso.



Design ergonômico: Formato **ergonômico** e **leve**, garantindo firmeza, controle e segurança durante o manuseio clínico.



Espelho Clínico Metálico

Metallic Clinical Mirror / Espejo Clínico Metálico

Espelho para visualização indireta da cavidade bucal, auxiliando no exame clínico e no acesso a áreas de difícil visualização.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Metal polido.

Indicação: Exame clínico odontológico e visualização indireta da cavidade bucal.

Uso: Posicionar conforme necessidade durante o atendimento.

Características: Superfície reflexiva que permite boa visualização das estruturas; formato anatômico que facilita o posicionamento; contribui para melhor acesso visual em regiões posteriores.

Modelos: Nº 5 • Nº 9 • Nº 10




Alta resistência: Fabricado em material metálico de alta durabilidade, garante **resistência ao uso contínuo** no ambiente clínico.



Reflexão precisa: Espelho clínico metálico com **reflexo em ambos os lados**, proporcionando **imagem nítida e fiel** para avaliações clínicas mais precisas.



Acabamento seguro: Apresenta **acabamento uniforme em toda a superfície**, oferecendo mais conforto ao paciente.

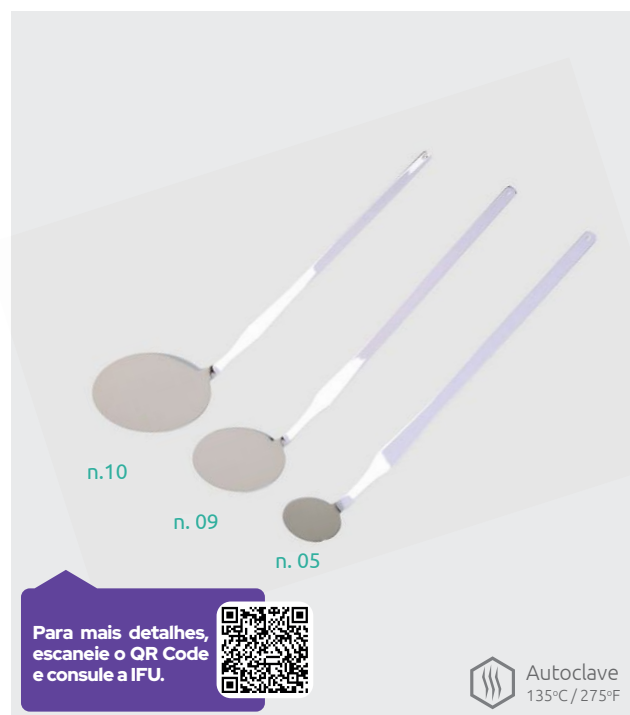

Espelho Clínico Bucal Nº5

Mouth Mirror Head / Espejo Clínico Nº5

Espelho indicado para visualização indireta da cavidade bucal, auxiliando no exame clínico e no acesso às áreas posteriores.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Aço inox e vidro.

Indicação: Exame clínico odontológico e visualização indireta da cavidade bucal.

Uso: Acoplar ao cabo para espelho clínico e posicionar conforme necessidade durante o atendimento.

Características: Superfície reflexiva que permite boa visualização das estruturas; formato anatômico que facilita o posicionamento; contribui para melhor acesso visual em regiões posteriores.

Modelo: Nº 5



Reflexo preciso: Maior nitidez na visualização das estruturas bucais.



Acesso às regiões posteriores: Facilita a inspeção indireta durante o exame clínico.



Resistente e confiável: Produzido em aço inox e vidro para maior durabilidade.



Moldeira Transfer para Implante

Impression Tray / Cubeta para Impresión

Moldeira indicada para moldagem de implantes, auxiliando na transferência precisa da posição do implante para o modelo de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material termoplástico.

Indicação: Moldagem de transferência em procedimentos implantodônticos.

Uso: Posicionar sobre a arcada contendo o transfer do implante e realizar a moldagem conforme protocolo clínico.

Características: Formato anatômico que facilita o encaixe na arcada; permite correta captura da posição do implante; contribui para maior precisão na confecção protética; prática e de fácil manuseio.



Retenção eficiente: Conta com **superfície perfurada**, canaletas internas de retenção e **seccionamentos verticais**, que auxiliam na **fixação do material de moldagem**.



Conforto e flexibilidade: Fabricado em material flexível, adapta-se à anatomia do paciente, **reduzindo desconfortos durante o procedimento**.



Precisão na moldagem: Desenvolvida para procedimentos de implante, garante **moldagens mais precisas** na arcada dentária superior e inferior.



Pote Dappen 2C

Twin Silicone Dappen Dish / Vaso Dappen Twin

Pote com dois compartimentos indicado para manipulação simultânea de materiais odontológicos durante procedimentos clínicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material termoplástico.

Indicação: Manipulação de materiais odontológicos como adesivos, cimentos, ácidos e soluções clínicas.

Uso: Depositar o material no pote e utilizar conforme necessidade durante o atendimento.

Características: Modelo com dois compartimentos (2C), permitindo separar materiais simultaneamente; superfície lisa de fácil limpeza; leve e resistente; formato estável que evita tombamentos durante o uso.

Cores: ● ● ● ●



Praticidade no dia a dia: Facilita a organização dos materiais e se adapta às **necessidades do profissional** durante o procedimento.



Dupla funcionalidade: Possui **duas concavidades**, permitindo o uso simultâneo de materiais distintos, otimizando o tempo clínico.



Material seguro: Fabricado em **silicone atóxico**, garantindo segurança no manuseio e no uso diário em procedimentos odontológicos.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Autoclave
135°C / 275°F

Pote Dappen Vidro

Glass Dappen Dish / Vasito Dappen Vidrio

Pote indicado para manipulação de materiais odontológicos líquidos ou pastosos durante procedimentos clínicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Vidro.

Indicação: Manipulação de materiais odontológicos como adesivos, cimentos, ácidos e soluções clínicas.

Uso: Depositar o material no pote e utilizar conforme necessidade durante o atendimento.

Características: Superfície lisa que facilita a limpeza; material resistente; formato estável que evita tombamentos; ideal para uso clínico rotineiro.



Dupla concavidade: Possui **duas cavidades**, permitindo o uso de diferentes materiais conforme a necessidade do procedimento.



Vidro transparente: Fabricado em **vidro translúcido**, facilita a visualização do material durante o preparo e o uso clínico.



Superfície polida: Acabamento liso que **facilita a limpeza** e a remoção completa dos resíduos, otimizando a higienização.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Autoclave
135°C / 275°F

Caixa com 12 unidades.
Box with 12un. / Caja con 12 un.

Pote Dappen Dedal

Finger Holder Dappen Dish/ Dappen Dedal

Pote indicado para manipulação de pequenas quantidades de materiais odontológicos, com formato tipo dedal que facilita o manuseio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Aço inoxidável.

Indicação: Manipulação de materiais odontológicos como paste profilática, resinas, cimentos, ácidos e soluções clínicas.

Uso: Depositar o material no pote e utilizar conforme necessidade durante o atendimento; a haste ajusta-se ao dedo para facilitar a empunhadura e o controle do profissional.

Características:

- Haste ajustável para encaixe no dedo do profissional.
- Superfície lisa que facilita a limpeza e remoção de resíduos.
- Forma tipo dedal para melhor empunhadura e controle.
- Produto autoclavável, podendo ser esterilizado entre usos conforme protocolo clínico.



Ajuste ao dedo: Possui **haste regulável** que se adapta ao dedo do profissional, garantindo encaixe firme e confortável.



Aço inoxidável: Fabricado em **aço inox**, oferece resistência, durabilidade e segurança para o uso clínico diário.



Mobilidade durante o procedimento: Permite **movimentação livre da mão**, mantendo o material sempre ao alcance durante a execução do procedimento.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Autoclave
135°C / 275°F

Pote Dappen Duo

Duo Dappen Dish / Vaso Dappen Duo

Pote com dois reservatórios indicado para manipulação simultânea de materiais odontológicos durante procedimentos clínicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Plástico odontológico (resina rígida).

Indicação: Manipulação de materiais como adesivos, cimentos, ácidos e soluções clínicas.

Uso: Depositar os materiais em cada compartimento e utilizar conforme a necessidade do atendimento.

Características: Dois reservatórios integrados (modelo Duo), permitindo separação de materiais; superfície lisa de fácil limpeza; leve e resistente; formato estável que ajuda a evitar tombamentos; prático para a rotina clínica.

Cores: ● ● ● ● ●



funcionalidade: Possui **duas partes integradas**, oferecendo mais versatilidade no preparo e manuseio de materiais.



Quatro cavidades: Conta com **quatro cavidades de tamanhos diferentes**, permitindo separar e organizar materiais conforme a necessidade do procedimento.



Mais possibilidades de uso: Facilita o uso simultâneo de diferentes materiais, otimizando o fluxo clínico e o tempo de atendimento.



Para mais detalhes,
escaneie o QR Code
e consulte a IFU.



Autoclave
135°C / 275°F

Pote Dappen Silicone

Silicone Dappen Dish / Vasito Dappen Silicona

Pote em silicone indicado para manipulação de materiais odontológicos, oferecendo estabilidade e praticidade durante os procedimentos clínicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Silicone.

Indicação: Manipulação de materiais odontológicos como adesivos, cimentos, ácidos e soluções clínicas.

Uso: Depositar o material no pote e utilizar conforme necessidade durante o atendimento.

Características: Material flexível que ajuda a evitar tombamentos; superfície lisa de fácil limpeza; base com boa aderência à bancada; leve, resistente e prático para o dia a dia clínico.

Cores: 



Silicone atóxico: Fabricado em **silicone atóxico**, seguro para o uso clínico e adequado à rotina odontológica.



Superfície antiaderente: Facilita a manipulação dos materiais e **simplifica a limpeza** após os procedimentos.



Não deforma e não quebra: Material **flexível e resistente**, que não deforma com o uso e é **inquebrável**, garantindo maior durabilidade.



Case para Facetas

Veneers Case / Estuche para Facetas

Estojo utilizado para armazenamento e transporte de facetas dentárias, auxiliando na proteção das peças contra danos, contaminações e extravios, além de facilitar a organização durante as etapas clínicas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material termoplástico.

Indicação: Armazenamento e transporte de facetas e pequenas restaurações indiretas.

Uso: Posicionar a faceta no interior do case e manter fechado até o momento da prova ou cimentação.

Características: Formato compacto; tampa com bom encaixe; interior adequado para acomodar facetas com segurança; contribui para organização da rotina clínica e preservação das peças protéticas.



Proteção delicada: Armazena facetas com segurança.



Organização prática: Compartimentos para melhor identificação.



Transporte seguro: Proteção contra danos e contaminação.



Protetor Ocular

Curing Light Eyeshield | Protector de Ojos

Acessório indicado para proteção dos olhos durante o uso do fotopolimerizador, bloqueando a luz intensa emitida pelo equipamento e reduzindo o risco de desconforto ou danos visuais para o profissional, assistente ou paciente durante o atendimento odontológico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Acrílico resistente e leve.

Indicação: Proteção contra a luz do fotopolimerizador em procedimentos odontológicos.

Uso: Posicionar entre o operador (ou paciente) e o tubo de luz do fotopolimerizador para bloquear a luz azul direta e reduzir reflexos indesejados.

Características: Superfície lisa e resistente; fácil adaptação ao disparo do fotopolimerizador; amplia conforto visual e segurança durante procedimentos com luz fotopolimerizada.

Modelos: Gota - Raquete



Modelos funcionais: Raquete e Gota para melhor adaptação.



Segurança no atendimento: Reduz desconforto visual.



Proteção direcionada: Bloqueia a luz direta da fotopolimerização.



Autoclave
135°C / 275°F

Suporte para Alicates

Pliers Rack | Soporte para Alicates

acessório utilizado para apoiar e organizar alicates e instrumentais de mão durante procedimentos clínicos, proporcionando acesso rápido aos instrumentos, mais organização da bancada e fluidez na rotina clínica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Material termoplástico rígido.

Indicação: Organização de alicates e/ou instrumentos similares.

Uso: Posicionar o suporte na bancada ou mesa auxiliar e encaixar os alicates e instrumentais nos respectivos slots durante o atendimento.

Características:

- Múltiplos compartimentos para acomodar diferentes instrumentais.
- Facilita a identificação e o acesso rápido aos alicates.
- Base estável que evita tombamentos.
- Material resistente para uso clínico diário.

Cores: ● ●



Organização eficiente: Acomoda até 15 alicates com fácil acesso.



Agilidade no atendimento: Otimiza tempo e fluxo clínico.



Versatilidade de aplicação: Uso em ortodontia e outras áreas clínicas.



Autoclave
135°C / 275°F

Espátula Plástica

Plastic Spatula

Instrumento utilizado para manipulação, homogeneização e aplicação de materiais odontológicos como alginato, gesso ou massas de moldagem, auxiliando na preparação e controle dos materiais durante os procedimentos clínicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Polímero plástico atóxico e resistente.

Indicação: uso geral, as espátulas plásticas são indicadas para manipulação de materiais.

Características: Leves e práticas; não aderem facilmente ao material; contribuem para organização e biossegurança no atendimento.

Cores: ● ● ● ●




Manipulação precisa: Ideal para espatulação de materiais.




Material leve: Plástico resistente e de fácil higienização.



Uso prático: Mais controle e conforto no procedimento.

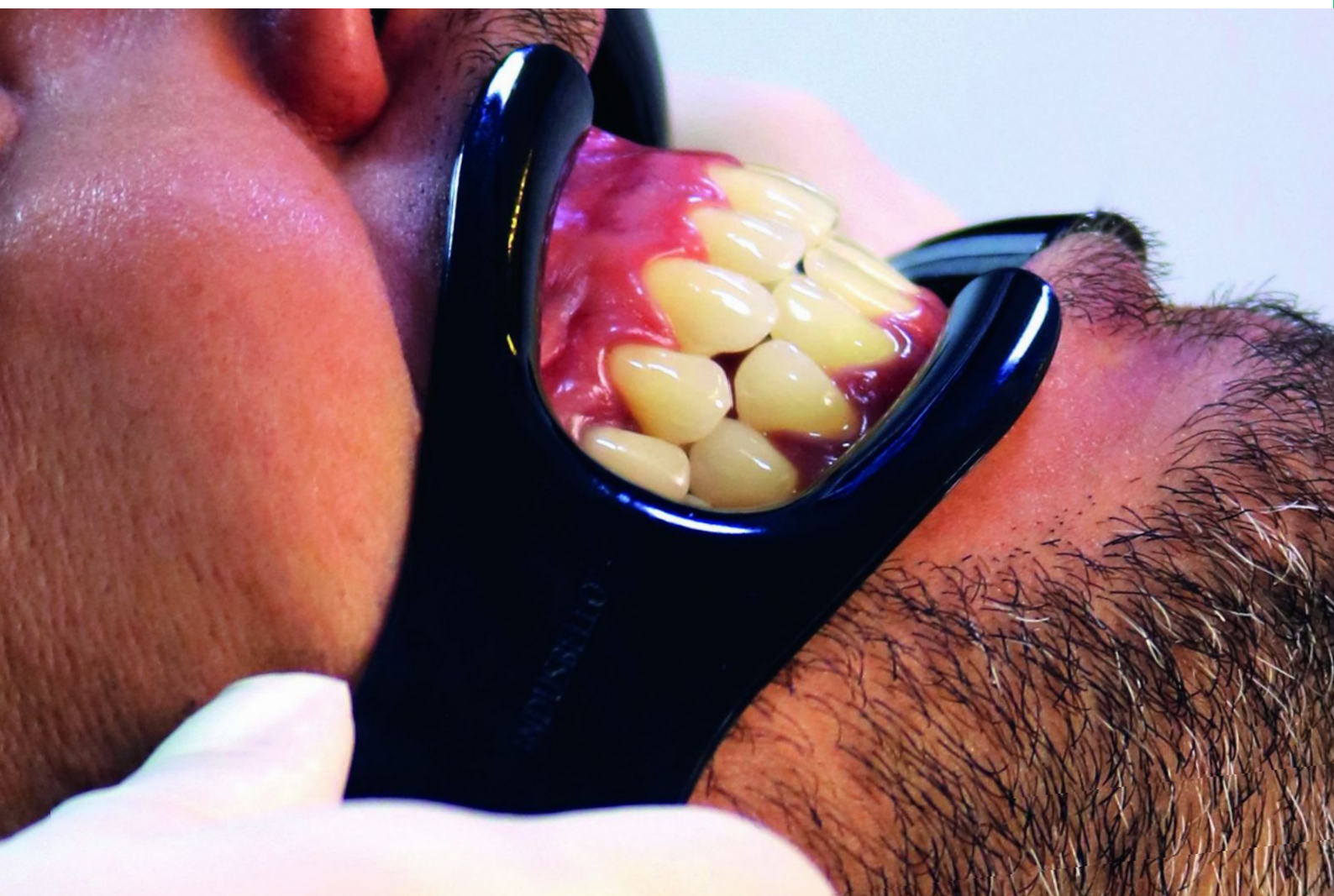

Acesse nossa lista completa de produtos!

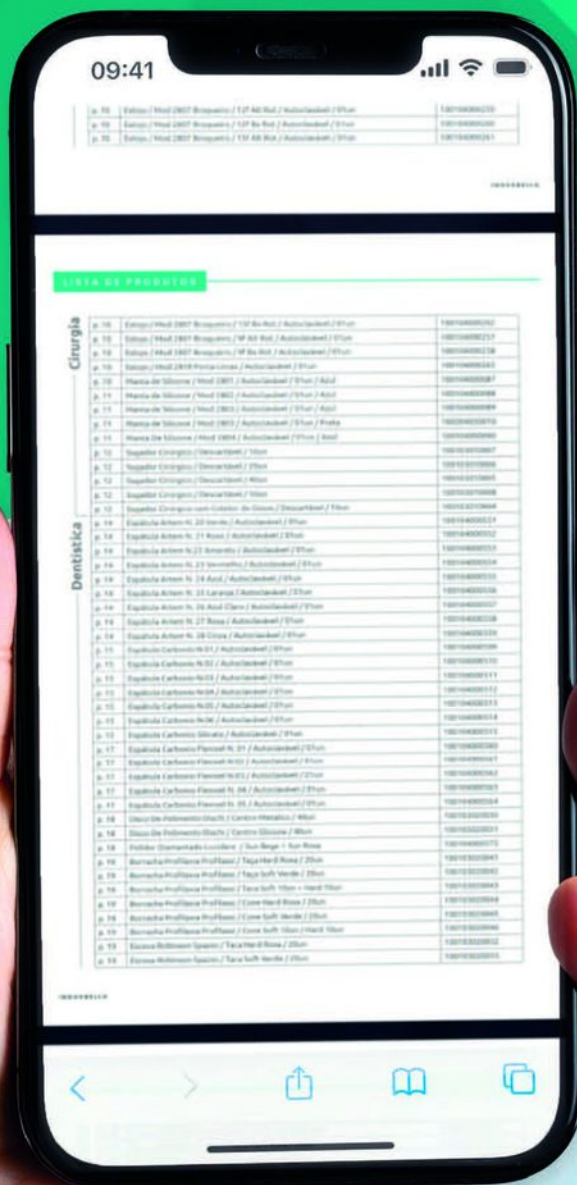

Quer conhecer toda a nossa linha de produtos?

É simples: basta escanear o QR Code e acessar a lista completa diretamente no seu celular!



Todos os nossos produtos na palma da sua mão!

Transforme sua ideia em inovação para o setor da saúde

Através da Induslab, profissionais da **saúde**, **pesquisadores** e **universidades** podem desenvolver novas soluções em parceria com a Indusbelllo.

Por que levar sua ideia para a Induslab?

- Desenvolvimento em **parceria com a Indusbelllo**
- Possibilidade de transformar sua ideia em **produto real**
 - **Apoio técnico e industrial** especializado
- Conexão com **profissionais** e **universidades**.

Tem uma ideia inovadora?

Apresente seu projeto ao Induslab e faça parte da próxima inovação da Indusbelllo.



Abritec PcD
Dra Andreia Marsiglio



Réguas Aureum
Dra. Adriana de Oliveira e
Dr. Hebert Samuel Fabre



Dispositivo ClarkTec
Ms. Dr. Andre Caliman

www.indusbello.co
www.indusbello.com.br

 **indusbello co.**